



此面作为封面

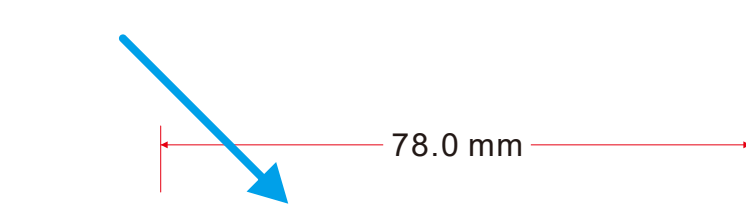


电子目镜使用说明书


中文/English/日本語/Español/Français/Italiano

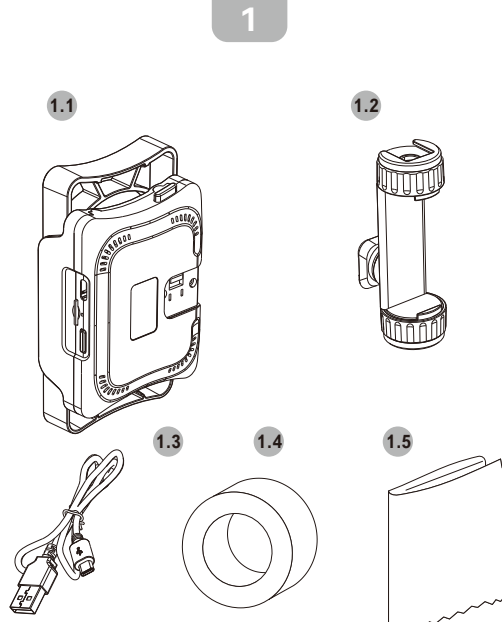


2

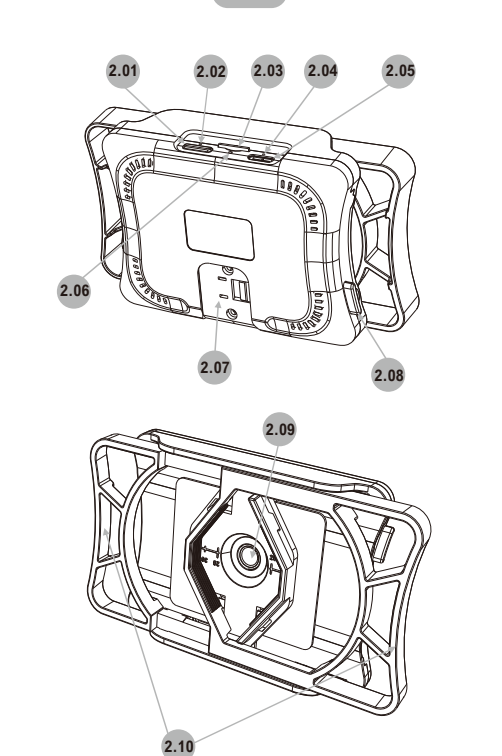

3

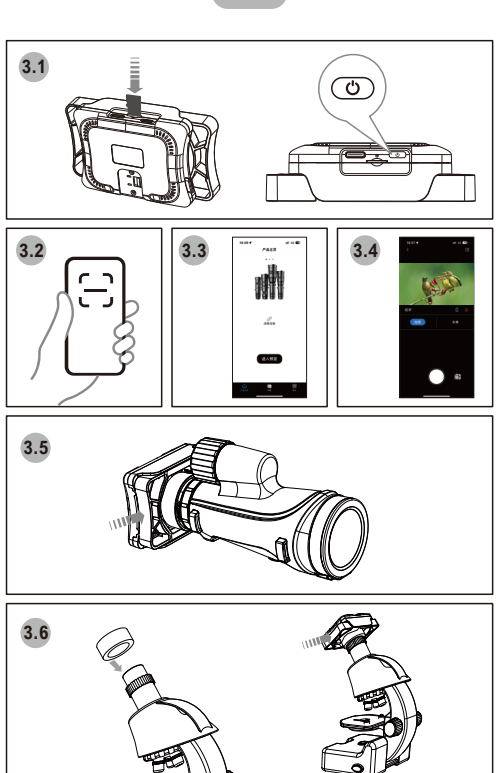

4

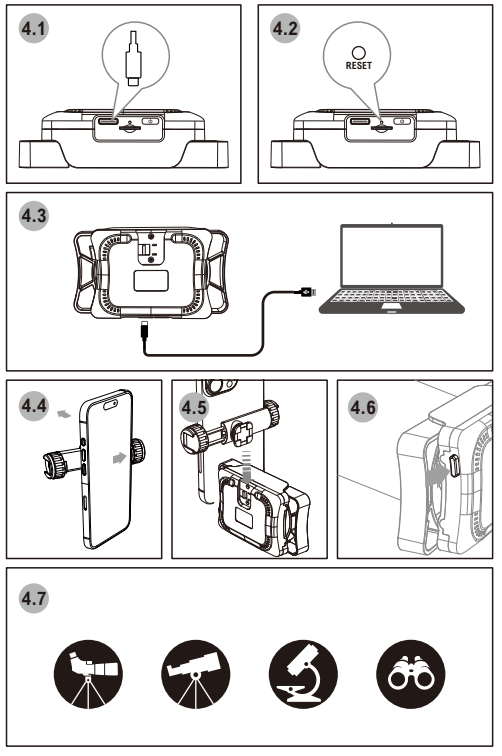

材质：80克书纸（哑光）
印刷方式：单黑正反印刷
折量：需要折量

*注：红色实线为切线蓝色虚线为折线请不要印刷出来。

中文

注：本栏为中文使用说明书内容左侧第一幅图为例。

1

产品配件清单

- 1.1 电子目镜
- 1.2 手机拉伸夹
- 1.3 USB Type-C充电线
- 1.4 EVA环(用于连接固定小尺寸目镜)
- 1.5 擦拭布

2

电子目镜介绍

- 2.01 电源开关和WiFi开关
- 2.02 WiFi指示灯
- 2.03 TF卡槽
- 2.04 充电/工作状态指示灯
- 2.05 USB Type-C接口
- 2.06 复位键
- 2.07 手机拉伸卡槽
- 2.08 手机拉伸卡扣解锁开关
- 2.09 镜头
- 2.10 夹子左右按压开关

3

目镜使用说明

- 3.1 插入TF卡。长按按钮3秒。 (注：内存卡第一次使用需要格式化，APP会提醒。) 3.2 用手机扫描说明书的二维码可下载APVision软件并安装。 3.3 安装完成后打开APP，点击“连接设备”将新购买摄像头设备WiFi地址界面。查找WiFi名称为：Apexel-OC001-xxxxx，默认密码：12345678。注：双击按钮开关/关闭WiFi。 3.4 电子目镜的指示灯说明 蓝灯常亮—设备开机状态。 蓝灯闪烁—设备充电状态。 黄灯闪烁—WiFi等待连接状态。 黄灯常亮—WiFi连接完成。 3.5 当连接WiFi成功后即被找到APP实时预览画面，拍摄、录像、查看、下载等操作均在APP内完成。 3.6 连接望远镜的方法 首先将EVA圆环套上望远镜目镜端，接着同时拨压目镜夹左右两边卡扣，并旋上并按住目镜解锁开关开始拆卸目镜。 (注：使用EVA圆环是增大外径尺寸导致夹具夹持不稳现象，某些望远镜目镜外径大于025MM可以不使用EVA圆环。) 3.7 连接显微镜的方法 首先将EVA圆环套上显微镜目镜端，接着同时拨压目镜夹左右两边卡扣，并旋上并按住目镜解锁开关开始拆卸目镜。 (注：使用EVA圆环是增大外径尺寸导致夹具夹持不稳现象，某些显微镜目镜外径大于025MM可以不使用EVA圆环。) 3.8 连接显微镜的方法 首先将EVA圆环套上显微镜目镜端，接着同时拨压目镜夹左右两边卡扣，并旋上并按住目镜解锁开关开始拆卸目镜。 (注：使用EVA圆环是增大外径尺寸导致夹具夹持不稳现象，某些显微镜目镜外径大于025MM可以不使用EVA圆环。)

4

其它说明

- 4.1 充电 连接电源适配器，type-c供电，充电时灯亮黄，充电时2-3小时，充满电时灯亮绿，续航时长约150分钟。 4.2 复位 用针卡扣按复位键，设备关机，指示灯熄灭。 4.3 数据传输 将数据线插入USB Type-C接口，另一端插入USB Type-A接口，即可实现数据传输。 4.4 数据保存 将数据线插入USB Type-C接口，另一端插入USB Type-A接口，即可实现数据传输。 4.5 数据删除 将数据线插入USB Type-C接口，另一端插入USB Type-A接口，即可实现数据传输。 4.6 数据备份 将数据线插入USB Type-C接口，另一端插入USB Type-A接口，即可实现数据传输。 4.7 数据恢复 将数据线插入USB Type-C接口，另一端插入USB Type-A接口，即可实现数据传输。 4.8 数据同步 将数据线插入USB Type-C接口，另一端插入USB Type-A接口，即可实现数据传输。 4.9 数据同步 将数据线插入USB Type-C接口，另一端插入USB Type-A接口，即可实现数据传输。 4.10 数据同步 将数据线插入USB Type-C接口，另一端插入USB Type-A接口，即可实现数据传输。

English

Note: This section is an English instruction content using the illustration in the first column on the left as an example.

1

Product Accessories List

- 1.1 Electronic Eyepiece
- 1.2 Smartphone Stretch Clip
- 1.3 USB Type-C Charging Cable
- 1.4 EVA Ring (for connecting and fixing small-sized eyepieces)
- 1.5 Cleaning Cloth

2

Introduction to the Electronic Eyepiece

- 2.01 Power and WiFi Switch
- 2.02 WiFi Indicator Light
- 2.03 TF Card Slot
- 2.04 Charging/Working Status Indicator Light
- 2.05 USB Type C Interface
- 2.06 Reset Button
- 2.07 Smartphone Clip Slot
- 2.08 Smartphone Clip Release Switch
- 2.09 Lens
- 2.10 Clip Left and Right Pressure Switches

3

Eyepiece Usage Instructions

- 3.1 Insert the TF card and press the button for 3 seconds to turn on the device. (Note: The memory card needs to be formatted for the first use, and the APP will remind you with a pop-up window.) 3.2 Scan the QR code in the manual with your smartphone to download the APVision software. 3.3 After installation, open the APP and click "Connect Device" to go to the device search/WiFi hotspot interface. Please find the WiFi name: Apexel-OC001-xxxxx, default password: 12345678. Note: Double-click the button to turn WiFi on/off. 3.4 Electronic Eyepiece Indicator Light Description Blue light steady on - Device is powered on Blue light flashing - Device is low on battery Yellow light flashing - WiFi is waiting to connect Yellow light steady on - WiFi is connected 3.5 When the WiFi connection is successful, it will jump to the real-time preview screen of the APP, and operations such as shooting, recording, viewing, and downloading are all completed within the APP. 3.6 Connecting to a Telescope First, place the EVA ring over the eyepiece clip without releasing and attach it to the telescope's eyepiece end to start shooting and using. 3.7 Connecting to a Microscope First, place the EVA ring over the microscope's eyepiece end, then press both sides of the eyepiece clip without releasing and attach it to the microscope's eyepiece end to start shooting and using. (Note: Using the EVA ring increases the outer diameter size to make the clip more secure. Some microscope eyepiece ends with a diameter larger than 025MM do not need to use the EVA ring.)

4

Other Instructions

- 4.1 Charging Connect the power adapter, with Type-C for power supply. The red light will stay on during charging, and it takes about 2-3 hours to fully charge. The green light will stay on when fully charged. The battery life is approximately 150 minutes. 4.2 Reset Use a card removal pin to briefly press the reset button. The device will shut down, and all indicator lights will go out. 4.3 Data Transfer Insert the USB Type-C end of the data cable into the port, and the other end into the computer's USB port for data transfer and reading. At this point, briefly press the electronic eyepiece switch button to cycle through the selection modes: "Real Time" > "Still" > "Movie". 4.4 *Note: If you need to mount your smartphone on the clip for observation, please first place your smartphone into the stretch clip. 4.5 Then, insert the smartphone along with the stretch clip into the electronic eyepiece end. 4.6 Press the unlock button and slide up to remove the smartphone and stretch clip. 4.7 The electronic eyepiece is a cutting-edge device that seamlessly links your smartphone to a range of optical instruments, from microscopes to telescopes. It enables direct viewing and recording of observations on your phone, simplifying the capture of stunning images and videos. Plus, it facilitates easy sharing of these incredible moments, enhancing the user experience and making observation more engaging and fun. 4.8 If there is no operation within 3 minutes in the powered-on state, the electronic eyepiece will automatically shut down. Please turn it on again if you need to use it. 4.9 Thank you very much for choosing our smartphone electronic eyepiece. Please read the manual carefully before using this lens, and we suggest you keep it well for future reference.

日本語

注：この欄は、左側の第一欄のイラストを例として日本語の使用説明内容です。

1

製品のアクセサリリスト

- 1.1 電子目鏡
- 1.2 携帯電話用ストレッチクリップ
- 1.3 USB Type-C充電ケーブル
- 1.4 EVAリング (小型目鏡を接続固定用)
- 1.5 拭き布

2

電子目鏡の紹介

- 2.01 パワー/WiFiスイッチおよびWiFiスイッチ
- 2.02 WiFiインジケータランプ
- 2.03 TFカードスロット
- 2.04 充電/動作状態インジケータランプ
- 2.05 USB Type-Cインターフェース
- 2.06 リセットボタン
- 2.07 携帯電話クリップスロット
- 2.08 携帯電話クリップアンロックスイッチ
- 2.09 レンズ
- 2.10 クリップ左右圧迫スイッチ

3

目鏡の使用法

- 3.1 TFカードを挿入し、ボタンを長押し3秒で電源を入れます。 (注：メモリカードは初回はフォーマットが必要です。アプリがポップアップで通知します。) 3.2 携帯電話で説明書のQRコードをスキャンして、APVisionソフトウェアをダウンロードします。 3.3 インストールが完了したら、アプリを開き、「デバイス接続」をクリックすると、デバイスのWiFiホットスポット検索画面が表示されます。WiFi名として「Apexel-OC001-xxxxx」を見つけ、パスワードとして「12345678」を入力してください。注：ボタンをダブルクリックしてWiFiをオン/オフします。 3.4 電子目鏡のインジケータランプの説明 青灯常亮—デバイスが起動しています。 青灯点滅—デバイスの電池が少なくなっています。 黄灯点滅—WiFiが接続待ちの状態です。 黄灯常亮—WiFiが接続完了しました。 3.5 WiFi接続に成功すると、APPのリアルタイムプレビュー画面に飛び、撮影、録画、視聴、ダウンロードなどの操作はすべてAPP内でできます。 3.6 望遠鏡への接続方法 最初にEVAリングを望遠鏡の目鏡端に装着し、次に目鏡クリップの左右の両側を同時に押さずに、望遠鏡の目鏡端に装着して撮影・使用を開始します。 3.7 顕微鏡への接続方法 最初にEVAリングを顕微鏡の目鏡端に装着し、次に目鏡クリップの左右の両側を同時に押さずに、顕微鏡の目鏡端に装着して撮影・使用を開始します。 (注：EVAリングを使用することで、外径サイズを増やし、クリップが安定した状態になります。一部の顕微鏡の目鏡端の外径が025MMを超える場合は、EVAリングを使用する必要があります。) 3.8 顕微鏡への接続方法 最初にEVAリングを顕微鏡の目鏡端に装着し、次に目鏡クリップの左右の両側を同時に押さずに、顕微鏡の目鏡端に装着して撮影・使用を開始します。 (注：EVAリングを使用することで、外径サイズを増やし、クリップが安定した状態になります。一部の顕微鏡の目鏡端の外径が025MMを超える場合は、EVAリングを使用する必要があります。)

4

その他の説明

- 4.1 充電 電源アダプターに接続し、Type-Cで電源を供給します。充電中は赤いLEDライトが点灯し、充電に約2-3時間かかります。充電完了後は緑色のLEDライトが点灯し、約150分間の使用が可能です。 4.2 リセット カード除去ピンで押し、ボタンを短押しすると、デバイスがシャットダウンし、すべてのインジケータランプが消滅します。 4.3 データ転送 データケーブルのUSB Type-Cプラグをポートに挿入し、もう一方のプラグをコンピュータのUSBポートに挿入します。この時点で、電子目鏡のスイッチボタンを短押ししてモードを選択します。モードは「リアルタイム」>「静止画」>「動画」の順で切り替わります。 4.4 *注：スマートフォンをクリップに付けて観察が必要な場合は、まずスマートフォンをストレッチクリップに入れてください。 4.5 次に、スマートフォンと一緒にストレッチクリップを電子目鏡に装着します。 4.6 ストレッチクリップのロックボタンを押して、スマートフォンとストレッチクリップを解除して取り出します。 4.7 電子目鏡は革新的なツールで、携帯型スマートフォンを様々な伝統的な光学機器と統合し、顕微鏡、望遠鏡、カメラなどから撮影と録画を可能にします。これにより、観察を簡便にし、素晴らしい画像と動画を簡単に撮影できるようにします。さらに、これらの素晴らしい瞬間を簡単に共有し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、観察をより楽しく面白くします。 4.8 もし3分間の操作がない場合、電子目鏡は自動的にシャットダウンします。使用の場合は、再び電源を入れてください。 4.9 誠にありがとうございます。スマートフォン電子目鏡を選んでいただき、ありがとうございます。使用前に必ずこのマニュアルを熟読してください。また、今後の参考のためにこのマニュアルを大切に保管してください。

Español

Note: Esta sección es un contenido de instrucciones de uso en español, tomado como ejemplo la ilustración de la primera columna de la izquierda.

1

Lista de accesorios del producto

- 1.1 Ocular electrónico
- 1.2 Abra para teléfono móvil
- 1.3 Cable de carga USB Type-C
- 1.4 Anillo EVA (para conectar y fijar oculares de pequeño tamaño)
- 1.5 Paño de limpieza

2

Introducción al ocular electrónico

- 2.01 Interruptor de encendido y de WiFi
- 2.02 Indicador de WiFi
- 2.03 Ranura para tarjeta TF
- 2.04 Indicador de estado de carga/trabajo
- 2.05 Puerto USB Type C
- 2.06 Botón de reinicio
- 2.07 Ranura para abra del teléfono
- 2.08 Botón de desbloqueo de la abra del teléfono
- 2.09 Lente
- 2.10 Botones de presión izquierdo y derecho del clip

3

Instrucciones de uso del ocular

- 3.1 Inserte la tarjeta TF y mantenga presionado el botón por 3 segundos para encender. (Nota: la tarjeta de memoria debe ser formateada la primera vez que se usa, y la APP le notificará con una ventana emergente.) 3.2 Puede descargar el software APVision escaneando el código QR en el manual con su teléfono móvil. 3.3 Después de la instalación, abra la APP y haga clic en "Conectar dispositivo" para saltar a la pantalla de búsqueda del punto de acceso WiFi del dispositivo. Si desea encontrar el nombre WiFi, Apexel-OC001-xxxxx, contraseña predeterminada: 12345678. Nota: Doble clic en el botón para encender/apagar el WiFi. 3.4 Descripción de las luces de advertencia del ocular electrónico Luz azul constante - El dispositivo está encendido. Luz azul parpadeante - El dispositivo tiene poca batería. Luz amarilla parpadeante - El dispositivo está esperando a conectarse a WiFi. Luz amarilla constante - La conexión WiFi está establecida. 3.5 Cuando la conexión WiFi se realice correctamente, saltará a la pantalla de vista previa en tiempo real de la APP/ACCIÓN y operaciones como disparar, grabar, ver y descargar se completarán dentro de la APP/ACCIÓN. 3.6 Conectando a un Telescopio Primero, coloque el anillo EVA sobre el clip del eyepiece sin soltarlo y luego adjunte el clip del eyepiece al extremo del telescopio para comenzar a disparar y usar. 3.7 Conectando a un Microscopio Primero, coloque el anillo EVA sobre el clip del eyepiece del microscopio, luego presione ambos lados del clip del eyepiece sin soltarlo y luego adjunte el clip del eyepiece al extremo del microscopio para comenzar a disparar y usar. (Nota: El uso del anillo EVA aumenta el diámetro exterior para hacer que el clip sea más seguro. Algunos oculares de microscopio con un diámetro mayor que 025MM no necesitan usar el anillo EVA.)


4

Otras instrucciones


- 4.1 Carga Conecte el adaptador de alimentación, con suministro de Type-C, la luz roja se enciende cuando se está cargando. La carga tarda entre 2-3 horas, y la luz verde permanece encendida cuando la batería está completamente cargada. La duración de la batería es aproximadamente de 150 minutos. 4.2 Reinicio Presione brevemente el botón de reinicio con un pin para extraer tarjetas, el dispositivo se apagará y todos los LEDs indicarán que se apagaron. 4.3 Transferencia de datos Inserte el conector USB Type-C del cable de datos en el puerto y el otro extremo en el puerto USB de su computadora para transferir y leer datos. En este momento, presione brevemente el botón de encendido del ocular electrónico para cambiar entre los modos de selección: "Tiempo real" > "Fotografía" > "Grabación de video". 4.4 *Nota: Si necesita colocar el teléfono en el clip para observar, primero coloque su teléfono en el clip. 4.5 Luego, coloque su teléfono junto con el clip en el extremo del ocular electrónico. 4.6 Presione el botón de desbloqueo y deslice hacia arriba para sacar su teléfono y el clip. 4.7 El ocular electrónico es una herramienta innovadora que le permite conectar y usar su smartphone con una variedad de instrumentos ópticos tradicionales, incluidos microscopios, telescopios, telescopios de astronomía y telescopios terrestres. Esto simplifica la captura de imágenes y videos impresionantes, además de facilitar el compartir estos increíbles momentos con otros. 4.8 Si no hay operación dentro de 3 minutos en el estado encendido, el ocular electrónico se apagará automáticamente. Si necesita usarlo, por favor, encienda el manual. 4.9 Si hay alguna pregunta sobre el uso del ocular electrónico, por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo, y le sugerimos que lo mantenga bien para futuras referencias.

Electronic Eyepiece instruction


中文/English/日本語/Español/Français/Italiano

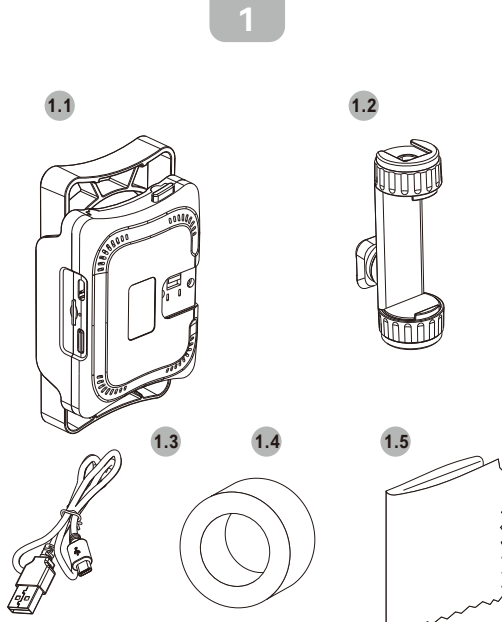


2

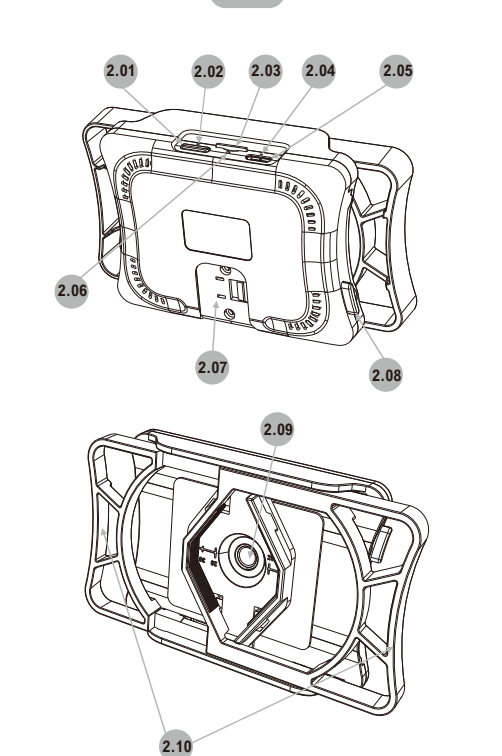

3

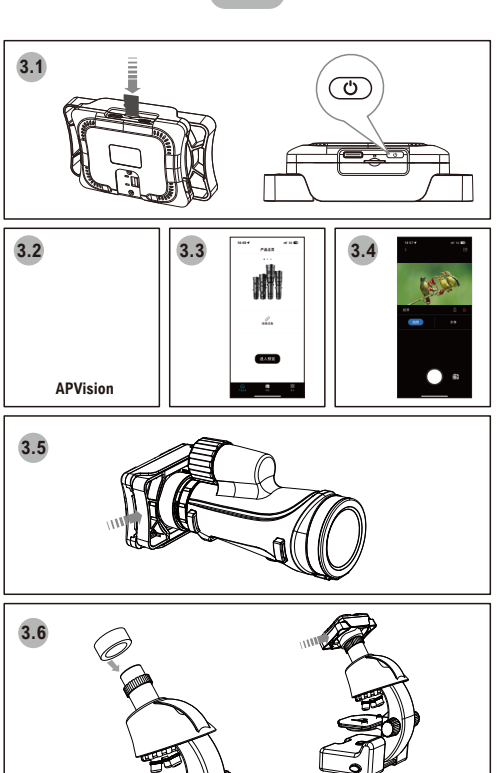

4

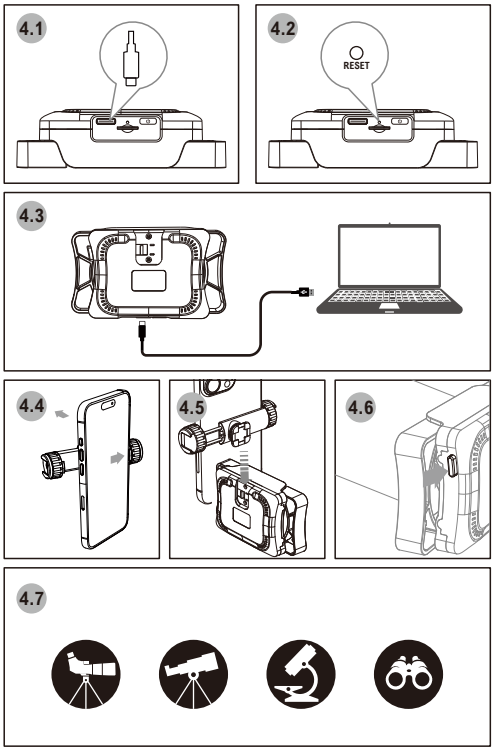

Deutsch

Anmerkung: Dieser Abschnitt ist der Inhalt der Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache, wobei das Beispiel in der ersten Spalte links verwendet wird.

1

Liste der Produktzubehörteile

- 1.1 Elektronisches Okular
- 1.2 Smartphone-Steckklammer
- 1.3 USB Type-C Ladekabel
- 1.4 EVA-Ring (zur Verbindung und Fixierung kleiner Okulare)
- 1.5 Reinigungstuch

2

Einführung in das elektronische Okular

- 2.01 Strom- und WLAN-Schalter
- 2.02 WLAN-Anzeigelampe
- 2.03 TF-Karten-Steckplatz
- 2.04 Lade-/Arbeitsstatus-Anzeigelampe
- 2.05 USB Type C Schnittstelle
- 2.06 Reset-Taste
- 2.07 Smartphone-Klammer-Steckplatz
- 2.08 Entsperr-Schalter für Smartphone-Klammer
- 2.09 Objektiv
- 2.10 Links und Rechts Druck-Schalter für Klammer

3

Anleitung zur Verwendung des Okulars

- 3.1 Stecken Sie die TF-Karte ein und halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. (Anmerkung: Die Speicherkarte muss beim ersten Mal formatiert werden, die APP wird Sie mit einem Popup-Fenster informieren.) 3.2 Scannen Sie den QR-Code im Handbuch mit Ihrem Handy, um die APVision-Software herunterzuladen. 3.3 Nach der Installation öffnen Sie die APP und klicken Sie auf "Gerät verbinden", um zum Bildschirm für die Suche nach dem WLAN-Netzwerk des Geräts zu gelangen. Bitte suchen Sie nach dem WLAN mit dem Namen Apexel-OC001-xxxxx, Standardpasswort: 12345678. Anmerkung: Doppelklicken Sie auf das Feld, um das WLAN einzuschalten oder auszuschalten. 3.4 Erklärung der Anzeigelampe des elektronischen Okulars Blaues Licht immer an - Gerät ist eingeschaltet. Blaues Licht blinkt - Gerät hat niedrige Batterie. Gelbes Licht immer an - WLAN wird auf die Verbindung. Gelbes Licht immer an - WLAN ist verbunden. 3.5 Wenn die WLAN-Verbindung erfolgreich ist, wird zum Echtzeit-Vorschau-Bildschirm der APP gesprungen und Vorgänge wie Aufnehmen, Aufzeichnen, Anzeigen und Herunterladen werden alle innerhalb der APP abgeschlossen. 3.6 Methode zur Verbindung eines Fernrohrs Drücken Sie gleichzeitig die beiden Seiten des Okularklammers und setzen Sie sie auf das Objektiv des Fernrohrs, um mit der Aufnahme zu beginnen. 3.7 Methode zur Verbindung eines Mikroskops Legen Sie zuerst den EVA-Ring auf das Okular des Mikroskops. Drücken Sie dann gleichzeitig die beiden Seiten der Okularklammer und setzen Sie sie auf das Okular des Mikroskops, um mit der Aufnahme zu beginnen. (Anmerkung: Der Einsatz des EVA-Rings erhöht den Außendurchmesser, was zu einem sicheren Halten des Klammers führt. Bei einigen Mikroskopen mit einem größeren Außendurchmesser des Okulars als 025MM ist der Einsatz des EVA-Rings nicht erforderlich.)

4

Weitere Informationen

- 4.1 Aufladen Schließen Sie den Netzteiladapter an, mit Type-C Stromversorgung. Die rote Lampe leuchtet während des Ladevorgangs. Die Ladezeit beträgt 2-3 Stunden, und die grüne Lampe bleibt eingeschaltet, wenn die Batterie voll ist. Die Lebensdauer beträgt 150 Minuten. 4.2 Reset Drücken Sie kurz die Reset-Taste mit einem Klammerausheber, das Gerät schaltet aus, und alle Anzeigelampen gehen aus. 4.3 Datenübertragung Inserte den USB Type-C Stecker des Datenkabels in den Anschluss ein, und stecken Sie den anderen USB Type-C in den USB-Anschluss des Computers, um Daten zu übertragen und zu lesen. In diesem Moment kann die Daten-Übertragung über das USB-Kabel durchgeführt werden. In diesem Moment kann die Daten-Übertragung über das USB-Kabel durchgeführt werden. In diesem Moment kann die Daten-Übertragung über das USB-Kabel durchgeführt werden. 4.4 *Anmerkung: Wenn Sie Ihr Handy am Klammer beobachten möchten, setzen Sie zuerst das Handy in die Klammer. 4.5 Stecken Sie den Klammer in Ihr Handy zusammen mit der Klammer in das Ende des elektronischen Okulars ein. 4.6 Drücken Sie den Entsperr-Knopf und ziehen Sie nach oben, um Ihr Handy und die Klammer zu entfernen. 4.7 Das elektronische Okular ist ein innovatives Werkzeug, das Sie Ihren Smartphone mit einer Vielzahl von optischen Instrumenten verbinden und nutzen, einschließlich Mikroskopen, Teleskopen, Fernrohren und Teleskopen. Dies vereinfacht die Aufnahme von Bildern und Videos und erleichtert das Teilen dieser fantastischen Momente mit anderen. 4.8 Wenn es keine Operation innerhalb von 3 Minuten im eingeschalteten Zustand keine Aktion gibt, wird das elektronische Okular automatisch aus. Um es zu verwenden, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Okular verwenden, und behalten Sie sie gut auf, um sie für zukünftige Referenzen zu nutzen. 4.9 Wenn Sie Fragen zum elektronischen Okular haben, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Okular verwenden, und behalten Sie es gut auf, um es für zukünftige Referenzen zu nutzen.

Français

Note: Cette colonne est le contenu des instructions d'utilisation en français, en prenant l'exemple de la première colonne de gauche.

1

Liste des accessoires du produit

- 1.1 Oculaire électronique
- 1.2 Support étirable pour téléphone
- 1.3 Câble de charge USB Type-C
- 1.4 Anneau EVA (pour connecter et fixer les petits oculaires)
- 1.5 Torchon d'essuie

2

Présentation de l'oculaire électronique

- 2.01 Interrupteur d'alimentation et de WiFi
- 2.02 Indicateur WiFi
- 2.03 Emplacement de la carte TF
- 2.04 Indicateur de statut de charge/travail
- 2.05 Interface USB Type C
- 2.06 Bouton de réinitialisation
- 2.07 Emplacement de la support pour téléphone
- 2.08 Interrupteur de verrouillage de la support pour téléphone
- 2.09 Objectif
- 2.10 Boutons de pression gauche et droite de la pince

3

Mode d'emploi de l'oculaire

- 3.1 Insérer la carte TF et appuyez longuement sur le bouton pour allumer l'appareil pendant 3 secondes. (Note: La carte de mémoire doit être formatée lors de sa première utilisation, l'application vous le rappellera par une fenêtre.) 3.2 Scannez le QR code du manuel avec votre téléphone pour télécharger le logiciel APVision. 3.3 Après l'installation, ouvrez l'application et cliquez sur "Connecter l'appareil" pour passer à l'écran de recherche du point d'accès WiFi de l'appareil. Si vous devez trouver le nom WiFi, Apexel-OC001-xxxxx, mot de passe par défaut: 12345678. Note: Double-cliquez sur le bouton pour éteindre/allumer le WiFi. 3.4 Explication des indicateurs de l'oculaire électronique Lumière bleue allumée - L'appareil est allumé. Lumière bleue clignotante - L'appareil a une faible batterie. Lumière jaune clignotante - L'état d'attente de connexion WiFi. Lumière jaune allumée - La connexion WiFi est établie. 3.5 Lorsque la connexion WiFi est réussie, elle passe à l'écran d'aperçu en temps réel de l'APP et les opérations telles que la prise de vue, l'enregistrement, la visualisation et le téléchargement sont toutes effectuées dans l'APP. 3.6 Méthode de connexion à un télescope Placez d'abord l'anneau EVA sur l'extrémité de l'oculaire du microscope, puis appuyez simultanément sur les deux côtés de la pince de l'oculaire sans la lâcher et placez la sur l'extrémité de l'oculaire du télescope pour commencer à filmer et à utiliser. 3.7 Méthode de connexion à un microscope Placez d'abord l'anneau EVA sur l'extrémité de l'oculaire du microscope, puis appuyez simultanément sur les deux côtés de la pince de l'oculaire sans la lâcher et placez la sur l'extrémité de l'oculaire du microscope pour commencer à filmer et à utiliser. (Note: L'utilisation de l'anneau EVA augmente son diamètre externe pour rendre la prise en main plus sûre. Certains oculaires de microscope avec un diamètre externe supérieur à 025MM n'ont pas besoin d'utiliser l'anneau EVA.)

4

Autres informations

- 4.1 Charge Connecter l'adaptateur d'alimentation, l'alimentation type-c, la lumière rouge s'allume lorsque la charge est en cours. Le temps de charge est de 2-3 heures, la lumière verte reste allumée lorsque la batterie est pleine. La durée de vie de la batterie est d'environ 150 minutes. 4.2 Réinitialisation Utilisez une aiguille pour le bouton de réinitialisation avec une aiguille de carte, l'appareil s'éteint et toutes les lumières indicatrices s'éteignent. 4.3 Transfert de données Insérez le connecteur USB Type-C du câble de données dans le port, et l'autre extrémité du connecteur USB dans le port USB du ordinateur pour le transfert de données et la lecture de données. À ce moment, veuillez brièvement appuyer sur le bouton d'activation de l'oculaire électronique, vous pouvez passer en boucle dans les modes de sélection: "Temps réel" > "Photo" > "Vidéo". 4.4 *Note: Si vous devez observer votre téléphone fixé à la pince, veuillez d'abord insérer votre smartphone dans la pince. 4.5 Ensuite, insérez votre téléphone avec la pince dans l'extrémité de l'oculaire électronique. 4.6 Appuyez sur le bouton de déblocage et faites glisser vers le haut pour retirer votre téléphone et la pince. 4.7 L'oculaire électronique est un instrument innovateur qui vous permet de connecter et d'utiliser votre smartphone avec une variété d'instruments optiques traditionnels, y compris des microscopes, des télescopes, des jumelles astronomiques. Cela simplifie la capture d'images et de vidéos impressionnantes, en plus de faciliter le partage de ces merveilleux moments avec d'autres. 4.8 Si aucune action n'est effectuée en état allumé pendant 3 minutes, l'oculaire électronique s'éteint automatiquement. Si vous devez l'utiliser, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet objectif et le conserver soigneusement pour une future référence. 4.9 Si vous avez des questions sur l'oculaire électronique, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet objectif et le conserver soigneusement pour une future référence.

Italiano

Note: Questa colonna è il contenuto delle istruzioni per l'uso in italiano, utilizzando l'illustrazione della prima colonna alla sinistra come esempio.

1

Elenco degli accessori del prodotto

- 1.1 Oculare elettronico
- 1.2 Grappolo stretta cellulare
- 1.3 Cavo di carica USB Type-C
- 1.4 Anello EVA (da utilizzare per collegare e fissare oculari di piccola di mensura)
- 1.5 Telescopio di pulizia

2

Introduzione all'oculare elettronico

- 2.01 Interruttore di accensione e di WiFi
- 2.02 Indicatore di stato WiFi
- 2.03 Slot per la scheda TF
- 2.04 Indicatore di stato di carica/lavoro
- 2.05 Interfaccia USB Type C
- 2.06 Pulsante di reset
- 2.07 Slot per il grappolo del cellulare
- 2.08 Interruttore di sblocco del grappolo del cellulare
- 2.09 Lente
- 2.10 Pulsanti di pressione sinistro e destro della pinza

3

Istruzioni per l'uso dell'oculare

- 3.1 Inserisci la scheda TF e tieni premuto il pulsante per 3 secondi per accenderlo. (Nota: la scheda di memoria deve essere formattata la prima volta che viene utilizzata, l'app ti notificherà con una finestra popup.) 3.2 È possibile scaricare il software APVision scansando il codice a barre QR del manuale con il cellulare. 3.3 Dopo l'installazione, apri l'app e fai clic su "Collega dispositivo" per passare alla schermata di ricerca del punto di accesso WiFi del dispositivo. Si prega di trovare il nome WiFi, Apexel-OC001-xxxxx, password predefinita: 12345678. Nota: Doppio clic sul pulsante per attivare/disattivare il WiFi. 3.4 Descrizione degli indicatori dell'oculare elettronico Luce blu costante - Stato di accensione del dispositivo. Luce blu che lampeggia - Stato di bassa batteria del dispositivo. Luce gialla che lampeggia - Stato di attesa di connessione WiFi. Luce gialla costante - Connessione WiFi completata. 3.5 Una volta stabilita la connessione WiFi, verrà visualizzata la schermata di anteprima in tempo reale dell'APP e tutte le operazioni come ripresa, registrazione, visualizzazione e download verranno completate all'interno dell'APP. 3.6 Metodo di connessione a un telescopio Premere contemporaneamente i due lati della pinza dell'oculare senza rilasciare e sovrapporre alla fine del telescopio per iniziare a filmare e utilizzare. 3.7 Metodo di connessione a un microscopio Premere contemporaneamente i due lati della pinza dell'oculare senza rilasciare e sovrapporre alla fine del microscopio per iniziare a filmare e utilizzare. (Nota: l'uso dell'anello EVA aumenta il suo diametro esterno per rendere la presa più sicura. Alcuni oculari del microscopio con un diametro

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.