

用感覺去聆聽

**FEEL
the
SOUND**

**REGAIN
THE JOY OF HEARING !**

Dai3mimi

User Manual

用戶手冊

ユーザーマニュアル

Product Unpack


打开包装

開箱する


- Dai3mimi Di2 Main Control Device
- Dai3mimi Di2 主控制装置
- Dai3mimi Di2 メインコントローラー




- Dai3mimi Di2 Earphone
- Dai3mimi Di2 耳机
- Dai3mimi Di2 イヤホン

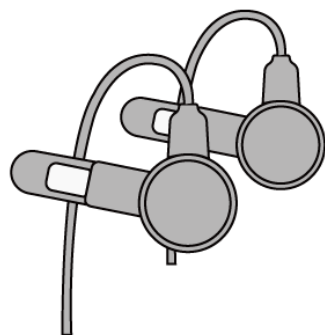

- Neck Thread
- 颈线
- ネットスレッド

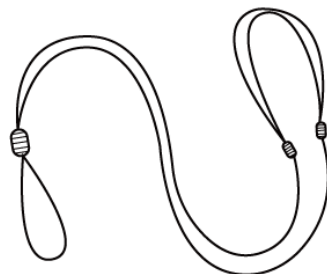

- USB Type-C charging cable
- USB Type-C 充電線
- USB Type-C 充電ケーブル

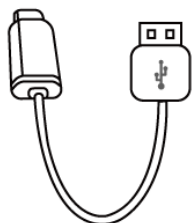


- User Manual
- 用户手册
- ユーザーマニュアル



Product Overview

產品概述


製品概要

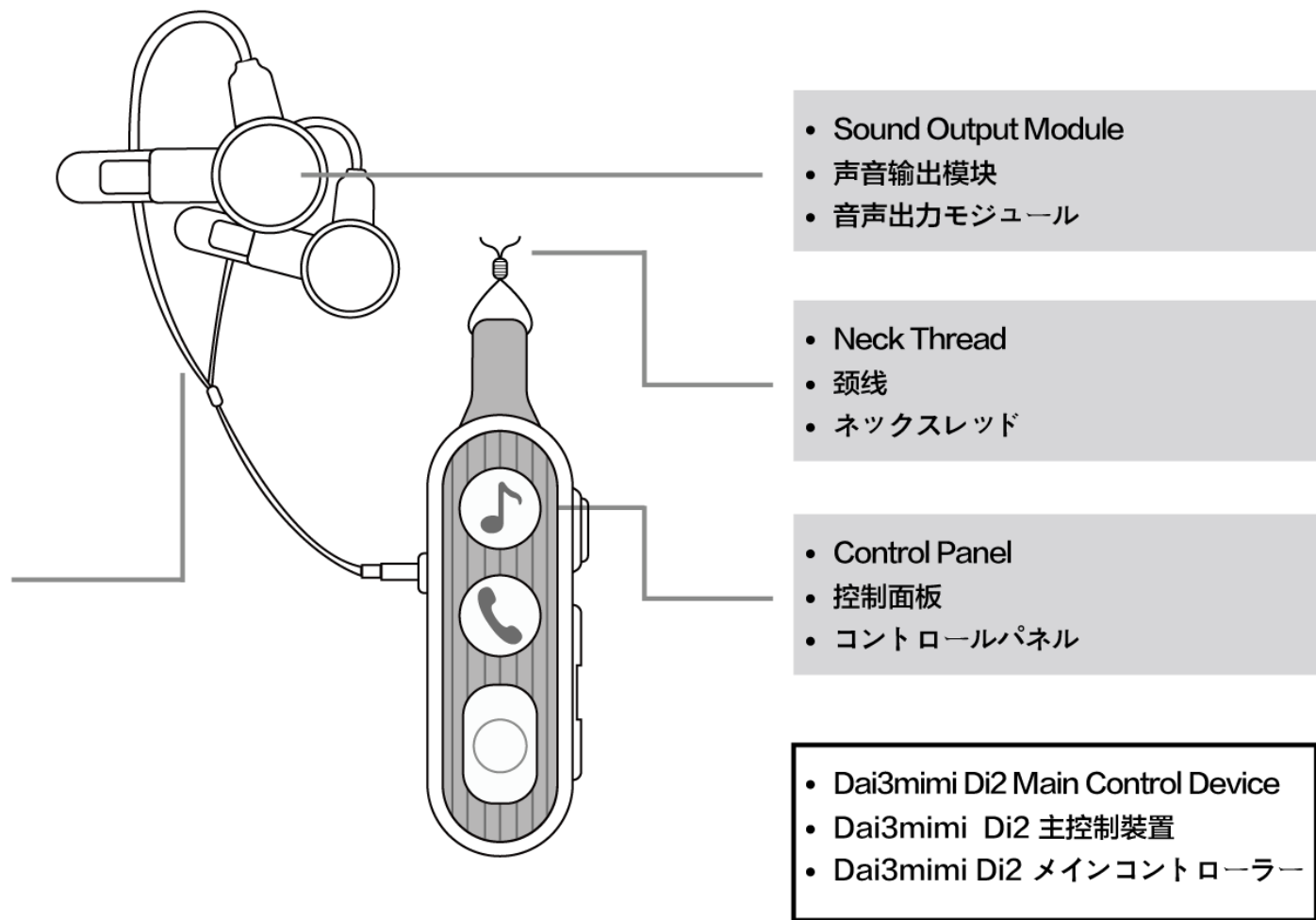

Steps to Use

使用步驟

使用手順

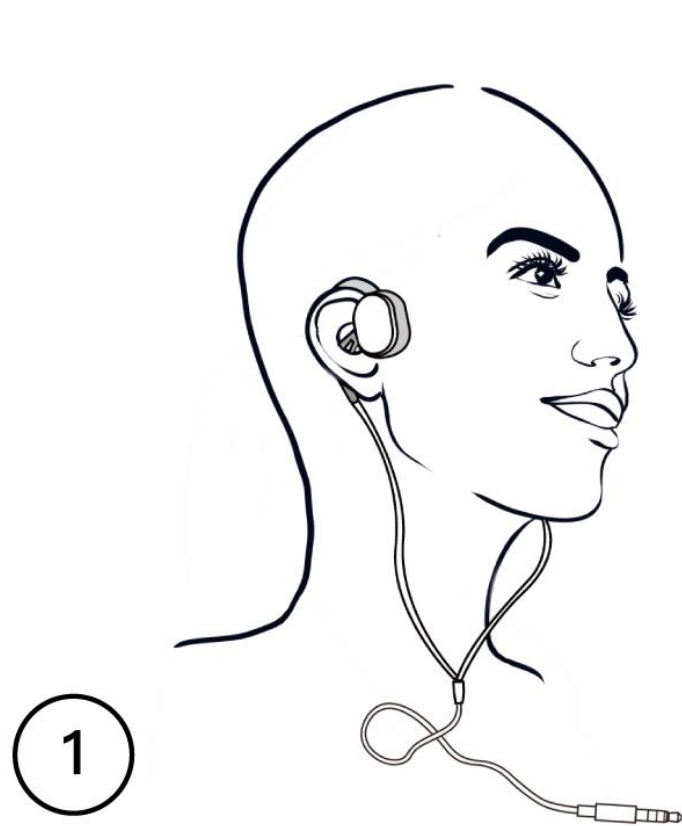

1

Wear the earphone

戴上耳机


イヤホンを装着します

2

Plug the earphone

插上耳机

イヤホンを挿し込みます

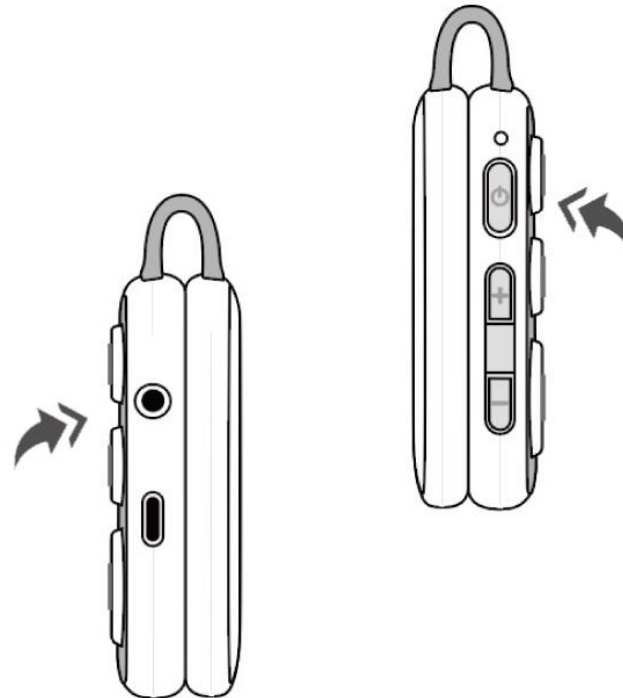

Turning On

开启

電源を入れます

3

Turn on the power

打开电源

電源を入れます

Steps to Use


使用步驟

使用手順

Turning Off

关闭

電源を切る

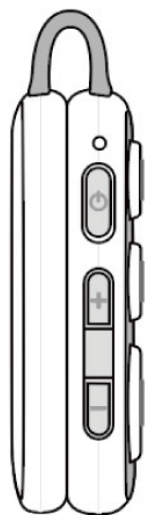


1

Turn off the power
关闭电源
電源切ります


2

Unplug the earphone
拔掉耳机
イヤホンを抜きます

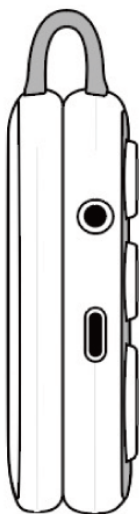

3

Take off the earphone
脱掉耳机
イヤホンを外します

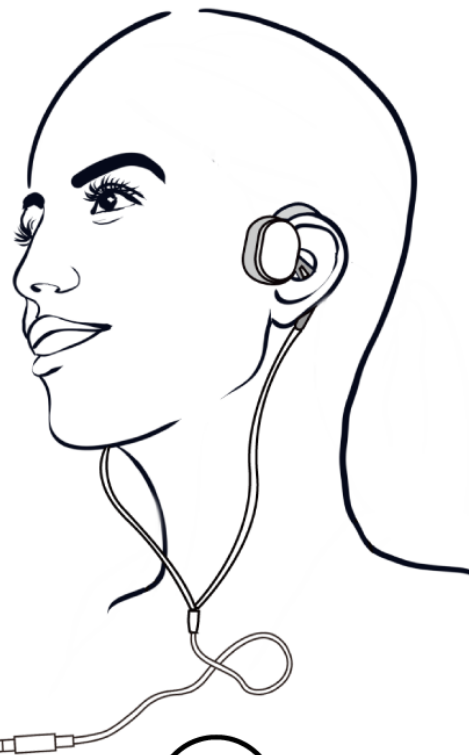

Control Panel

控制面板


コントロールパネル

- LED Function Indicator
- 功能指示灯
- 機能指示

- Power On & Off Key
- 电源开关键
- 電源オン&オフボタ

- Volume Up Key
- 调高音量键
- 音量アップボタン

- Volume Down Key
- 降低音量键
- 音量ダウンボタン

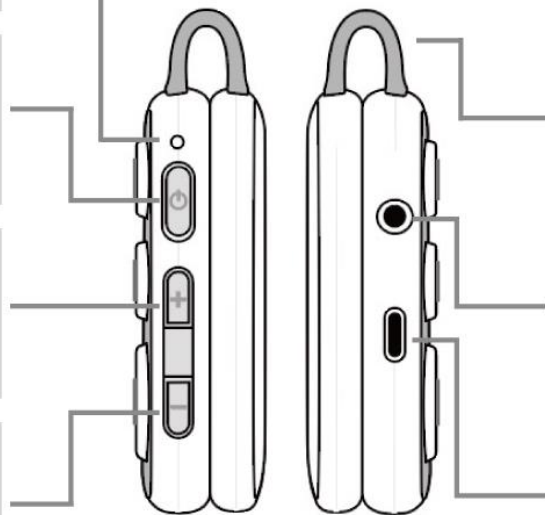

- Bluetooth Mode Key
- 蓝牙模式键
- Bluetoothモードキー


- Incoming Call Accept Key
- 来电接收键
- 着信応答キー

- Hearing Aid Mode Key
- 助听模式键
- 補聴器モードキー

- Conjunction Rubber
- 结合橡胶
- コンジヤンクションラバー

- Earphone Jack
- 耳机插孔
- イヤホンジャック


- Charging Port
- 充电口
- 充電口

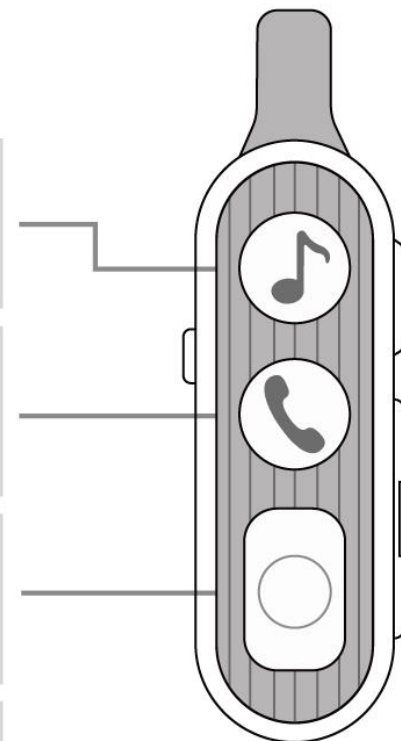


Charging

充电

充電

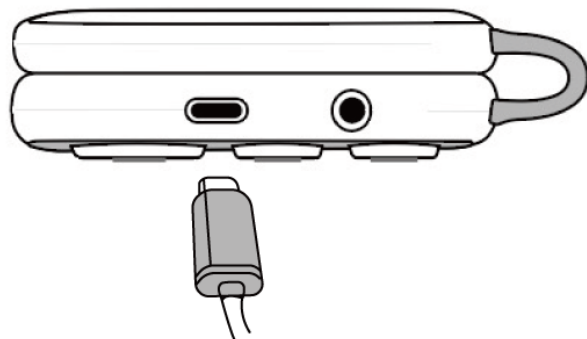

- Plug in the Charging Port with the USB Type-C cable provided.
- 使用随附的 USB Type-C 电缆插入充电口。
- 付属の USB Type-C ケーブルで充電口に挿し込みます。

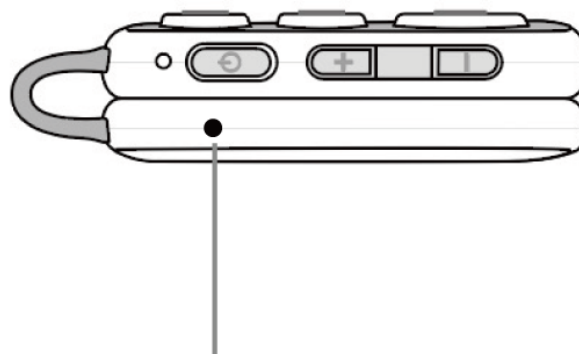


- While charging the LED function indicator will turn red, it will turn blue when fully charged.
- 充电时功能指示灯将变为红色, 直到充满电后变为蓝色。
- 充電中はLEDランプが赤色で点灯し、バッテリーが充電が完了するとLEDランプが青色に変わります。

Low Battery

低电量

バッテリー残量低下


- When the battery is low, the LED Function Indicator will continue to flash prompting you to charge.
- 电池电量不足时，LED功能指示灯将继续闪烁，提示您充电。
- バッテリー残量低下の状態になると、LEDが点滅しますので、デバイスを充電してください。

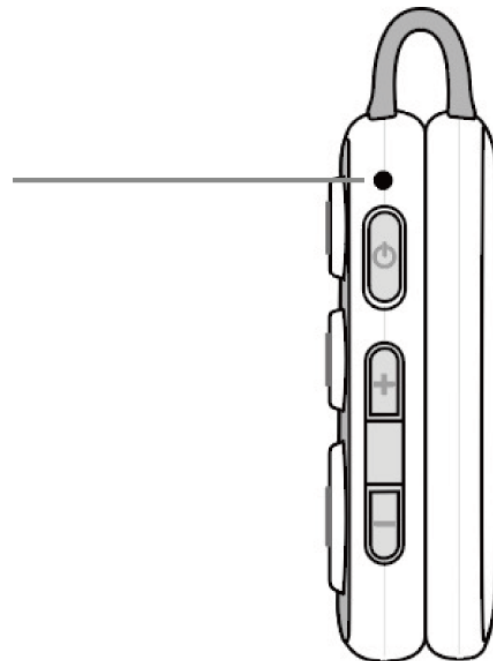

Wearing the Sound Output Module

佩戴声音输出模块


サウンド出力モジュールの着用方法

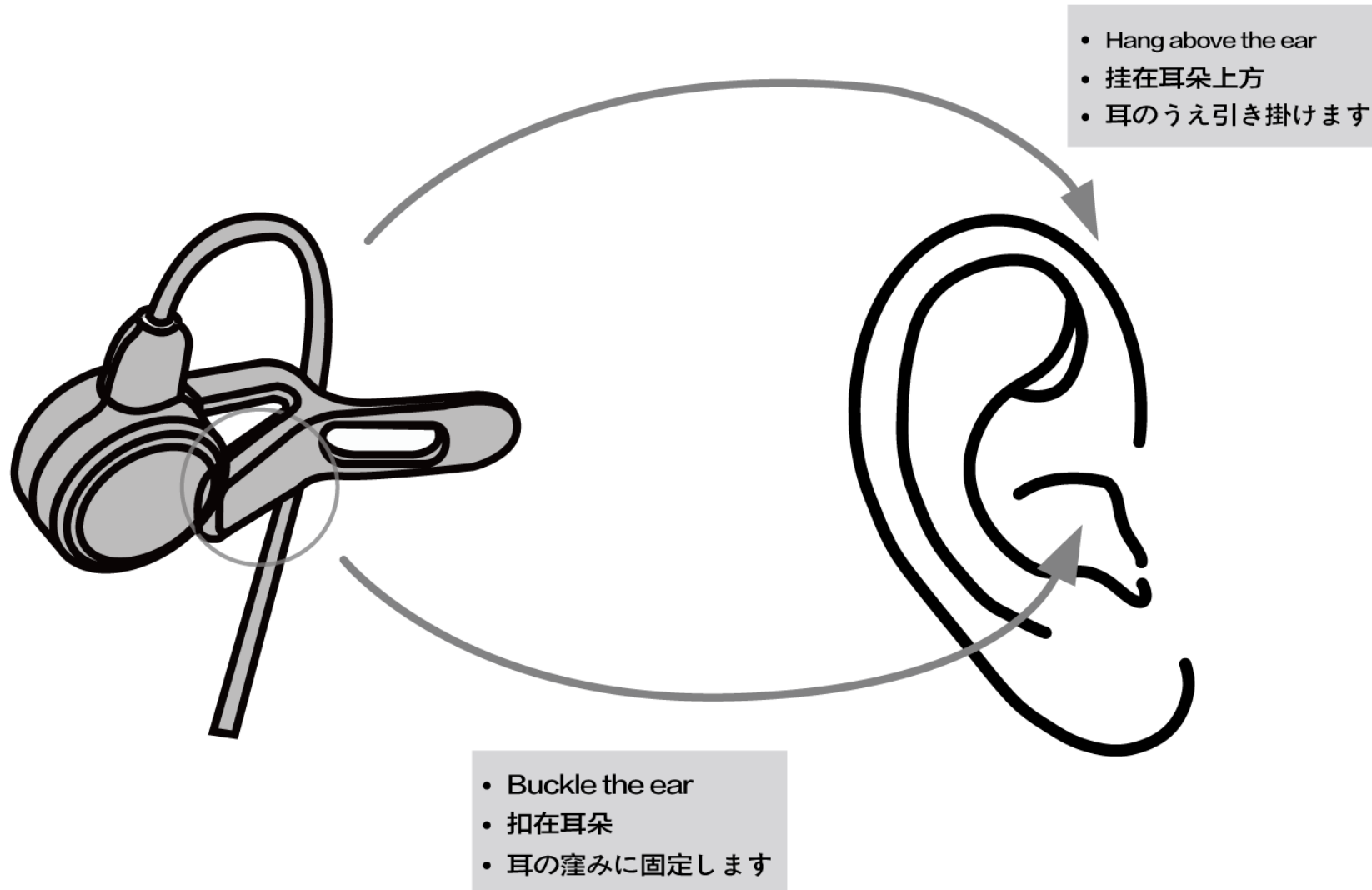

Wearing the Sound Output Module

佩戴声音输出模块

サウンド出力モジュールの着用方法

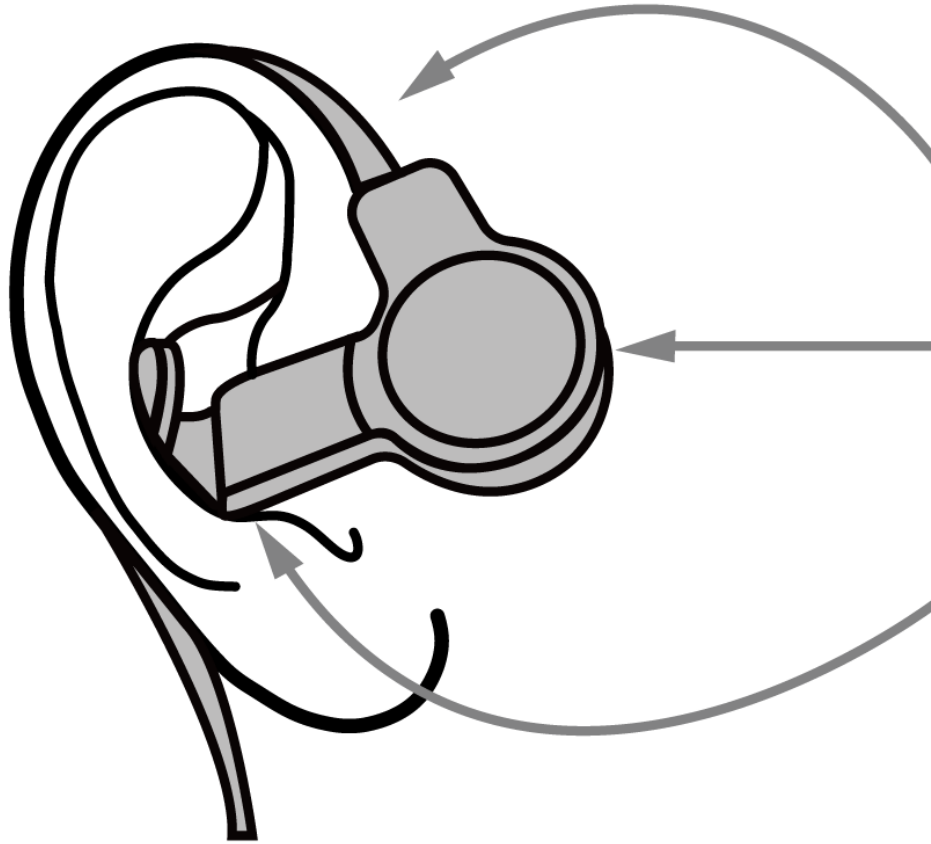

- Hang above the ear
- 挂在耳朵上方
- 耳の上引き掛けます

- Sound Output Module will hold tight the face
- 声音输出模块将紧贴脸部
- サウンド出力モジュールは顔にし密着させます

- Buckle the ear
- 扣在耳朵
- 耳の窪みに固定します


When in Hearing Aid Mode

处于助听器模式时

補聴器モードの場合

- The Hearing Aid Mode is the default mode when powered on.
- 开机时将默认在助听器模式。
- 電源を入ると、補聴器モードがオンになります。（デフォルト設定）

- When in Hearing Aid Mode, you can hear the surrounding voice or sound directly via the sound output module.
- 在助听器模式下，您可以直接通过声音输出模块听到周围的声音。
- 補聴器モード時に、音声出力モジュールを介して周囲の声や音を直接聞くことができます。

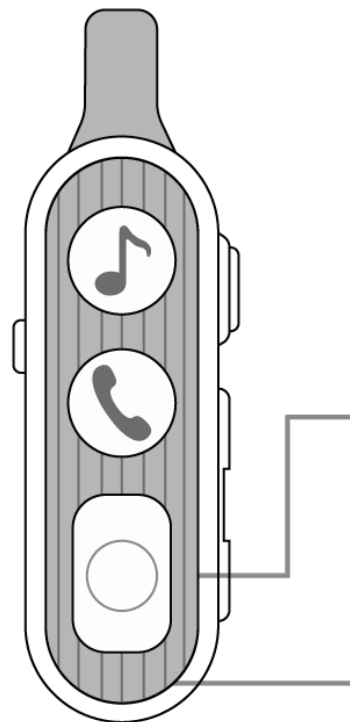

- Hearing Aid Mode Key
- 助听器模式鍵
- 補聴器モードキー

- Hearing Aid Mode LED Function Indicator will turn on.
- 助听器模式功能指示灯将点亮。
- 補聴器モード機能インジケータが点灯します。


Switching between Hearing Aid Mode & Bluetooth Mode

助听器模式和蓝牙模式之间的切换

補聴器モードとBluetoothモードの切り替え

- Bluetooth Mode Key
- 蓝牙模式键
- Bluetoothモードキー

- Hearing Aid Mode Key
- 助听器模式键
- 補聴器モードキー

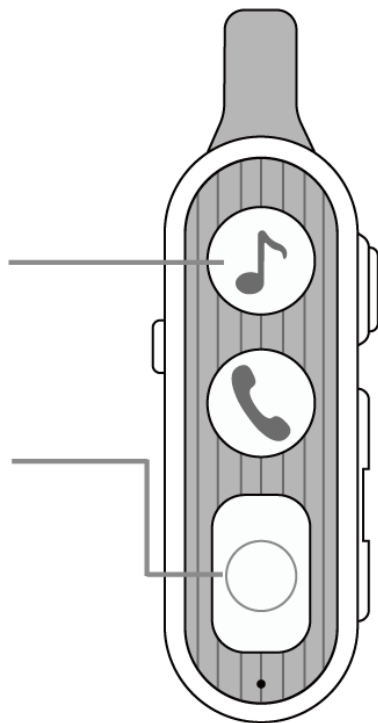


- Press Hearing Aid Mode Key to switch to Hearing Mode & Press the Bluetooth Mode Key to switch to Bluetooth Mode.
- 按助听器模式键切换到助听模式, 按蓝牙模式键切换到蓝牙模式。
- 補聴器モードキーを押すと補聴器モード切り替わります。Bluetoothモードキーを押すと Bluetooth モード切り替わります

Pairing with Bluetooth Devices

与蓝牙设备配对

Bluetoothデバイスとのペアリング

- To enter into Bluetooth mode first time press the Bluetooth Mode Key, the LED Function Indicator will be flashing for the search of pairing device.
- 第一次通过按蓝牙模式键进入蓝牙模式时，功能指示灯将闪烁以搜索配对设备。
- 初めてBluetoothモードを押し、Bluetoothモードをオンにしたとき、LED機能インジケータが点滅し、ペアリングするデバイスを検出します。

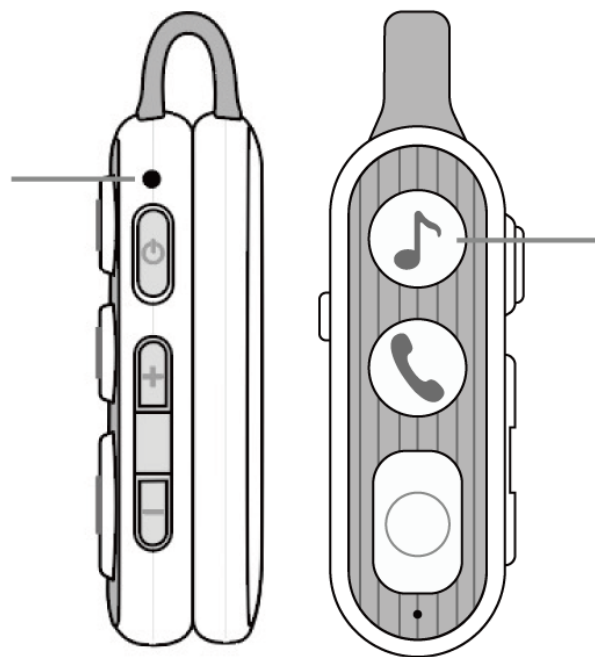

- Bluetooth Mode Key
- 蓝牙模式键
- Bluetoothモードキー

Pairing with Bluetooth Devices 与蓝牙设备配对 Bluetoothデバイスとのペアリング

- Open the Bluetooth Function of your Bluetooth device and search for the Dai3mimi Di2 device, then connect to pair.
- 打开您的蓝牙设备的蓝牙功能并搜索 Dai3mimi Di2设备，然后连接至配对。
- BluetoothデバイスのBluetooth機能をオンに切り替え、Dai3mimi Di2デバイスを検索し接続をします。




Upon pairing with Bluetooth Devices

与蓝牙设备配对后

Bluetoothデバイスとペアリング完了したら

- When paired with any Bluetooth device, the LED Function Indicator will turn to a steady Blue light.
- 与任何蓝牙设备配对后，功能指示灯将变为稳定的蓝灯。
- Bluetoothデバイスとペアリングすると、LED機能インジケータが青色に点灯します。

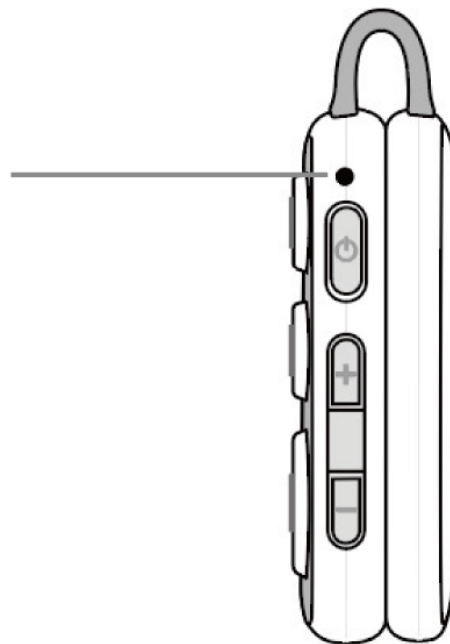


Receiving Incoming Call

接听来电

電話を受ける


- When Dai3mimi Di2 is connected to a mobile device via Bluetooth, you can answer an incoming call by pressing the Incoming Call Accept Key once, and press it again to end the call. If you want to reject an incoming call, press the Incoming Call Accept Key twice in a row.
- Dai3mimi Di2 通过蓝牙连接到移动设备后，按一次来电接受键可接听来电，再按另一次可结束通话。如果要拒绝来电，请连续按该键两次。
- Dai3mimi Di2 を Bluetooth 経由でモバイルデバイスに接続した後、着信キーを1回押すと着信を受けることができます、もう一度押すと着信を拒否または終了させることができます。

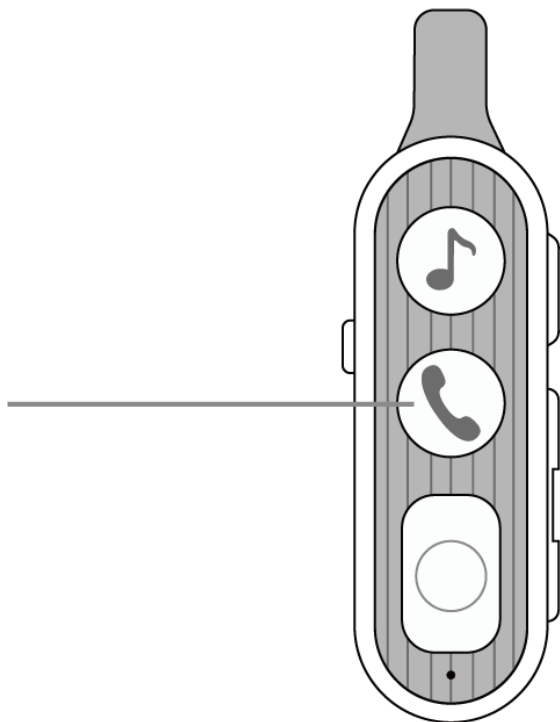

How to Hang the Main Control Device on the Neck Thread

如何将主控设备挂在颈线上



メインコントローラーをネックスレッドに掛ける方法

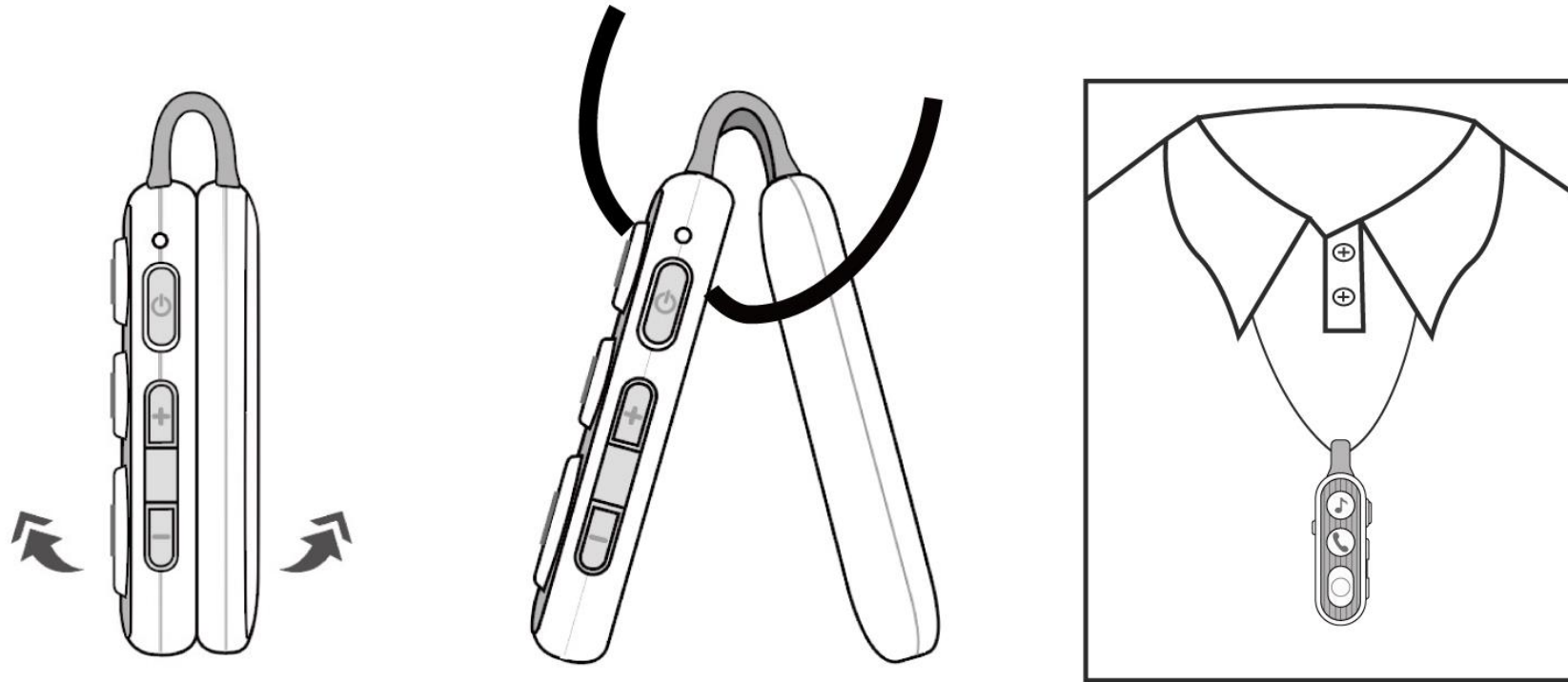

How to Hang the Main Control Device on Your Clothes

如何将主控制设备挂在衣服上

メインコントローラーを衣服に掛ける方法

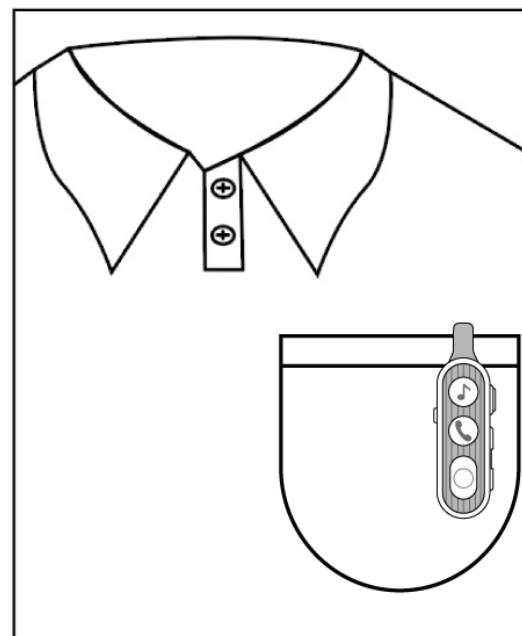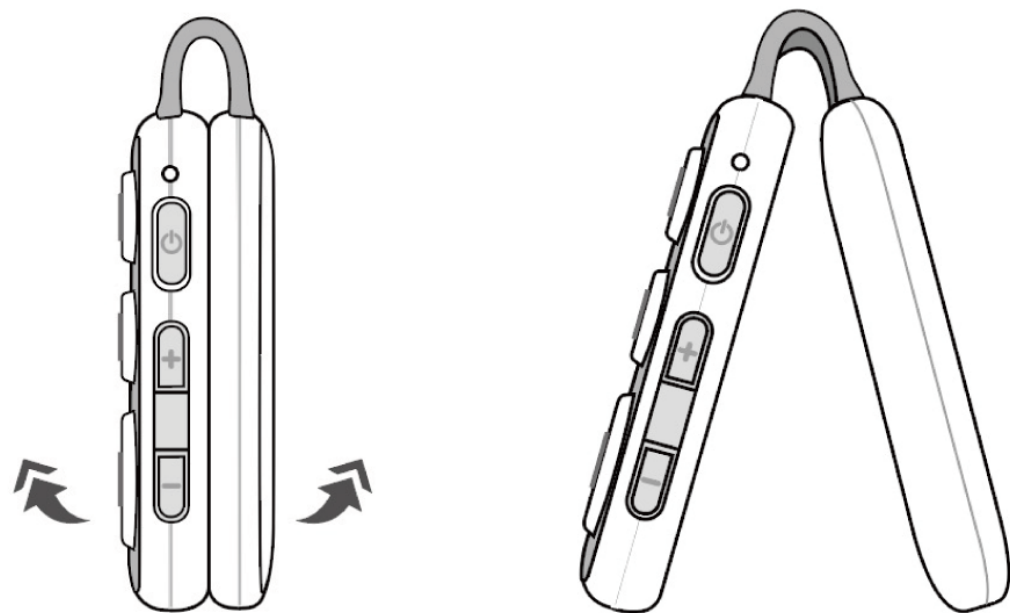

Precautions for use

使用注意事項

使用上の注意



Turn it off when not in use.

不使用时将其关闭

使用しないときはオフにしてください。

Product Specifications

产品规格

製品仕様

• Model Number	型号	モデル番号	• Dai3mimi 复耳 Di2
• Speaker Type	喇叭类型	スピーカータイプ	• Conduction Vibrator 传导振动器伝導 バイブレーター
• Frequency Response	频率响应	周波数応答	• 30Hz ~ 18KHz
• Sensitivity	灵敏度	感度	• 95 +/- 3dB
• Bluetooth Version	蓝牙版本	Bluetoothバージョン	• 5.0
• Bluetooth Profile	蓝牙配置	Bluetoothプロファイル	• A2DP, AVRCP, HSP, HFP
• Microphone	麦克风	マイクロフォン	• -40dB +/- 3dB
• Wireless Range	无线范围	ワイヤレス範囲	• 10 meters 米 メートル
• Charging Time	充电时间	充電時間	• 3 hours 小时
• Charging Voltage	充电电压	充電電圧	• 5V
• Play Time	连续播放时间	連続再生時間	• 10 hours 小时
• Hearing Aid Time	连续助听时间	連続補聴器の時間	• 15 hours 小时
• Battery Type	电池类型	電池のタイプ	• Polymer Li-ion Battery 聚合物锂离子电池 ポリマーリチウムイオン電池
• Battery Capacity	电池容量	バッテリー容量	• 1000 mAH 毫安
• Product Weight	产品重量	製品の重量	• 50 gram 公克 グラム

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

Manufacturer 制造商 製造者 :

Dai3mimi Health-Tech Limited
複耳科技有限公司

www.dai3mimi.io