

Sustitución de la Correa


La pulsera smart YE02 consta de dos partes: cuerpo principal y correa. La correa puede sustituirse libremente en cualquier momento según sus preferencias.



Instrucciones de Carga

Carga: alinee los contactos metálicos situados en la parte inferior de la pulsera smart con la base de carga. Cuando el indicador de la pulsera permanezca encendido en rojo, la pulsera smart se estará cargando correctamente. La carga completa de la pulsera smart tarda aproximadamente 2,5 horas.

Nota: Una vez cargada por completo, el indicador de la pulsera smart permanecerá encendido en verde. antes de cargarla, seque el puerto de carga para evitar que los restos de sudor provoquen corrosión en los contactos metálicos u otros riesgos.

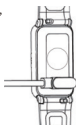

Pérdida de señal de frecuencia cardíaca

La pulsera smart YE02 supervisa continuamente sus datos de frecuencia cardíaca durante el ejercicio y en la vida diaria. En determinadas ocasiones, es posible que la pulsera no obtenga una señal de frecuencia cardíaca adecuada; en ese caso, aparecerán líneas discontinuas en los datos de frecuencia cardíaca perdidos. Si no se obtiene una señal de frecuencia cardíaca, compruebe primero si la pulsera smart está colocada correctamente.

Ajuste la posición para evitar llevarla demasiado alta o demasiado baja en la muñeca, demasiado apretada o demasiado floja. Después del ajuste, active la monitorización de frecuencia cardíaca en tiempo real para obtener los datos de frecuencia cardíaca. Si sigue sin haber datos de frecuencia cardíaca, compruebe si la función de monitorización de PitPat en la aplicación está activada.

Otros problemas

Si el teléfono móvil no puede emparejarse con la pulsera smart, vaya a Ajustes-Bluetooth para comprobar si aparece la señal YE02. Si aparece, significa que la señal Bluetooth funciona correctamente. Compruebe si la pulsera smart ya está emparejada con otro teléfono móvil y desvínculela. Los usuarios de iOS también deberán ir a Ajustes-Bluetooth-Omitir este dispositivo antes de volver a emparejarlo.

Información de Seguridad

1. Los datos de frecuencia cardíaca, estrés, oxígeno en sangre y temperatura obtenidos mediante la pulsera smart YE02 son solo de referencia y no deben utilizarse como base médica ni diagnóstica;
2. El autodiagnóstico y la automedicación son peligrosos. Solo un médico puede diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con la hipertensión, el corazón y otras afecciones. Se recomienda consultar a un médico para obtener una evaluación más profesional;

3. Debido a factores como las interferencias de señal, la posición de uso, las condiciones climáticas y las diferencias físicas de cada persona, es posible que los datos de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y otros datos proporcionados por la pulsera esmart YE02 no sean completamente precisos;
4. No ajuste medicamentos ni tratamientos por su cuenta basándose en los datos de monitorización proporcionados por YE02. Si necesita medicación o tratamiento, siga siempre las indicaciones médicas. Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad legal por la falta de precisión de los datos de monitorización ni por las consecuencias derivadas del uso indebido de dichos datos e información.

FCC ID	2A8B6-YE02
MODEL	Sense01/YE02
BATTERY	190 mAh
CHARGING TYPE	Magnetic charging

 WARNING

- Please do not make the device disassemble, strike or throw into the fire.
- Please do not place the device in high temperature or deep water environment.
- Please must be connected to a power source in 5V/1A while charging device.

