


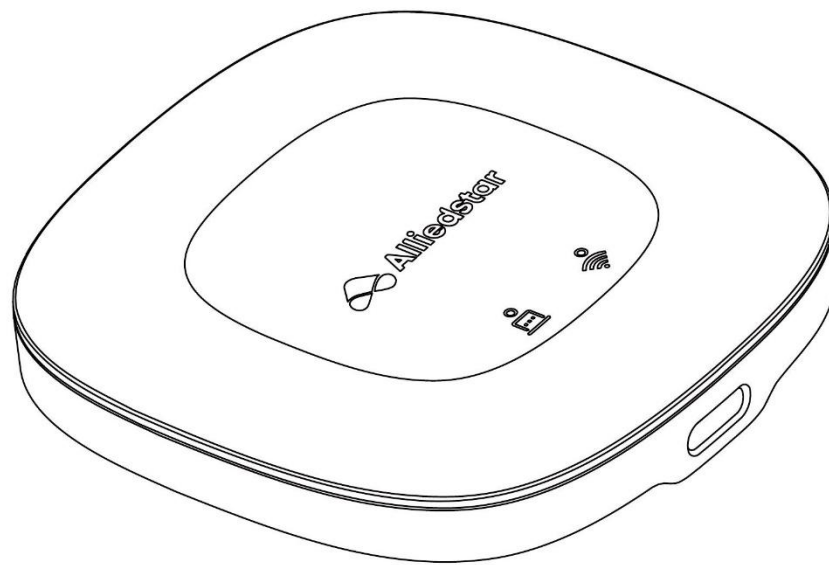

Intraoral Scanner Wireless Adapter

Instruction Manual

All rights reserved.

Copyright © 2026 Alliedstar.

The content of this instruction is subject to change.

Alliedstar and its subsidiaries shall not be liable for any indirect damages arising from the preparation, presentation, or use of the information contained in this instruction, including any errors. No part of this instruction can be reproduced without the permission of Alliedstar.

Trademarks

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.



Lifetime: 6 years

Contents

EN/English	4
Package Contents	4
Setup Guide.....	5
LED Indicator Status	6
Troubleshooting.....	7
Environmental Requirements	7
Regulatory Information	7
Labels and Symbols	13
ES/ Español.....	15
Contenido del paquete	15
Guía de instalación	16
Estado de los indicadores.....	17
Solución de problemas.....	17
Requisitos ambientales	17
Información normativa.....	18
Etiquetas y símbolos	22
PT/Português	24
Conteúdo da Embalagem	24
Guia de Instalação	25
Status do Indicador	26
Solução de Problemas.....	26
Requisitos Ambientais	26
Informações Regulatórias	27
Rótulos e Símbolos	30

EN/English


Package Contents

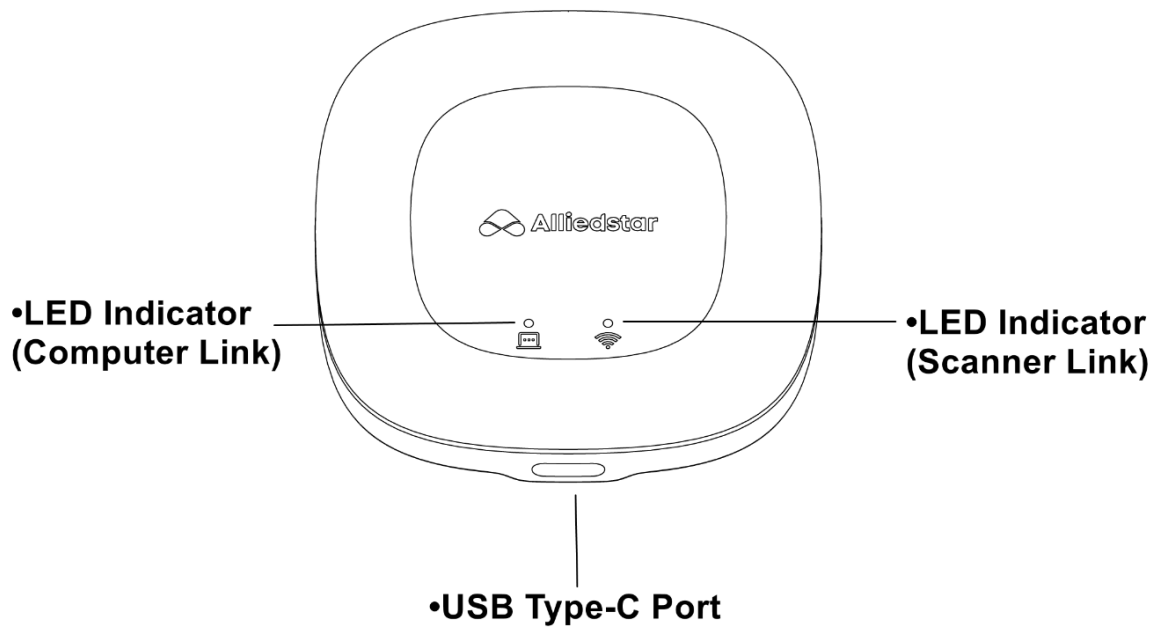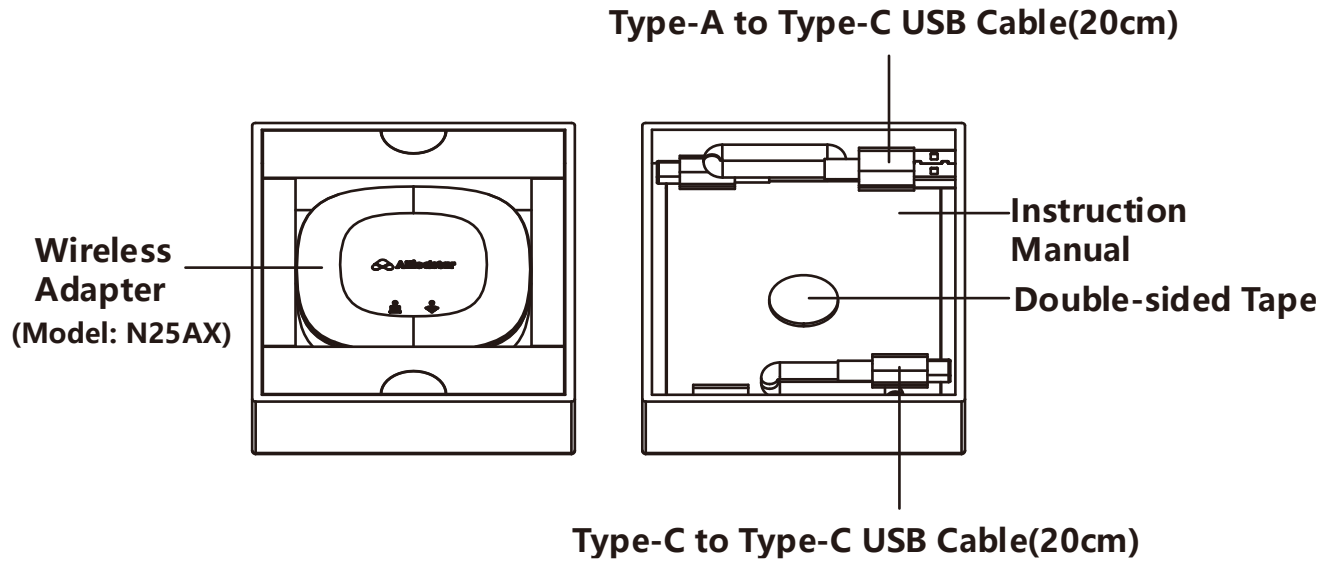

Setup Guide

Part A: Physical Setup


1. Place the wireless adapter on a stable, flat surface near your computer.
2. (Optional) For vertical mounting, stick the provided double-sided tape to the back of the adapter and affix it to a clean, vertical surface.
3. Connect the included USB cable from the adapter to an available USB port on your computer.

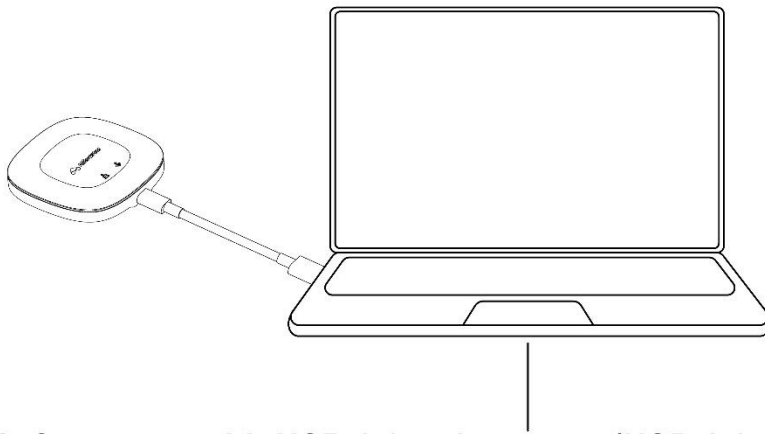


1. **Computer with USB 2.0 or later port (USB 3.0, 3.1, etc. supported)**
2. **Windows 10 (build 18362 or later) or Windows 11, 64-bit**

Part B: Software Setup

4. Ensure ScanPro software version 1.0.40.0 or later is installed.
5. Power on your computer and your intraoral scanner.
6. Open the ScanPro software.
7. From the scanner list, click **Connect** next to your scanner model.

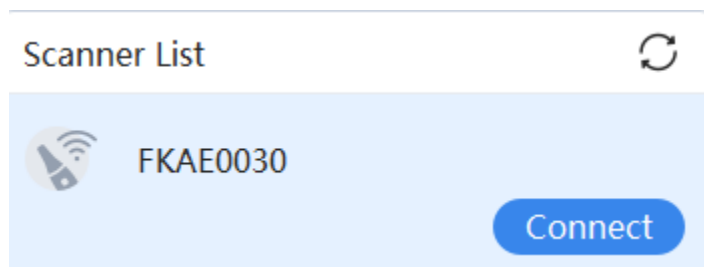

8. Once connected, the button will display **Disconnect** and the battery status will appear. You can now begin scanning.

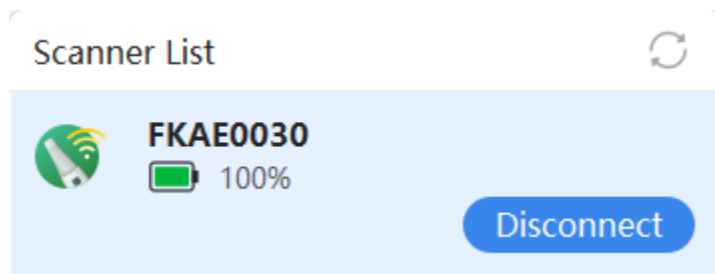

Part C: Wireless Communication & Network Security

- **Local Connectivity Statement:** Alliedstar Intraoral Scanner and its dedicated Wireless Adapter utilize standard Wi-Fi protocols for localized peer-to-peer communication. This connection is strictly dedicated to the transmission of control commands and captured oral image data between the hardware components.
- **Network Isolation:** The system operates within a closed-loop wireless environment. It does not require, nor is it capable of, connecting to the public internet (WAN). All data processing and 3D model reconstruction are performed locally on the computer. This architecture ensures high-speed data stability and maximum network security by remaining completely isolated from external networks.

Note: Users cannot manually configure this device to access the public internet, ensuring the integrity of the clinical workflow.

LED Indicator Status

Status			Meaning
Starting Up	Flashing Green	Flashing Green	Device is starting
Ready to Connect	Solid Green	Breathing Green	Ready to connect
Connected	Solid Green	Solid Green	Connected to scanner and PC
Updating Firmware	Flashing Orange	–	Firmware is being updated
Hardware Error	–	Flashing Orange	Hardware error – restart device

Troubleshooting

Problem	Solution
No connection	1. Try another USB port. 2. Restart your computer.
Cannot find scanner Wi-Fi	1. Make sure the scanner is powered on (status light breathing). 2. Keep the scanner within range. 3. Disconnect and reconnect the wireless adapter.
Connection unstable or slow	1. Move the adapter and scanner closer. 2. Remove large metal objects or interference sources between them. 3. Change the Wi-Fi channel on the scanner if possible.
Indicator not Solid Green	See " <i>Indicator Status</i> " section for details.

For technical support, visit <https://support.allied-star.com/>

Environmental Requirements

Condition	Temperature	Relative Humidity	Atmospheric Pressure
Operating	15°C ~ 30°C	10% RH ~ 65% RH	70 kPa ~ 106 kPa
Transportation	-10 °C ~ 50°C	10 % RH ~ 95% RH	60 kPa ~ 106 kPa
Storage	-10°C ~ 50°C	10 % RH ~ 85% RH	70 kPa ~ 106 kPa

Regulatory Information

FCC compliance information statement



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference.
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

5.9 and 6GHz Wi-Fi Devices

FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only. This device cannot be used to provide connection between separate buildings or structures. The operation of this is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except the device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet. Operation of transmitters in the 5.915-7.125 GHz band is prohibited for control of or communication with unmanned aircraft systems.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for

an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment has been SAR-evaluated for use in hand. SAR measurements are based on a 20 cm spacing from the body and that compliance is achieved at that distance.

CE Mark Warning



This is a class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

OPERATING FREQUENCY (the maximum transmitted power)

5150MHz-5250MHz(23dBm)

5735MHz-5835MHz(25mW)

5925MHz-6425MHz(23dBm)

EU declaration of conformity

Alliedstar hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2011/65/EU and (EU)2015/863.



Alliedstar hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

RF Exposure Information

This device meets the EU requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

This device has been tested and meets the ICNIRP exposure guidelines and the European Standard EN 62209-2. SAR is measured with this device at a separation of 20 cm to the body, while transmitting at the highest certified output power level in all frequency bands of this device. Carry this device at least 20 cm away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels.

National restrictions

Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)

Attention: This device may only be used indoors in Great Britain.





HHHHH-AA-FFFFF

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

NCC 警語

產品類型	警語
低功率產品(LPD)	取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
WLAN 5G 產品	1.應避免影響附近雷達系統之操作。 2.高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

This product must be powered by a device whose output meets the requirements of ES1 and PS1.

ISED Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IC: 29544-N25AX

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Avis ISED

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.



Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.


IC: 29544-N25AX

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement pour une utilisation en intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.



Labels and Symbols

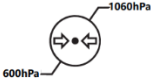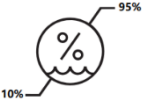	Manufacturer
	Date of Manufacture
	Model number
	Serial number
	Direct current
	Separate collection for waste electric and electronic equipment (WEEE) is required.
	Atmospheric pressure limitation
	Fragile, handle with care
	Humidity limitation
	Keep away from rain
	Stacking limit by number

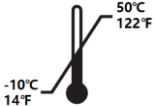	Temperature limits
	Consult instructions for use. Follow the link to the eIFU: ifu.allied-star.com .
	Catalogue number

ES/ Español


Contenido del paquete

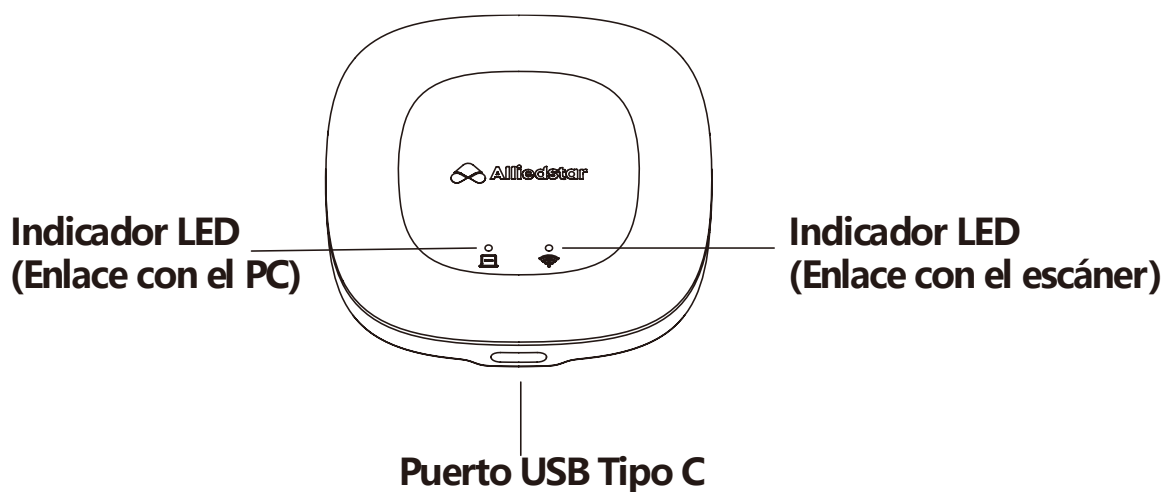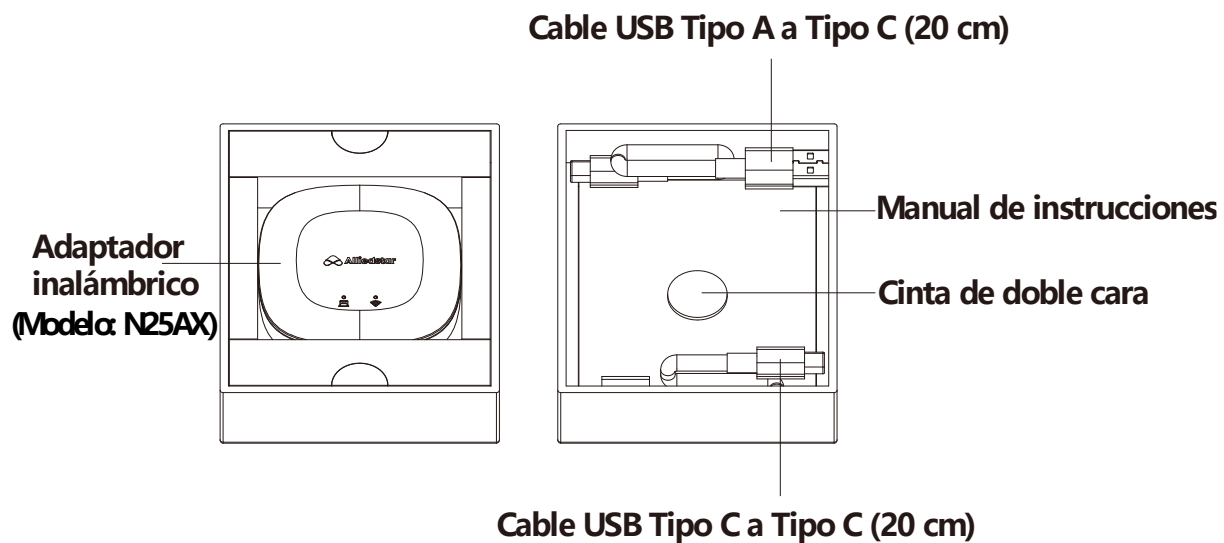

Guía de instalación

Parte A: Instalación del hardware

1. Coloque el adaptador inalámbrico sobre una superficie plana y estable cerca de su ordenador.
2. (Opcional) Para el montaje vertical, pegue la cinta de doble cara suministrada en la parte posterior del adaptador y fíjelo a una superficie vertical limpia.
3. Conecte el cable USB incluido desde el adaptador a un puerto USB disponible en su ordenador.

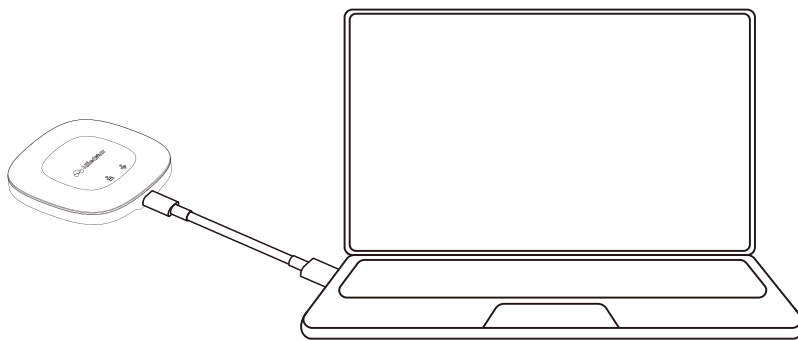

1. Ordenador con puerto USB 2.0 o posterior (compatible con USB 3.0, 3.1, etc.)
2. Windows 10 (compilación 18362 o posterior) o Windows 11, 64 bits

Parte B: Configuración del software

4. Asegúrese de que esté instalada la versión 1.0.40.0 o posterior del software ScanPro.
5. Encienda su ordenador y su escáner inalámbrico.
6. Abra el software ScanPro.
7. En la lista de escáneres, haga clic en **Connect** junto a su modelo de escáner.

Lista de Escáneres



FKAE0039

Connect

8. Una vez conectado, el botón mostrará **Desconectar** y aparecerá el estado de la batería. Ya puede comenzar a escanear.



FKAE0039

100%

Desconectar

Estado de los indicadores

Estado			Significado
Iniciando	Verde parpadeante	Verde parpadeante	El dispositivo se está iniciando
Listo para conectar	Verde fijo	Verde pulsante	Listo para conectar
Conectado	Verde fijo	Verde fijo	Conectado al escáner y al PC
Actualizando firmware	Naranja parpadeante	–	El firmware se está actualizando
Error de hardware	–	Naranja intermitente	Error de hardware – reinicie el dispositivo

Solución de problemas

Problema	Solución
Sin conexión	1. Pruebe con otro puerto USB. 2. Reinicie su ordenador.
No se encuentra el Wi-Fi del escáner	1. Asegúrese de que el escáner esté encendido (luz de estado pulsante). 2. Mantenga el escáner dentro del alcance. 3. Desconecte y vuelva a conectar el adaptador inalámbrico.
Conexión inestable o lenta	1. Acerque el adaptador y el escáner. 2. Retire objetos metálicos grandes o fuentes de interferencia que se encuentren entre ellos. 3. Cambie el canal Wi-Fi en el escáner si es posible.
El indicador no está en Verde fijo	Consulte la sección "Estado de los indicadores" para obtener más detalles.

Para soporte técnico, visite <https://support.allied-star.com/>

Requisitos ambientales

Condición	Temperatura	Humedad relativa	Presión atmosférica
Funcionamiento	15°C ~ 30°C	10% RH ~ 65% RH	70 kPa ~ 106 kPa
Transporte	-10 °C ~ 50°C	10 % RH ~ 95% RH	60 kPa ~ 106 kPa
Almacenamiento	-10°C ~ 50°C	10 % RH ~ 85% RH	70 kPa ~ 106 kPa

Información normativa

Especificaciones Eléctricas: 5 Vcc 500 mA

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo o dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Información sobre el uso de la banda de 6 GHz (5925 MHz - 6425 MHz):

Los Productos sujetos a esta DT que operen en la Banda de frecuencias 5925 MHz - 6425 MHz deben cumplir con lo siguiente:

Los Productos del tipo Punto de acceso, Punto de acceso subordinado y Dispositivo cliente fijo, todos ellos en interiores deben cumplir con lo siguiente:

1. Deben operar únicamente en ambientes interiores.
2. Deben tener antena integrada no removible y no deben tener la posibilidad de conectar antenas externas.
3. Se prohíbe su uso en comunicaciones para sistemas de Vehículos aéreos no tripulados, en embarcaciones, plataformas petroleras, automóviles, trenes y aviones, salvo que su operación sea dentro de aeronaves grandes que vuelen a más de 3048 metros de altitud.
4. Deben emplear protocolos basados en contención.
5. Los Puntos de acceso y los Puntos de acceso subordinados no pueden ser resistentes a condiciones climáticas adversas, no pueden utilizar baterías y la fuente de alimentación tiene que estar conectada directamente a la toma de corriente eléctrica.
6. Los dispositivos subordinados no deben usarse para conectar dispositivos entre edificios o estructuras separadas.

Declaración de información sobre el cumplimiento de la FCC



Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites

están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. **Nota:** El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas en este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Dispositivos Wi-Fi de 5.9 y 6 GHz

Las regulaciones de la FCC restringen la operación de este dispositivo únicamente al uso en interiores. Este dispositivo no se puede utilizar para proporcionar conexión entre edificios o estructuras separadas. Se prohíbe la operación de este dispositivo en plataformas petrolíferas, automóviles, trenes, barcos y aeronaves, excepto que se permite el uso del dispositivo en aeronaves grandes mientras vuelan por encima de los 10,000 pies. Se prohíbe la operación de transmisores en la banda de 5.915-7.125 GHz para el control de o la comunicación con sistemas de aeronaves no tripuladas (drones).

Declaración de exposición a la radiación de RF de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones operativas específicas para cumplir con la exposición a RF. Este transmisor no debe ubicarse ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor. Este equipo ha sido evaluado por SAR para su uso en mano. Las mediciones de SAR se basan en una separación de 20 cm del cuerpo y el cumplimiento se logra a esa distancia.

Advertencia de la marca CE

Este es un producto de clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso es posible que se requiera que el usuario tome las medidas adecuadas.

FRECUENCIA DE OPERACIÓN (potencia máxima transmitida)

5150MHz-5250MHz(23dBm)

5735MHz-5835MHz(25mW)

5925MHz-6425MHz(23dBm)

Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, Alliedstar declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.



Por la presente, Alliedstar declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes del Reglamento de Equipos de Radio de 2017 (Radio Equipment Regulations 2017).

Información sobre exposición a RF

Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE (2014/53/UE Artículo 3.1a) sobre la limitación de la exposición del público en general a los campos electromagnéticos como medida de protección de la salud. Este dispositivo ha sido probado y cumple con las pautas de exposición de ICNIRP y el Estándar Europeo EN 62209-2. El SAR se mide con este dispositivo a una separación de 20 cm del cuerpo, mientras transmite al nivel de potencia de salida certificado más alto en todas las bandas de frecuencia de este dispositivo. Lleve este dispositivo al menos a 20 cm de distancia de su cuerpo para asegurar que los niveles de exposición permanezcan en o por debajo de los niveles probados.

Restricciones nacionales Atención:

Este dispositivo solo puede utilizarse en interiores en todos los estados miembros de la UE y países de la AELC (EFTA).

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)

Atención: Este dispositivo solo puede utilizarse en interiores en Gran Bretaña.



HHHHH-AA-FFFFF

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.




La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada


Etiquetas y símbolos

	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Número de modelo
	Número de serie
	Corriente continua
	Se requiere la recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
	Limitación de presión atmosférica
	Frágil, manipular con cuidado
	Limitación de humedad

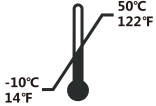	Mantener alejado de la lluvia
	Límite de apilamiento por número
	Límites de temperatura
	Consulte las instrucciones de uso. Siga el enlace a las eIFU: ifu.allied-star.com .
	Número de catálogo

PT/Português


Conteúdo da Embalagem

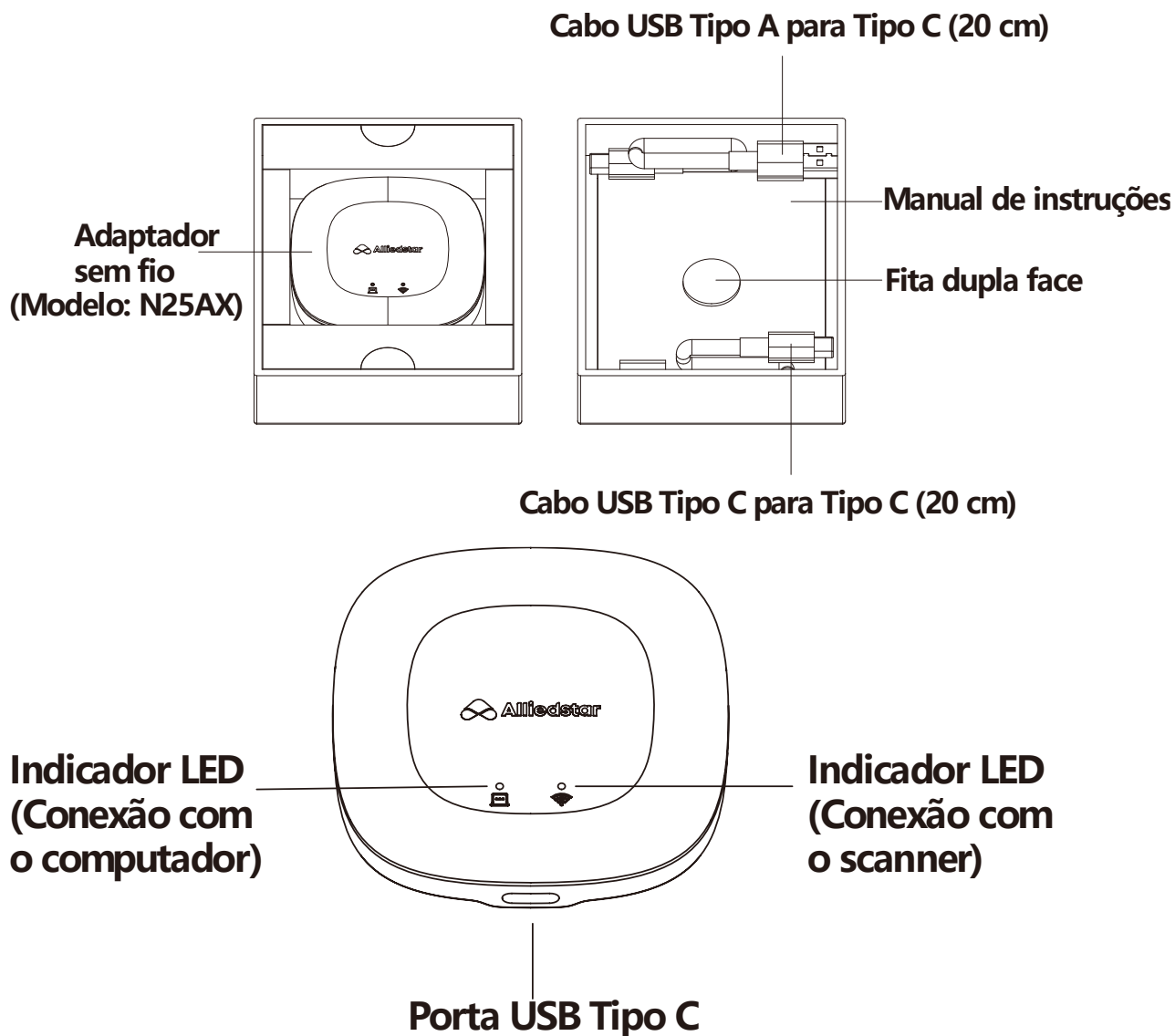

Guia de Instalação

Parte A: Instalação do Hardware

1. Coloque o adaptador sem fio (wireless) em uma superfície estável e plana, perto do computador.
2. (Opcional) Para montagem vertical, cole a fita dupla face fornecida na parte traseira do adaptador e fixe-o em uma superfície vertical limpa.
3. Conecte o cabo USB incluído do adaptador a uma porta USB disponível no computador.

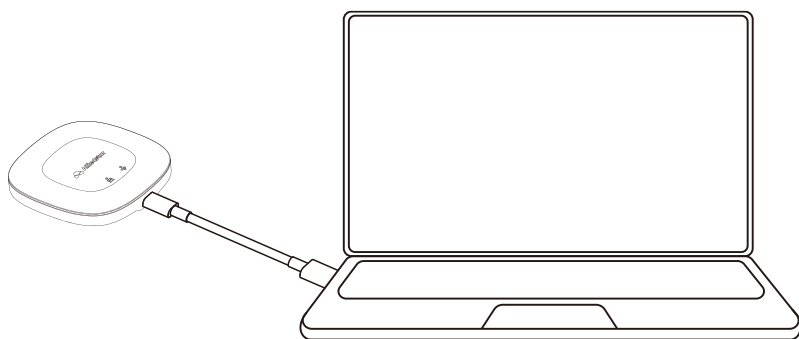

1. Computador com porta USB 2.0 ou posterior (compatível com USB 3.0, 3.1, etc.)
2. Windows 10 (compilação 18362 ou posterior) ou Windows 11, 64 bits

B: Configuração do Software

4. Certifique-se de que a versão 1.0.40.0 ou superior do software ScanPro esteja instalada.
5. Ligue o computador e o scanner sem fio.
6. Abra o software ScanPro.
6. Abra o software ScanPro.
7. Na lista de scanners, clique em **Conectar** ao lado do modelo do seu scanner.

Lista de Scanners



FKAE0039

Conectar

8. Uma vez conectado, o botão exibirá **desconectar** e o status da bateria aparecerá. Você pode começar a escanear agora.

Lista de Scanners

**FKAE0039**

100%

Desconectar

Status do Indicador

Status			Significado
Inicializando	Verde Intermitente	Verde Intermitente	O dispositivo está iniciando
Pronto para Conectar	Verde Fixo	Verde Pulsante	Pronto para conectar
Conectado	Verde Fixo	Verde Fixo	Conectado ao scanner e ao PC
Atualizando Firmware	Laranja Intermitente	–	O firmware está sendo atualizado
Erro de Hardware	–	Laranja Intermitente	Erro de hardware – reinicie o dispositivo

Solução de Problemas

Problema	Solução
Sem conexão	1. Tente outra porta USB. 2. Reinicie o computador.
Não é possível encontrar o Wi-Fi do scanner	1. Certifique-se de que o scanner esteja ligado (luz de status pulsante). 2. Mantenha o scanner dentro do alcance. 3. Desconecte e reconecte o adaptador sem fio.
Conexão instável ou lenta	1. Aproxime o adaptador e o scanner. 2. Remova grandes objetos metálicos ou fontes de interferência entre eles. 3. Mude o canal Wi-Fi no scanner, se possível.
O indicador não está em Verde Fixo	Consulte a seção "Status do Indicador" para mais detalhes.

Para suporte técnico, visite <https://support.allied-star.com/>

Requisitos Ambientais

Condição	Temperatura	Umidade Relativa	Pressão Atmosférica
Operação	15°C ~ 30°C	10% RH ~ 65% UR	70 kPa ~ 106 kPa
Transporte	-10 °C ~ 50°C	10 % RH ~ 95% UR	60 kPa ~ 106 kPa
Armazenamento	-10°C ~ 50°C	10 % RH ~ 85% UR	70 kPa ~ 106 kPa

Informações Regulatórias

Declaração de informações de conformidade da FCC



Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. **Nota:** O fabricante não é responsável por nenhuma interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Dispositivos Wi-Fi de 5.9 e 6 GHz

As regulamentações da FCC restringem a operação deste dispositivo apenas ao uso interno (indoor). Este dispositivo não pode ser usado para fornecer conexão entre edifícios ou estruturas separadas. A operação deste dispositivo é proibida em plataformas de petróleo, carros, trens, barcos e aeronaves, exceto que o dispositivo é permitido em grandes aeronaves enquanto voam acima de 10.000 pés. A operação de transmissores na banda de 5.915-7.125 GHz é proibida para controle ou comunicação com sistemas de aeronaves não tripuladas (drones).

Declaração de Exposição à Radiação de RF da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Os usuários finais devem seguir as instruções operacionais específicas para satisfazer a conformidade de exposição à RF. Este transmissor não deve ser co-localizado ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Este equipamento foi avaliado por SAR para uso na mão. As medições de SAR são baseadas em um espaçamento de 20 cm do corpo e a conformidade é alcançada a essa distância.

Aviso da Marca CE



Este é um produto de classe B. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, caso em que o usuário pode ser obrigado a tomar medidas adequadas.

FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO (a potência máxima transmitida)

5150MHz-5250MHz(23dBm)

5735MHz-5835MHz(25mW)

5925MHz-6425MHz(23dBm)

Declaração de conformidade da UE

A Alliedstar declara por meio deste que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.



A Alliedstar declara por meio deste que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos Regulamentos de Equipamentos de Rádio de 2017 (Radio Equipment Regulations 2017).

Informações sobre Exposição à RF

Este dispositivo atende aos requisitos da UE (2014/53/UE Artigo 3.1a) sobre a limitação da exposição do público em geral a campos eletromagnéticos como forma de proteção à saúde. Este dispositivo foi testado e atende às diretrizes de exposição da ICNIRP e ao Padrão Europeu EN 62209-2. A SAR é medida com este dispositivo a uma separação de 20 cm do corpo, enquanto transmite no nível de potência de saída certificado mais alto em todas as bandas de frequência deste dispositivo. Transporte este dispositivo a pelo menos 20 cm de distância do seu corpo para garantir que os níveis de exposição permaneçam nos níveis testados ou abaixo deles.

Restrições nacionais Atenção:

Este dispositivo só pode ser usado em ambientes internos em todos os estados membros da UE e países da EFTA.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)

Atenção: Este dispositivo só pode ser usado em ambientes internos na Grã-Bretanha.





HHHHH-AA-FFFFF

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.





La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Rótulos e Símbolos

	Fabricante
	Data de fabricação
	Número do modelo
	Número de série
	Corrente contínua

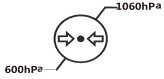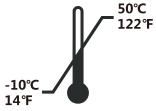	É necessária a coleta seletiva para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).
	Limitação de pressão atmosférica
	Frágil, manuseie com cuidado
	Limitação de umidade
	Mantenha longe da chuva
	Limite de empilhamento por número
	Limites de temperatura
	Consulte as instruções de uso. Acesse o link para as eIFU: ifu.allied-star.com .
	Número de catálogo



Alliedstar Medical Equipment Co., Ltd.

Floor 3-4, Unit 2, Building 3, No.222, West third section, Waihuan Road,
Yanjiang District, Ziyang, 641300, Sichuan, P.R. China

www.allied-star.com

Part number: DD0399

Released Date: 2026/03 Rev: 1.2

AP9286-B