


WUUK

WUUK Smart Sock

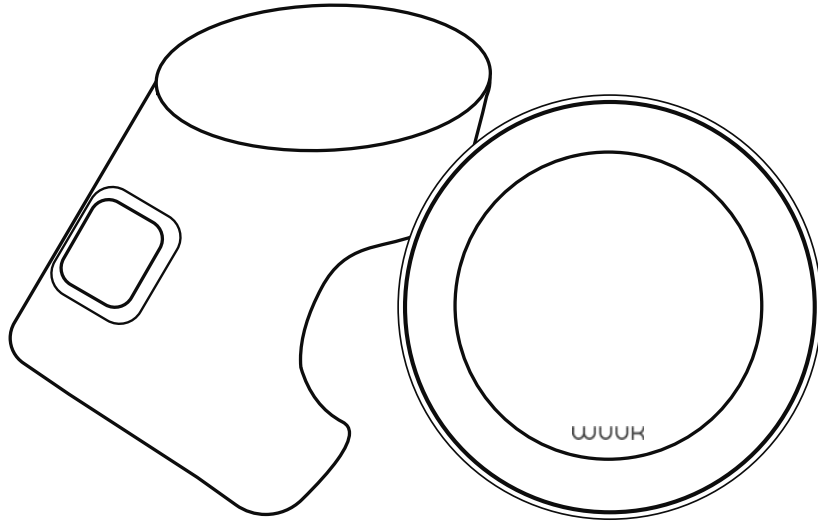

WUUK

English	02
Deutsch	17
Español	29
Français	41
Italiano	53

TABLE OF CONTENTS


WARNINGS / IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	03
WHAT'S INCLUDED	04
PRODUCT OVERVIEW	05
HOW DOES THE PRODUCT WORK	07
SETTING UP THE SYSTEM	08
CUSTOMER SERVICE	13
SAFETY STATEMENT	14

WARNINGS / IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Remember:

- This product is meant for use with healthy children up to 18 months of age. If your children have a pre-existing medical condition, consult your doctor before use.
- This product is an aid, it is not a substitute or should not be substituted for care and oversight of an adult or consultation with medical professionals.
- This product is designed and intended for tracking a baby's sleep patterns, sleep training, and general wellness purposes. False positive or false negative readings about your baby's heart rate are a potential risk of this product.
- Do not use this product as a diagnostic tool.
- Do not use this product as an excuse for unsafe sleep habits.


WHAT'S INCLUDED

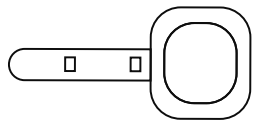


Sock Sensor

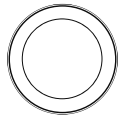

Smart Sock
Base Station

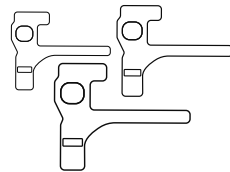

Smart Sock
Wrap * 3 Sizes

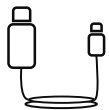

Base Station
Type-C Power
Cable (1M)




Power
Adapter (5V 1.5A)



User Manual

PRODUCT OVERVIEW

Smart Sock

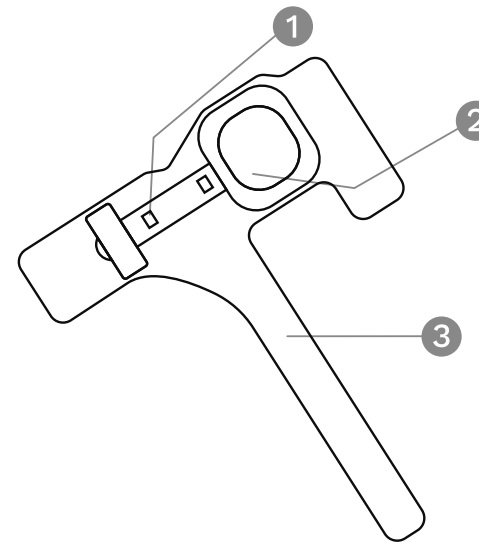


1 Indicator light

2 Sock Sensor


3 Sock Wrap

Base Station

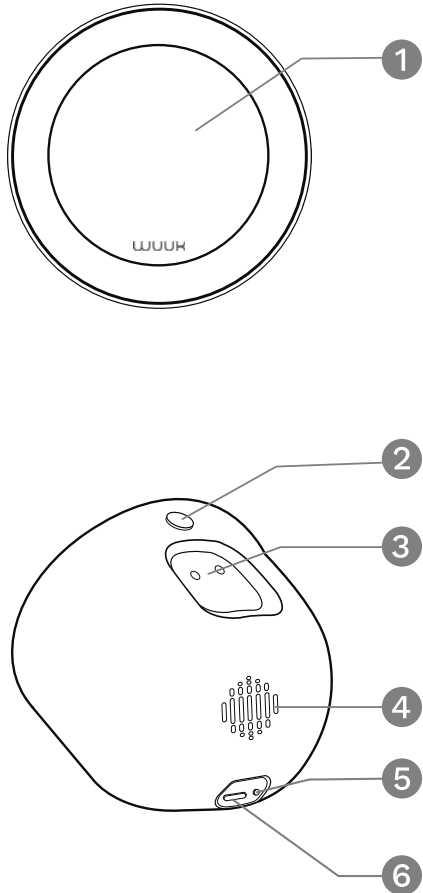

- 1 Screen
- 2 Snooze Button
- 3 Magnetic Charging Pin
- 4 Speaker
- 5 Sync Button
- 6 Power Port

HOW DOES THE PRODUCT WORK

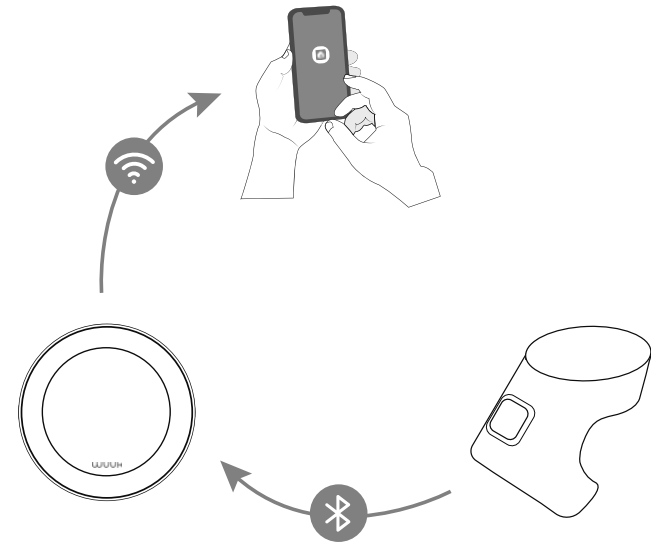


The Smart Sock sensor collects data and transmits it to the base station via Bluetooth and the base station will send information to WUUK Baby server via Wi-Fi.

The Sock Base Station connects to the WUUK Baby App to provide a complete sleep improvement solution for both the baby and the entire family.


SETTING UP THE SYSTEM

Power On the Sock Base Station

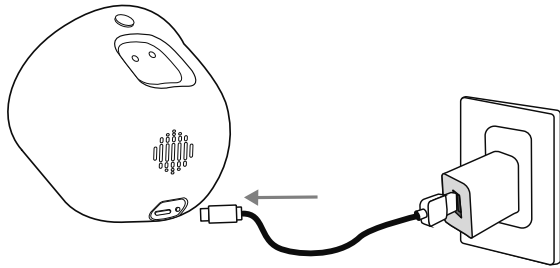

Connect the Sock Base Station to a power outlet

Charge the Smart Sock

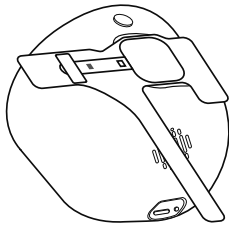

Place the Smart Sock on the Sock Base. The sensor's indicator light will flash red.

Connect the Sock Base Station to the WUUK Baby App

Download the WUUK Baby app from the App Store (iOS devices) or Google Play Store (Android devices).




Go to the app homepage. Tap Add Device, and add the WUUK Smart Sock to your WUUK Baby app.


Pick a size that fits well

Not too tight, not too loose, with enough room for your baby's skin to breathe. This ensures comfort and improves the accuracy of the sensors.

Align and attach the sensor

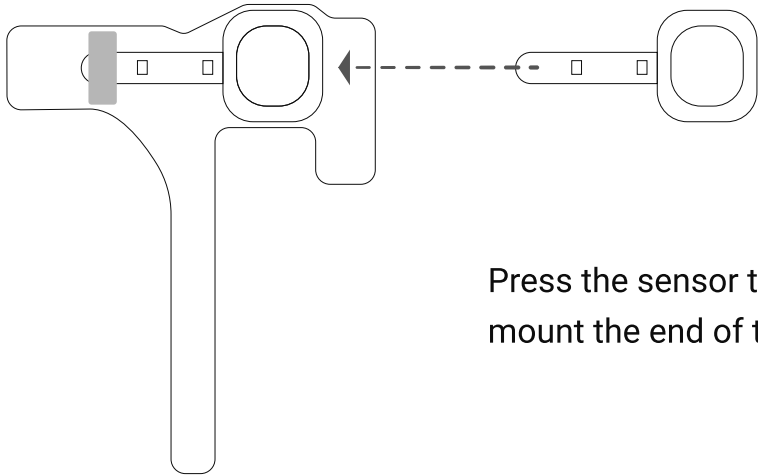

Press the sensor to the sock and mount the end of the sensor.


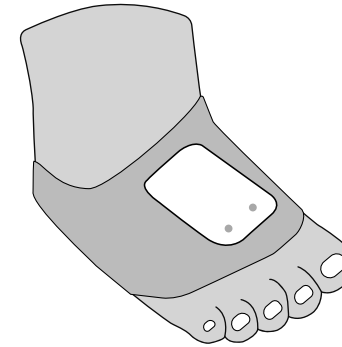


Right Foot

Dome on top of foot

Left Foot


Dome on bottom of foot

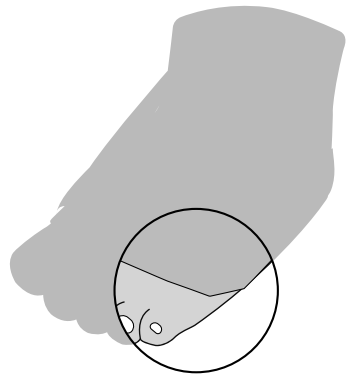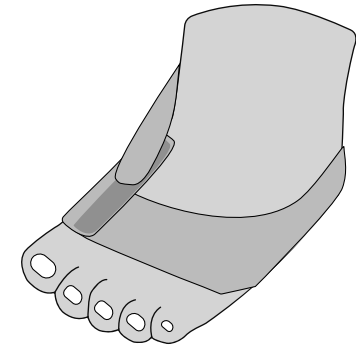


Interchangeable Sock

The sock is reversible and can be worn on either foot. For proper placement on either foot, place the notch on the outside of the foot behind the pinky toe.


Fit the Sock

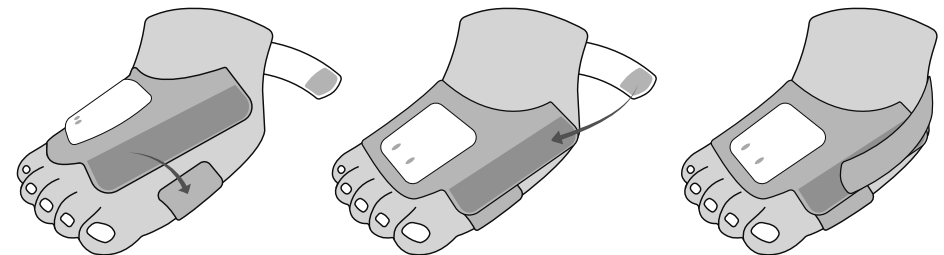

Understand the Snooze Button

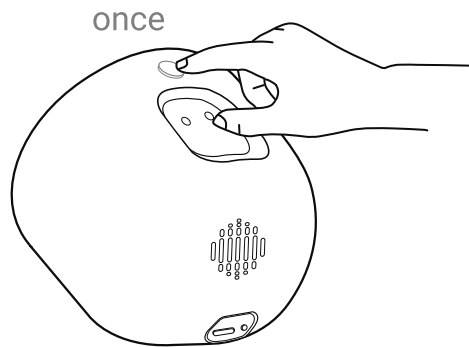

Snooze the Alarms for 10 minutes: Press the Snooze Button once.

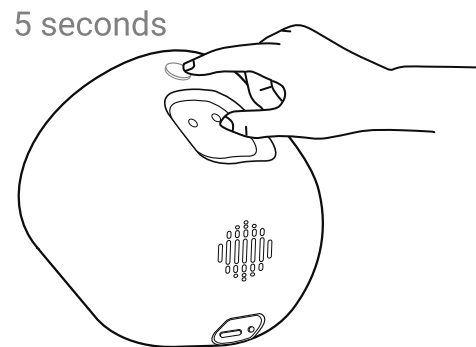

Turn off the Screen: Press and hold the Snooze Button for 5 seconds.

CUSTOMER SERVICE

For troubleshooting, check the WUUK BABY app > Account > Help Center for more references and live chat with Customer Support agents if needed.

Warranty: 12-month Limited Warranty

Call Us: United States +1 (415) 881-5715

Email Us: hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. All rights reserved.

WUUK and WUUK Logo are trademarks of WUUK Labs Corp., registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

SAFETY STATEMENT

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED Statement:

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B).
l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement établies par le Canada pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.**

**Product Model: BAB10
IC: 29239-BAB10**

**PMN: WUUK Smart Sock Station
HVIN: BAB10**

Declaration of Conformity

- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.
- It is recommended to charge the device in an environment with a temperature that ranges from 5°C to 25°C.
- Please ensure to use only the charger offered by the manufacturer. Using an unauthorized charger may cause danger and violate the authorization of the device and the guarantee article.
- This charger is for indoor use only.

IC RF Statement

When using the station, maintain a distance of 20 cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

INHALTS- VERZEICHNIS

WARNUNGEN / WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	18
WAS ENTHALTEN IST	20
PRODUKTÜBERSICHT	21
WIE FUNKTIONIERT DAS PRODUKT	23
EINRICHTEN DES SYSTEMS	24


WARNUNGEN / WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Denken Sie daran:


- Dieses Produkt ist für die Verwendung bei gesunden Kindern bis zu 18 Monaten gedacht. Wenn Ihr Kind eine bestehende medizinische Erkrankung hat, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt vor der Verwendung.
- Dieses Produkt ist eine Hilfe, es ist kein Ersatz und sollte nicht als Ersatz für die Betreuung und Aufsicht eines Erwachsenen oder die Konsultation von medizinischen Fachkräften verwendet werden.
- Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Schlafmuster eines Babys, das Schlaftraining und die allgemeine Gesundheit zu überwachen. Falsch-positive oder falsch-negative Messwerte bezüglich der Herzfrequenz Ihres Babys stellen ein potenzielles Risiko dieses Produkts dar.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Diagnosewerkzeug.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Entschuldigung für unsichere Schlafgewohnheiten.


WAS ENTHALTEN IST

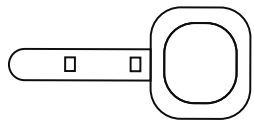


Sockensensor

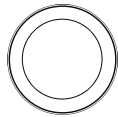

Basisstation für
intelligente Socken

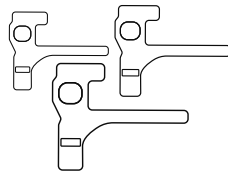

Intelligente
Sockenwicklung * 3

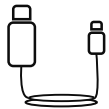

Monitor Typ-C
Stromkabel (1m)




Netzteil (5V 1.5A)



Benutzerhandbuch

PRODUKTÜBERSICHT

Intelligente Socke

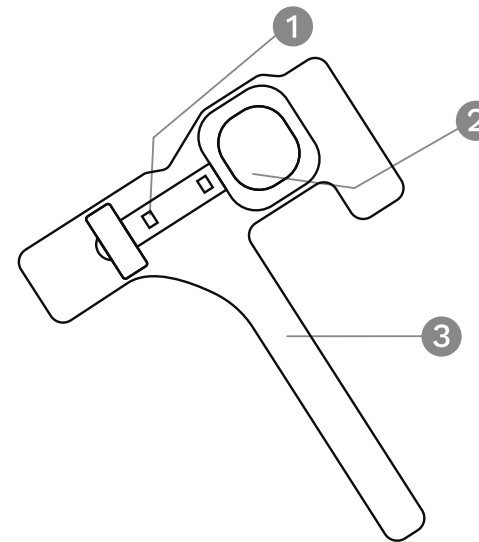


① Kontrollleuchte

② Socken-Sensor


③ Sockenumwicklung

Basisstation

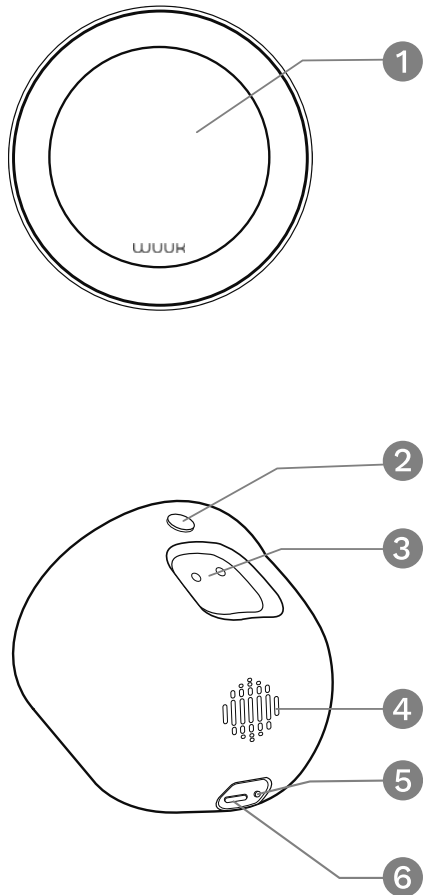

- 1 Bildschirm
- 2 Schlummertaste
- 3 Magnetischer Ladepin
- 4 Lautsprecher
- 5 SYNC-Taste
- 6 Stromanschluss

WIE FUNKTIONIERT DAS PRODUKT

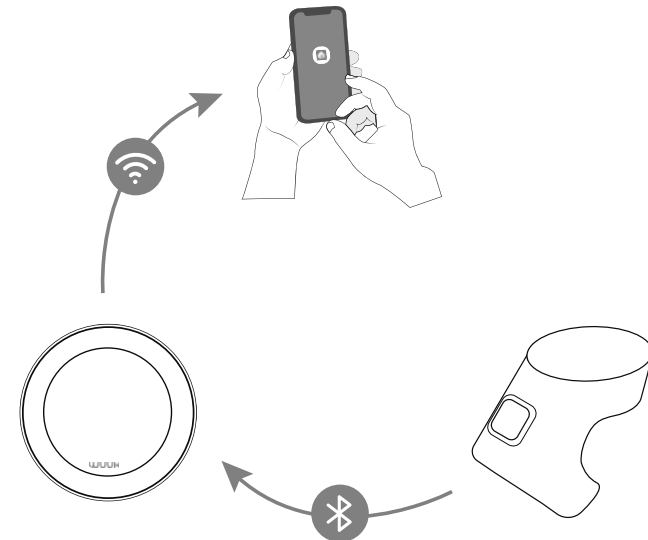


Der intelligente Socken-Sensor sammelt Daten und sendet sie über Bluetooth an die Basisstation. Die Basisstation sendet die Informationen dann über Wi-Fi an den WUUK Baby-Server.

Die Socke-Basisstation verbindet sich mit der WUUK Baby App, um eine vollständige Lösung zur Schlafverbesserung für das Baby und die gesamte Familie anzubieten.


EINRICHTEN DES SYSTEMS

Schalten Sie die Socke-Basisstation ein

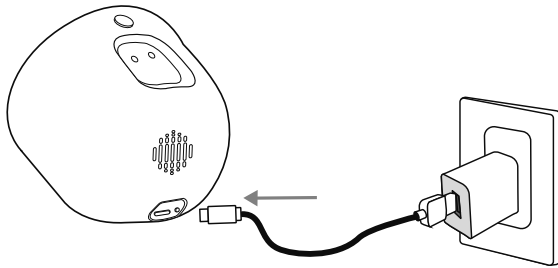

Schließen Sie die Socken-Basisstation an eine Steckdose an.

Laden Sie die Intelligente Socke

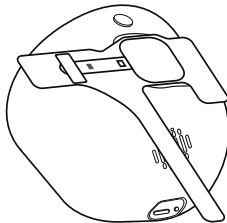

Legen Sie die Intelligente Socke auf die Sock Base. Das Indikatorlicht des Sensors wird rot blinken.

Verbinden Sie die Socke-Basisstation mit der WUUK Baby App.

Laden Sie die WUUK Baby-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.




Gehe zur Startseite der App. Tippe auf "Gerät hinzufügen" und füge die WUUK Smart Sock zu deiner WUUK Baby App hinzu.


Wähle eine Größe, die gut passt

Nicht zu eng, nicht zu locker, mit genug Platz, damit die Haut deines Babys atmen kann. Dies sorgt für Komfort und verbessert die Genauigkeit der Sensoren.

Sensor ausrichten und anbringen

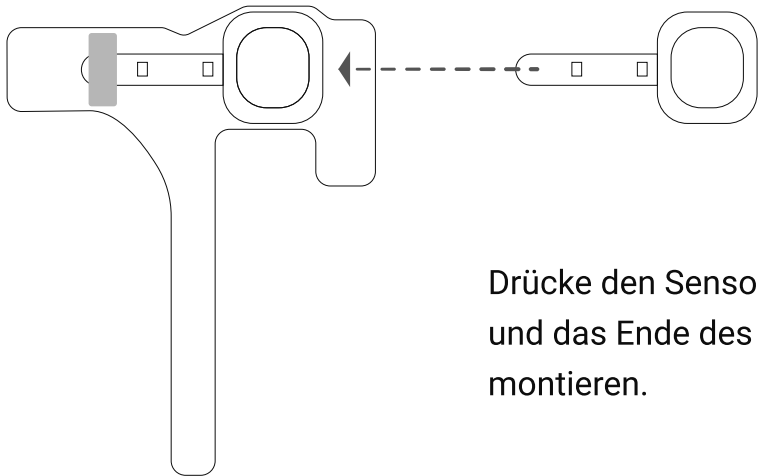

Drücke den Sensor an die Socke und das Ende des Sensors zu montieren.


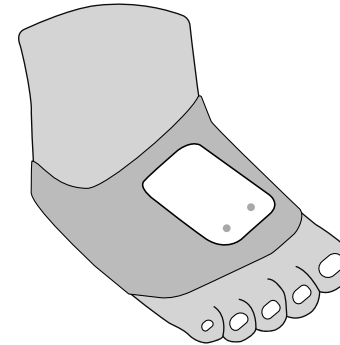


Rechter Fuß

Kuppel auf dem Fuß

Linker Fuß


Kuppel am unteren
Ende von Fuß

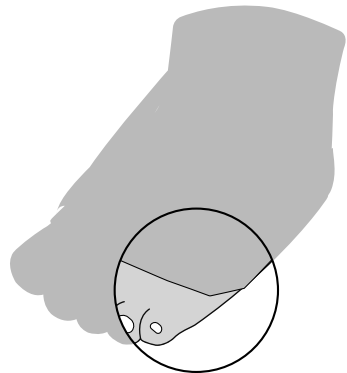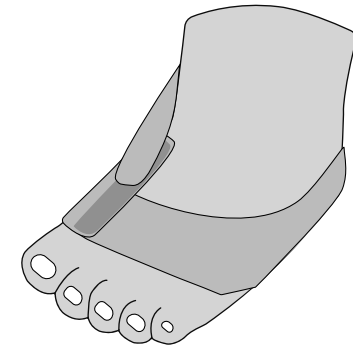


Austauschbare Sock

Die Socke kann sowohl am rechten als auch am linken Fuß getragen werden. Für die richtige Platzierung auf beiden Füßen platzieren Sie die Kerbe auf die außerhalb des Fußes hinter dem kleinen Finger Zeh.


Passen Sie die Socke an

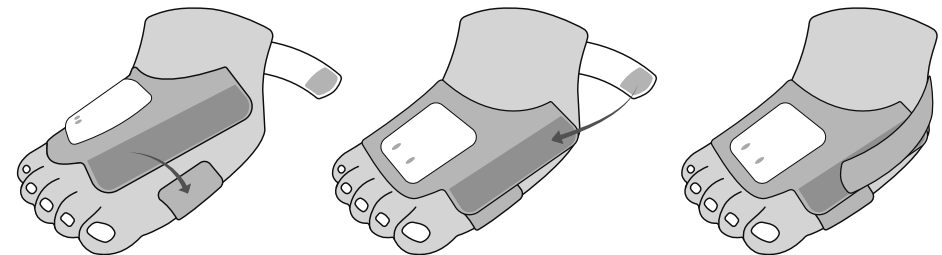

Die Schlummertaste verstehen

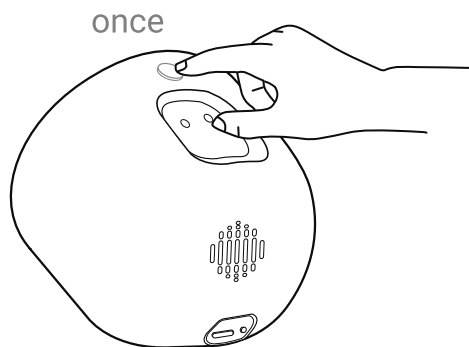

Schlummern Sie den Alarm für 10 Minuten: Drücken Sie einmal die Schlummertaste.

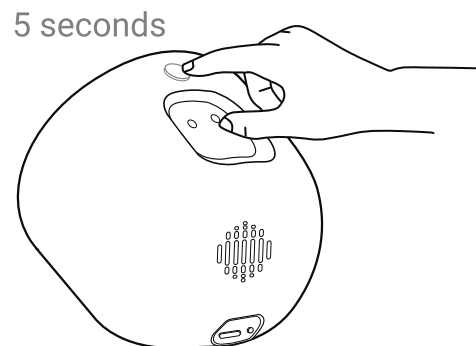

Bildschirm ausschalten: Halten Sie die Schlummertaste 5 Sekunden lang gedrückt.

TABLA DE CONTENIDOS

ADVERTENCIAS / INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	30
QUÉ INCLUYE	32
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	33
CÓMO FUNCIONA EL PRODUCTO	35
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	36


ADVERTENCIAS /AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Recuerda:


- Este producto está destinado para su uso con niños sanos de hasta 18 meses de edad. Si su hijo tiene alguna condición médica preexistente, consulte a su médico antes de usarlo.
- Este producto es una ayuda, no es un sustituto ni debe ser sustituido por la atención y supervisión de un adulto o la consulta con profesionales médicos.
- Este producto está diseñado para rastrear los patrones de sueño de un bebé, el entrenamiento del sueño y el bienestar general. Lecturas falsas positivas o negativas sobre la frecuencia cardíaca de su bebé son un riesgo potencial de este producto.
- No utilice este producto como herramienta de diagnóstico.
- No utilice este producto como excusa para hábitos de sueño inseguros.

- No utilice este producto como herramienta de diagnóstico.
- No utilice este producto como excusa para hábitos de sueño inseguros.


QUÉ INCLUYE

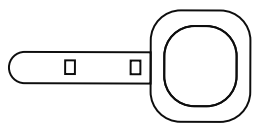


Sensor de calcetines

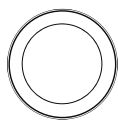


Estación base para
calcetines inteligentes

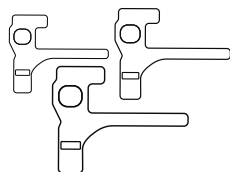

Envoltorio para
calcetines
inteligentes * 3

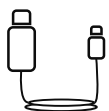

Monitor Tipo-C
Cable de
alimentación (1m)

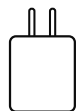


Adaptador de
corriente (5V 1.5A)



Manual de usuario


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Calcetín inteligente

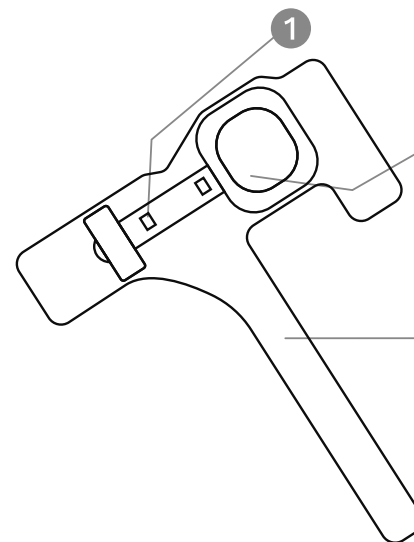


- 1 Luz indicadora
- 2 Sensor de calcetín
- 3 Envoltorio para calcetines

Estación base

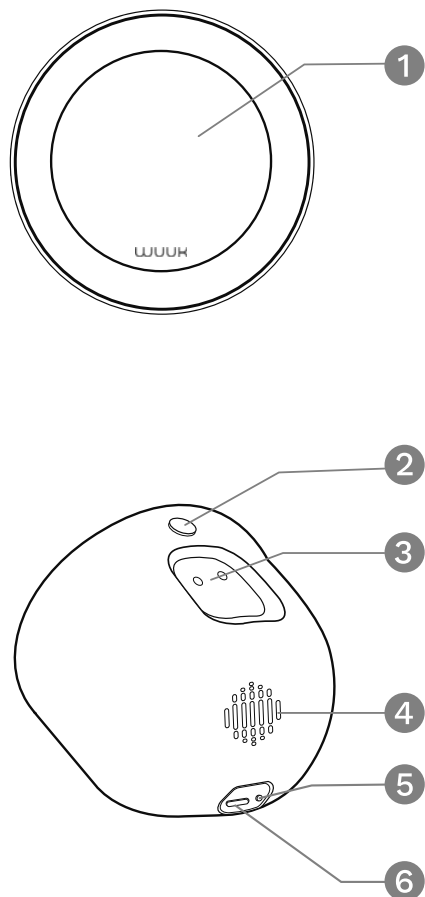

- 1 Pantalla
- 2 Botón de repetición
- 3 Pin de carga magnético
- 4 Altavoz
- 5 Botón SYNC
- 6 Puerto de alimentación

CÓMO FUNCIONA EL PRODUCTO

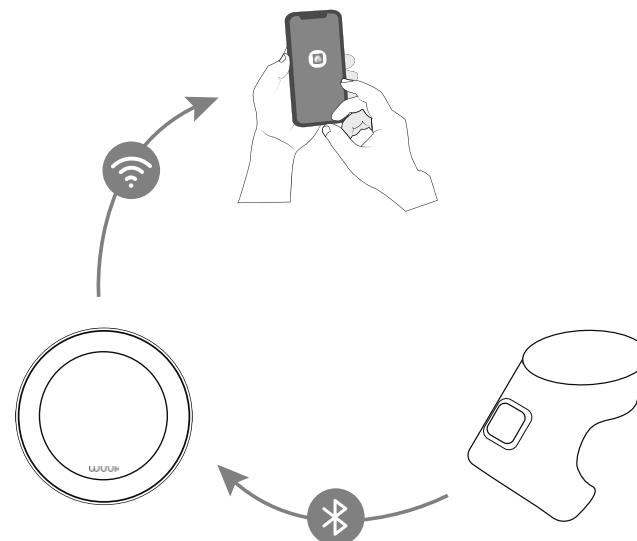


El Sensor Calcetín inteligente recopila los datos y los envía a la estación base a través de Bluetooth. La estación base enviará la información al servidor WUUK Baby a través de Wi-Fi.

La Estación Base de los Calcetines se conecta a la aplicación WUUK Baby para ofrecer una solución completa de mejora del sueño para el bebé y toda la familia.


CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Enciende la Estación Base de los Calcetines

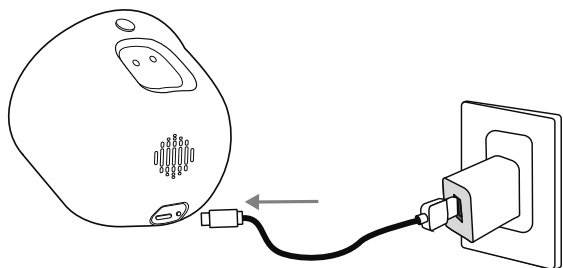

Conecte la estación base Sock a una toma de corriente.

Carga el Calcetín inteligente

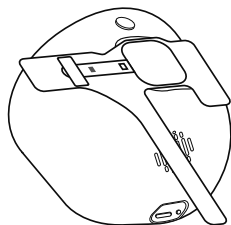

Coloca el Calcetín inteligente sobre la Sock Base. La luz indicadora del sensor parpadeará en rojo.

Conecta la Estación Base de los Calcetines a la aplicación WUUK Baby.

Descarga la aplicación WUUK Baby desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).




Ve a la página de inicio de la aplicación. Toca "Agregar dispositivo" y agrega el WUUK Smart Sock a tu aplicación WUUK Baby.


Elige una talla que te quede bien

Ni demasiado apretado, ni demasiado flojo, con suficiente espacio para que la piel de tu bebé respire. Esto garantiza comodidad y mejora la precisión de los sensores.

Alinea y conecta el sensor

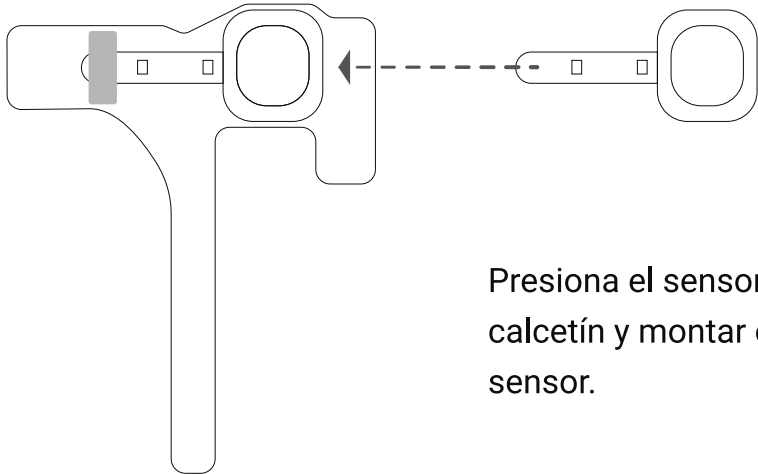


Presiona el sensor contra el calcetín y monta el extremo del sensor.

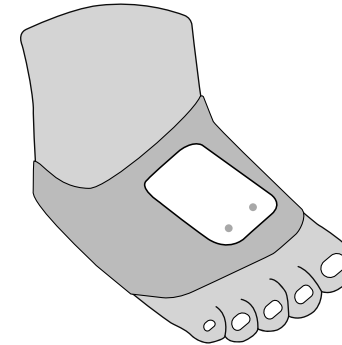


Pie derecho

Cúpula en la parte superior del pie

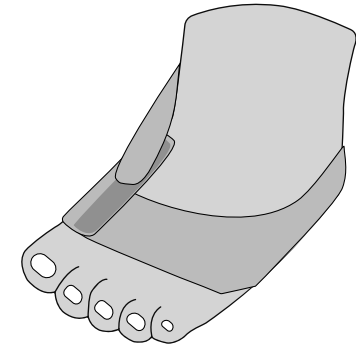

Pie izquierdo


Cúpula en la parte inferior de pie

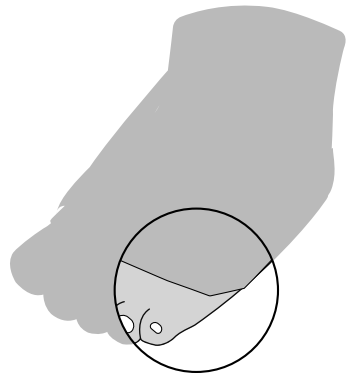


Calcetín intercambiable

El calcetín se puede usar en el pie derecho o en el izquierdo. Para una colocación adecuada En cualquiera de los pies,coloca la muesca en el Fuera del pie detrás del meñique dedo del pie.


Ajusta el Calcetín

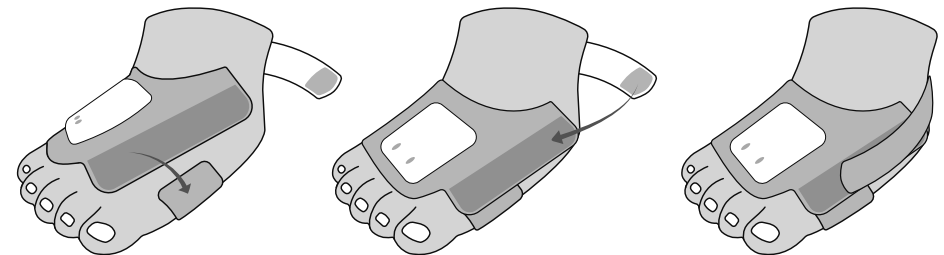

Entender el botón de repetición

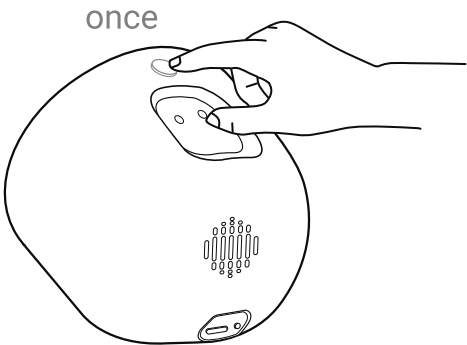

Pospone la alarma durante 10 minutos: Pulsa una vez el botón de repetición.

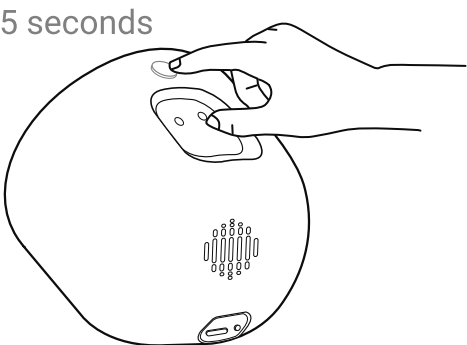

Apagar la pantalla: Mantenga presionado el botón Posponer durante 5 segundos.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS / INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	42
CE QUI EST INCLUS	44
APERÇU DU PRODUIT	45
COMMENT FONCTIONNE LE PRODUIT	47
CONFIGURATION DU SYSTÈME	48


AVERTISSEMENTS / INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Rappelez-vous :


- Ce produit est destiné à être utilisé avec des enfants en bonne santé jusqu'à 18 mois. Si votre enfant présente une condition médicale préexistante, consultez votre médecin avant de l'utiliser.
- Ce produit est une aide, il n'est pas un substitut et ne doit pas être remplacé par les soins et la surveillance d'un adulte ou la consultation avec des professionnels de la santé.
- Ce produit est conçu pour suivre les schémas de sommeil d'un bébé, l'entraînement au sommeil et le bien-être général. Des lectures faussement positives ou faussement négatives du rythme cardiaque de votre bébé représentent un risque potentiel de ce produit.

- Ne pas utiliser ce produit comme outil de diagnostic.
- N'utilisez pas ce produit comme une excuse pour des habitudes de sommeil dangereuses.


CE QUI EST INCLUS

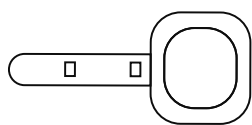


Capteur de
chaussettes

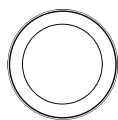

Station de base pour
chaussettes intelligentes

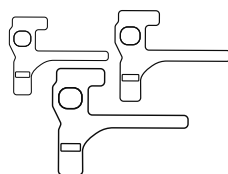

Enveloppement pour
chaussettes
intelligentes *3

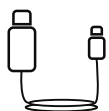

Type-C Câble
d'alimentation
du moniteur
(1mètre)




Adaptateur
secteur (5V 1.5A)



Manuel de
l'Utilisateur

APERÇU DU PRODUIT

Chaussette intelligente

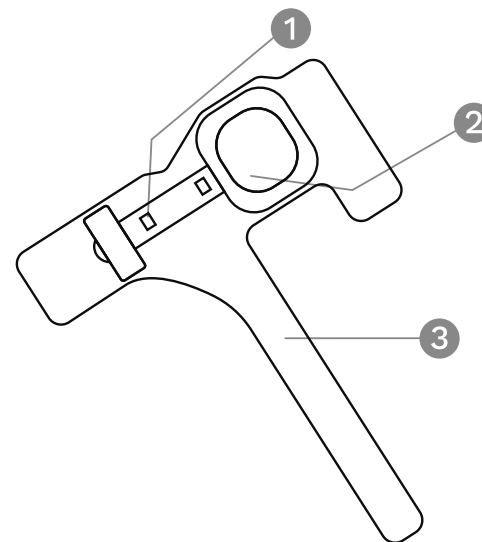


① Indicateur lumineux

② Capteur de chaussette


③ Enveloppe de chaussette

Station de base

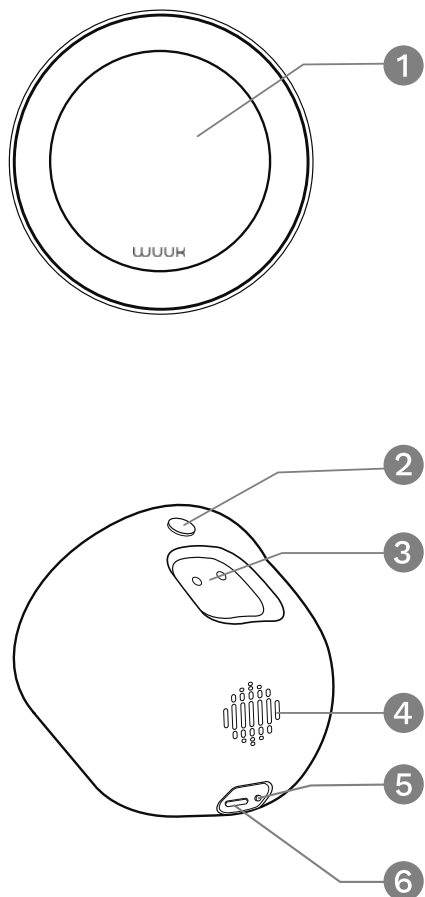

- ① Écran
- ② Bouton de répétition
- ③ Broche de chargement magnétique
- ④ Haut-parleur
- ⑤ Bouton SYNC
- ⑥ Port d'alimentation

COMMENT FONCTIONNE LE PRODUIT

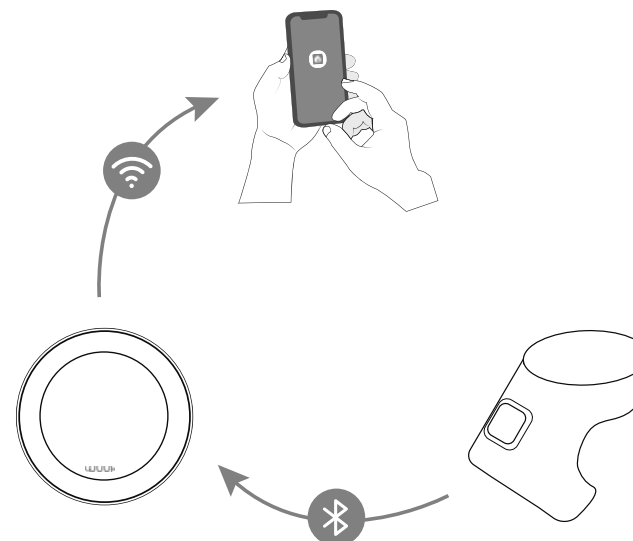


Le Capteur de la chaussette intelligente collecte les données et les envoie à la station de base via Bluetooth. La station de base transmet ensuite les informations au serveur WUUK Baby via Wi-Fi.

La Station de Base des Chaussettes se connecte à l'application WUUK Baby pour offrir une solution complète d'amélioration du sommeil pour le bébé et toute la famille.


CONFIGURATION DU SYSTÈME

Allumez la Station de Base des Chaussettes

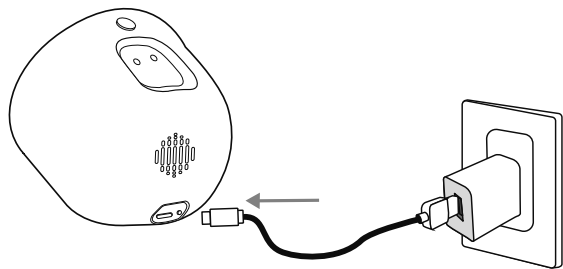

Connectez la station de base Sock à une prise de courant.

Chargez la Chaussette intelligente

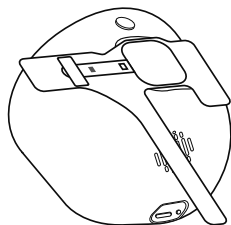

Placez la Chaussette intelligente sur la Station de Base des Chaussettes. Le voyant du capteur clignotera en rouge.

Connectez la Station de Base des Chaussettes à l'application WUUK Baby.

Téléchargez l'application WUUK Baby depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).




Allez à la page d'accueil de l'application. Appuyez sur "Ajouter un appareil" et ajoutez la WUUK Smart Sock à votre application WUUK Baby.


Choisissez une taille qui vous va bien

Ni trop serrée, ni trop lâche, avec assez d'espace pour que la peau de votre bébé puisse respirer. Cela garantit un confort et améliore la précision des capteurs.

Alignez et fixez le capteur

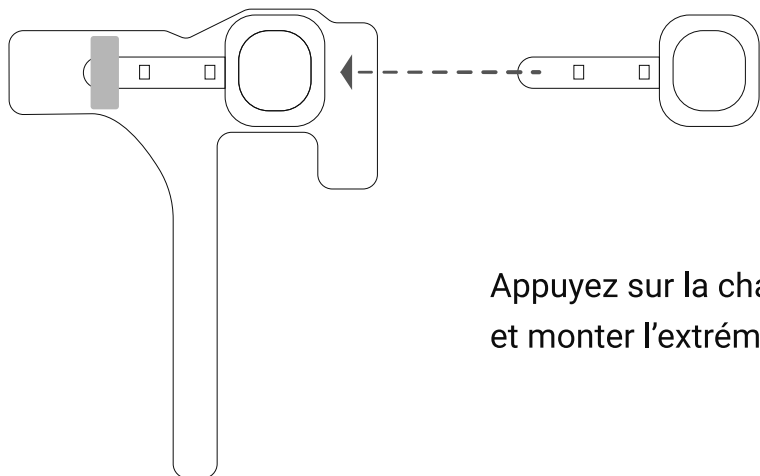

Appuyez sur la chaussette
et monter l'extrémité du capteur.


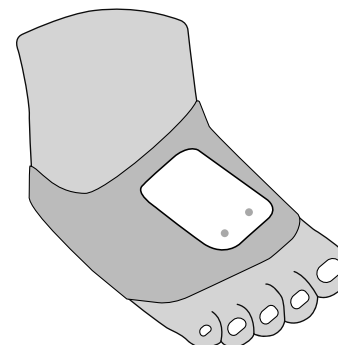


Pied droit

Dôme sur le dessus du pied

Pied gauche


Dôme sous le pied

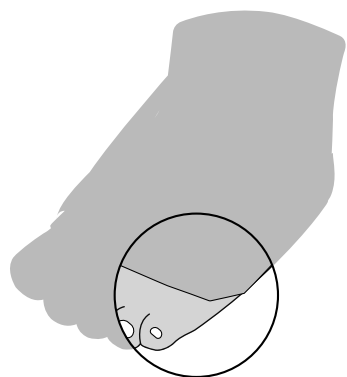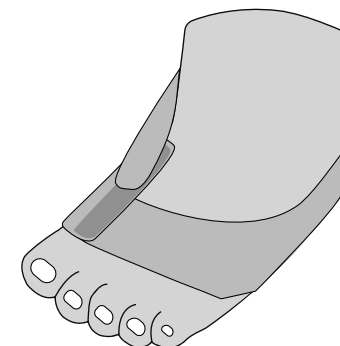


Chaussette interchangeable

La chaussette peut être posée à droite Ou pied gauche. Pour un bon placement À chaque pied, placez l'encoche sur le à l'extérieur du pied derrière l'auriculaire orteil.


Mets la Chaussette

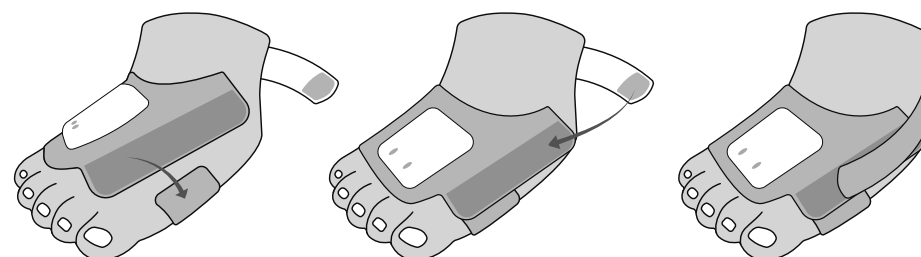

Comprendre le bouton Snooze

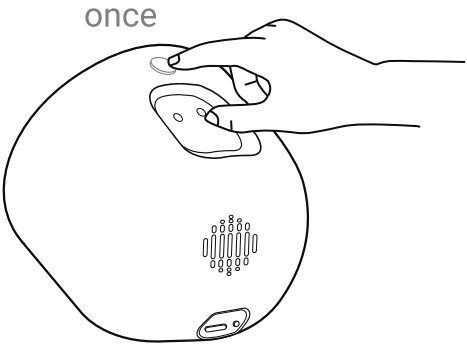

Snoozez l'alarme pendant 10 minutes : Appuyez une fois sur le bouton de répétition.

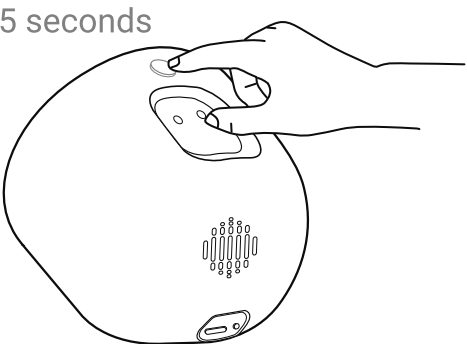

Éteignez l'écran : maintenez le bouton Snooze enfoncé pendant 5 secondes.

INDICE

AVVERTENZE / ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA	54
COSA È INCLUSO	56
PANORAMICA DEL PRODOTTO	57
COME FUNZIONA IL PRODOTTO	59
PREPARAZIONE DEL SISTEMA	60


AVVERTENZE / ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Ricorda: 


- Questo prodotto è destinato all'uso con bambini sani fino a 18 mesi di età. Se i vostri bambini hanno una condizione medica preesistente, consultate il medico prima dell'uso.
- Questo prodotto è un aiuto, non è un sostituto e non dovrebbe essere sostituito per la cura e la supervisione di un adulto o la consultazione con professionisti medici.
- Questo prodotto è progettato e destinato a monitorare i modelli di sonno del bambino, l'addestramento al sonno e il benessere generale. Letture false positive o false negative della frequenza cardiaca del tuo bambino sono un potenziale rischio di questo prodotto.

- Non utilizzare questo prodotto come strumento diagnostico.
- Non utilizzare questo prodotto come scusa per abitudini di sonno non sicure.


COSA È INCLUSO

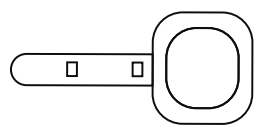


Sensore Calzino

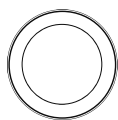


Stazione base per calzini intelligenti

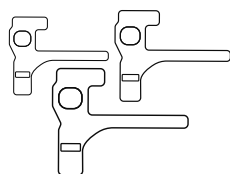

Avvolgimento per calzini intelligenti * 3

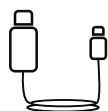

Monitor Tipo-C
Cavo di alimentazione (1m)

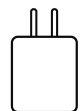


Adattatore di alimentazione
(5 V 1.5A)



Manuale d'Uso


PANORAMICA DEL PRODOTTO

Calzino intelligente

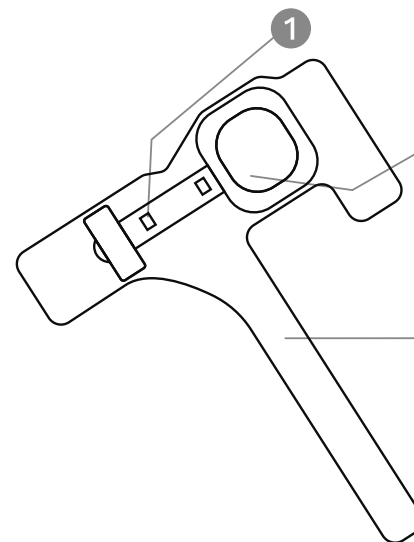

- 1 Indicatore luminoso
- 2 Sensore per calzini
- 3 Avvolgimento per calzini

Stazione base

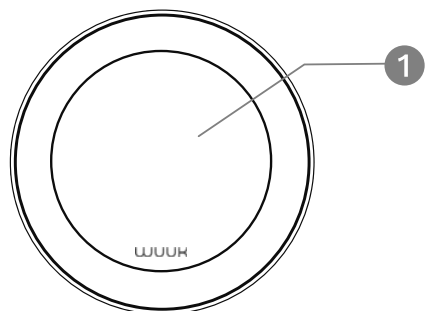

1 Schermo


2 Pulsante di snooze

3 Perno di ricarica magnetico


4 Altoparlante

5 Pulsante SYNC

6 Porta di alimentazione

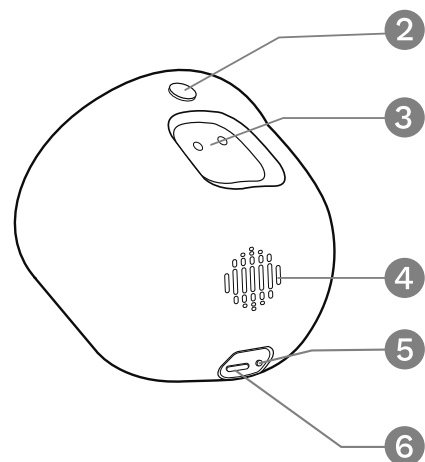

COME FUNZIONA IL PRODOTTO

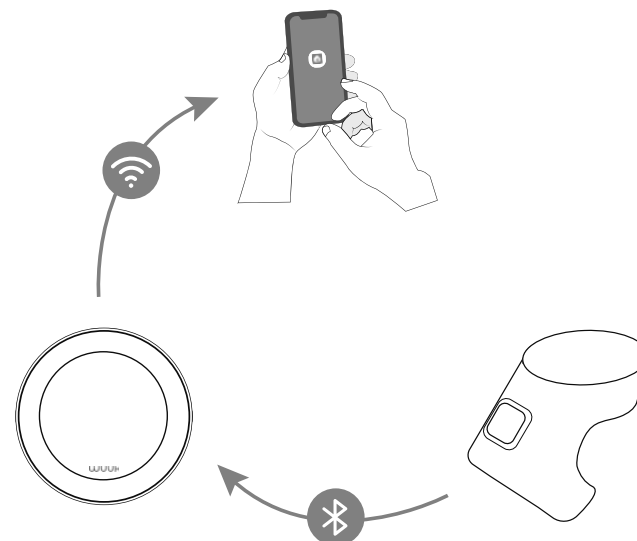


Il Sensore Calzino Intelligente raccoglie i dati e li invia alla stazione base tramite Bluetooth. La stazione base invierà quindi le informazioni al server WUUK Baby tramite Wi-Fi.

La Stazione Base per Calzino si collega all'app WUUK Baby per fornire una soluzione completa per il miglioramento del sonno per il bambino e l'intera famiglia.


PREPARAZIONE DEL SISTEMA

Accendi la Stazione Base per Calzino

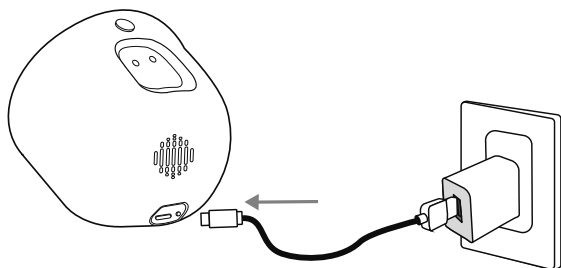

Collegare la stazione base Sock a una presa di corrente.

Carica il Calzino intelligente

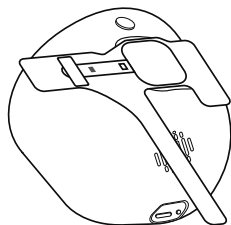

Posiziona il Calzino intelligente sulla Sock Base. La luce di indicazione del sensore lampeggerà in rosso.

Collega la Stazione Base per Calzino all'app WUUK Baby.

Scarica l'app WUUK Baby dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).




Vai alla homepage dell'app. Tocca "Aggiungi dispositivo" e aggiungi la WUUK Smart Sock alla tua app WUUK Baby.


Scegli una taglia che ti calzi bene

Non troppo stretto, né troppo largo, con abbastanza spazio per la pelle del bambino per respirare. Questo garantisce comfort e migliora la precisione dei sensori.

Allinea e collega il sensore

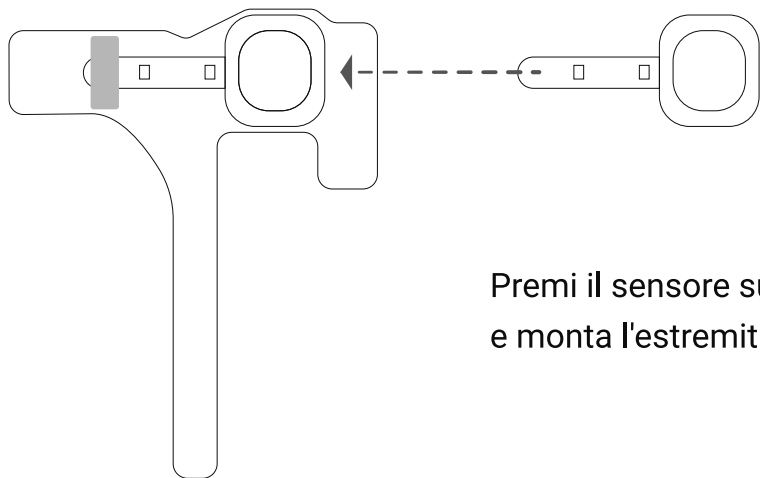

Premi il sensore sul calzino e monta l'estremità del sensore.


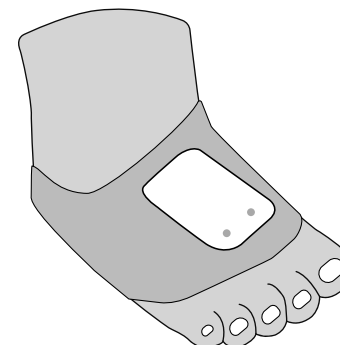


Piede destro

Cupola sopra il piede

Piede sinistro


Cupola sul fondo di piedi

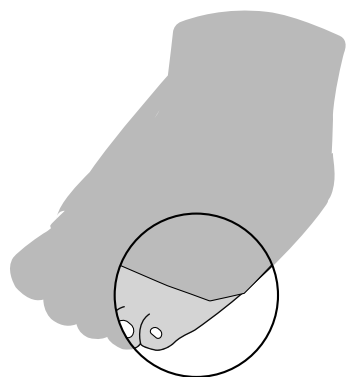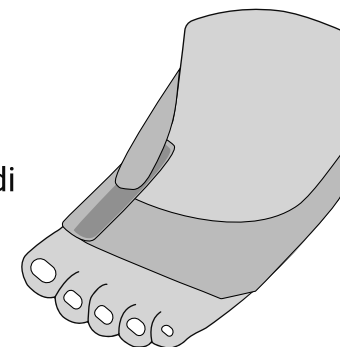


Interscambiabile Sock

Il calzino può andare su destra o piede sinistro. Per una corretta posizione Su entrambi i piedi, posiziona la tacca sulla parte esterna del piede dietro il mignolo Punta del piede.


Fai entrare il Calzino

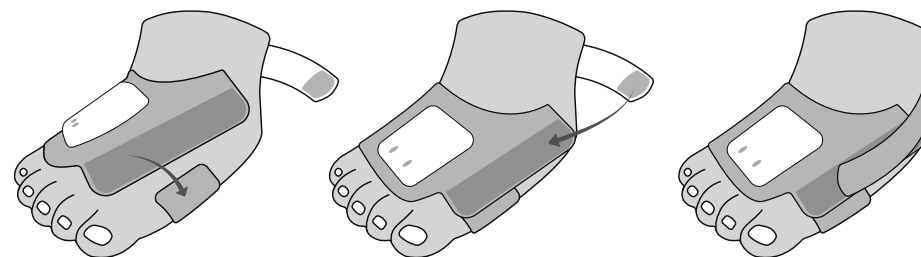

Capire il pulsante Snooze

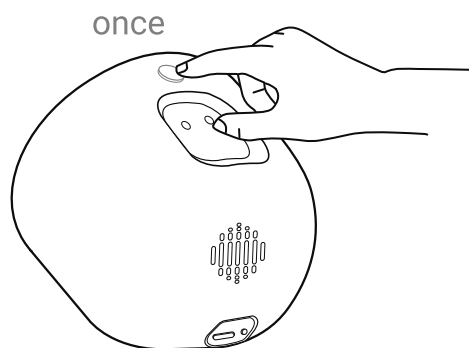

Sospendi la sveglia per 10 minuti: Premi una volta il pulsante di snooze.

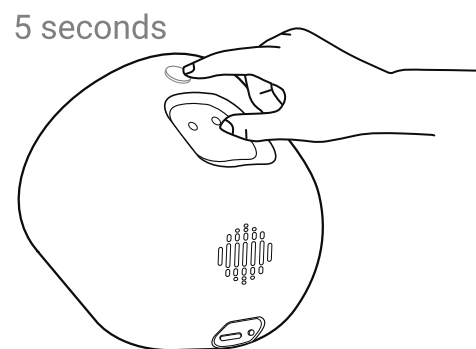

Spegnimento dello schermo: tieni premuto il pulsante Snooze per 5 secondi.