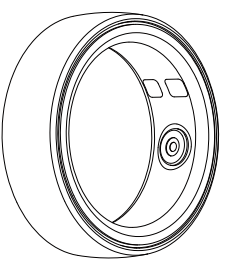
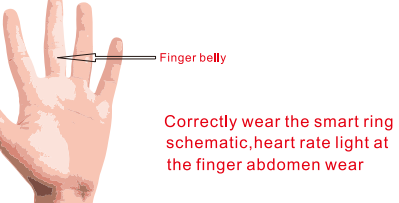
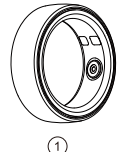
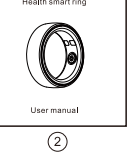
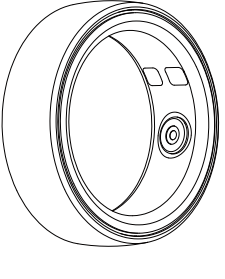
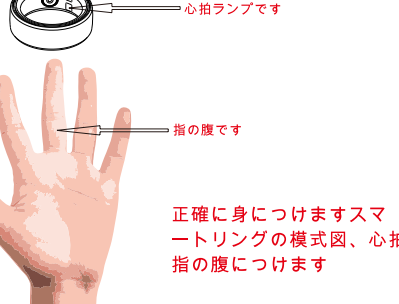
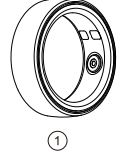
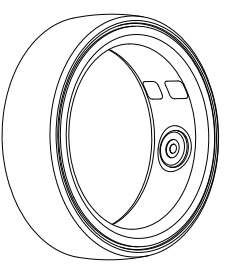
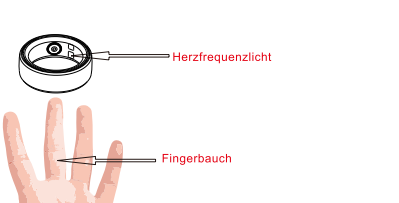
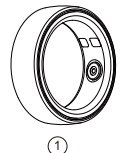
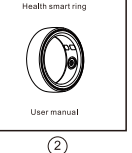


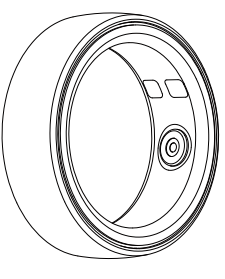
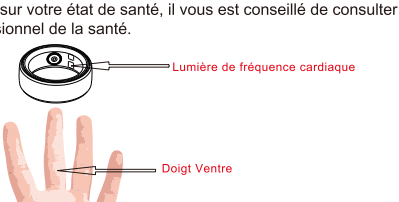
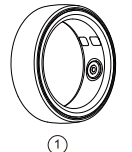
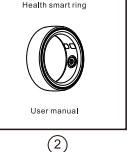
英

Health smart ring	Product introduction	Packing instructions	Specification parameter	User guide	Charge activation	operation Instructions	Conventional problem
 User manual	Please note: The Ring service is not intended to diagnose, treat or prevent any disease or medical condition. The information and data in the service are for informational purposes only and do not replace the services of a health professional or physician. If you have any questions about your medical condition, you are advised to consult a medical professional.  Correctly wear the smart ring schematic heart rate light at the finger abdomen wear	1.Smart ring 2. User manual 3. Magnetic line  ①  ②  ③ Tip: Version 5 matches the charging bay	Specification parameter 1. Storage capacity: It is recommended to connect the APP and synchronize data every day, and the ring can be stored at most 30 days of data, depending on the type and frequency of use 2. Product weight: about 6.8g 3. Battery capacity: 18mAh polymer lithium battery 4. Battery life: 3-5 days, depending on the frequency of use 5. Bluetooth version: BLE5.1 6. Bluetooth range: 3-5 meters 7. Waterproof level: IP68	1.User guide Search for the EcTri in Google Play or App Store to download the APP. Please allow the APP to obtain Bluetooth connection permission and location permission or scan the QR code on the right side to download the APP  	2.Charge activation • When using the device for the first time, charge and activate the device. • If factory Settings are restored on the app, reactivate it with a charge. 1. Ring charging: Use the matching charging cable to connect the ring and charger 2 After the power is turned on, the ring indicator light is always red. Charging is complete: the green light is on. 4 Charging time: 60 minutes 5 Power check: Check the power at the device connection on the APP homepage  Bin charging Magnetic cable charging Tip: Version 5 matches the charging bay	3.APP operation Instructions After the device is activated, pair it with the APP EcTri for easy operation and use. The APP consists of four pages, which are: Home page \ Sports \ Equipment \ mine. 1. home view health data, sports records, Data on sleep, blood oxygen, women's health. 2, the sports page has a variety of sports modes. You can choose your favorite exercises mode or set some exercise. 3. Check the device link and health Settings on the device page Equipment setting, remote control photography, etc. 4. my page to view personal information, account management Bind the mobile phone number and other function Settings. 	Q&A 1.Unable to Bluetooth connect Please make sure that the Bluetooth permission and positioning permission of the APP have been turned on. When the ring has no power or low power, the Bluetooth connection cannot be made. Please charge the ring 2. Inaccurate data Please wear the ring correctly. The inner ring detection sensor is in close contact with the skin of the finger abdomen 3. The ring has been bound The ring has a unique ID. If you need to bind a new APP account, please unbind the ring with the bound APP account. If you forget the APP account, please contact the manufacturer Exemption ordinance 1. Normal wear and tear, including scratches and dents 2. The product contains consumable zero devices, such as batteries 3. Damage caused by non-compliance with the instructions 4. Product damage caused by force majeure, such as fire, flood, etc 5. Damage caused by unauthorized tampering or alteration of the product
健康スマートリングです	製品紹介です	包装説明書です	スペックパラメータ	マニュアルです	充電活性化です	アプリの操作説明書です	よくある質問です
 ユーザーマニュアルです	なお、リングサービスは、病状や医療状態を診断、治療または予防するためのものではありません。 情報やサービスはあくまで参考にするものであり、健康専門家や医師のサービスに取って代わるものではありません。 医療状態に問題があれば専門家に相談することをお勧めします。  正しく身につけます。スマートリングの模式図、心拍灯の図に付きます	1.スマートリングです 2. ユーザーマニュアルです 3. マグネット線です  ①  ②  ③ ヒント:S版マッティング充電盒です	スペックパラメータ 1. 保存容量:毎日アプリに接続してデータを同期させることをお勧めします。同期は30日まで保存します。 2. 製品重量:約6.8グラムです。 3. 電池容量:18mAhポリマーリチウム電池です。 4 バッテリーの使用時間:使用頻度によりですが、3〜5日 5 ブルートゥースバージョン:BLE5.1です 6 ブルートゥースの範囲は3〜5メートルです 7 防水レベル:IP68です。	1.アプリをダウンロードします Google playやStoreでEcTriを検索し、アプリをダウンロードします。その後アプリにBluetooth接続権限と位置情報権限を取得させます。 下のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードします  	2.充電活性化です • 初めてご使用する場合は、デバイスを充電して起動してください。 • アプリ上で設定を元に戻した場合は、充電して再起動します。 1. リング充電: 対応する充電ケーブルを使用してリングと充電器を接続します。 2. 電源を入れると、リングインジケータは赤いランプで常点灯されます。 3. 表示ランプの点灯は、充電中、赤ランプが点灯・充電完了・青ランプが点灯です。 4. 充電時間:約60分 5. 電力チェック: デバイスとAPP間の接続のデバイス接続のバッテリーチェックです。  充電器充電です 磁気ケーブルによる充電です ヒント:バージョン5は充電ボックスと一致します	3.アプリの操作説明書です デバイスを起動したら、アプリ「EcTri」とペアリングして、操作と使用ができます。 アプリは4つのページで構成されています。 1. 設備画面です。1. トップページで健康データ、運動記録を見ます。睡眠、血中酸素、女性の健康などのデータです 2. スポーツページには様々なエクササイズモードがあります。お好きなエクササイズを選択いただけますトレーニングを行います。 3. デバイスZのページは、デバイスのリンク、健康の設定を参照しますデバイスの設定、リモコン撮影などです。 4. 私のページは個人の健康を管理、アカウントの管理をします携帯電話番号の紐付けなどの機能を設定します。 	よくある質問です 1. Bluetooth接続できません アプリの権限が適切に設定されていることを確認してください。Bluetoothの権限と位置特定権限を有効にします。 2. 不正確なデータ 指輪が正しく装着されていない時、または低充電の場合、Bluetooth接続できません。指輪を充電してください。 3. リングがすでにバインドされています リングはユニークなIDを持っており、新しいリングをバインドするには、既存のリングをバインドしたAPPアカウントからアンバインドする必要があります。 4. 指輪はすでにバインドされています 指輪は独自のBluetoothアドレスを持っています。新しいアプリのアカウントを紐付けする必要がある場合は、指輪と紐付けしたアプリのアカウントをアンバインドしてください。アプリはアカウントを忘れた場合は、メーカーに連絡して対応してください。 5. 充電できません 指輪は独自のBluetoothアドレスを持っています。新しいアプリのアカウントを紐付けする必要がある場合は、指輪と紐付けしたアプリのアカウントをアンバインドしてください。アプリはアカウントを忘れた場合は、メーカーに連絡して対応してください。 6. 指輪が壊れています 指輪は独自のBluetoothアドレスを持っています。新しいアプリのアカウントを紐付けする必要がある場合は、指輪と紐付けしたアプリのアカウントをアンバインドしてください。アプリはアカウントを忘れた場合は、メーカーに連絡して対応してください。 7. 指輪が壊れています 指輪は独自のBluetoothアドレスを持っています。新しいアプリのアカウントを紐付けする必要がある場合は、指輪と紐付けしたアプリのアカウントをアンバインドしてください。アプリはアカウントを忘れた場合は、メーカーに連絡して対応してください。

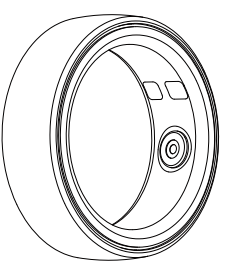
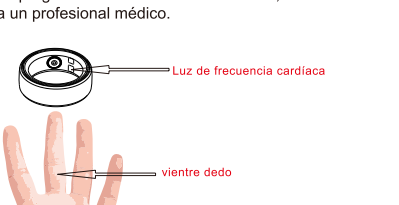
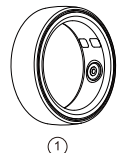
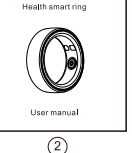
徳語

Smart-Ring	Produkteinführung	Verpackungsanweisungen	Spezifikationsparameter	Benutzerhandbuch	Ladeaktivierung	App-Bedienungsanleitung	Konventionelle Probleme
 Benutzerhandbuch	Bitte beachten Sie: Der Ringservice dient nicht der Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Beschwerden. Die Informationen und Daten im Service dienen nur als Referenz und ersetzen nicht die Dienste eines medizinischen Fachpersonals oder Arztes. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Gesundheitszustand haben, sollten Sie einen Arzt konsultieren.  Richtiges Tragediagramm Richten Sie beim Tragen das Herzfrequenzlicht auf den Bauch Ihres Fingers. Richtiges Tragediagramm	1.Smart-Ring 2. Benutzerhandbuch 3.Magnetisches Ladegerät  ①  ②  ③ Tipp: Nur die S-Version wird mit einem Ladegerät geladen.	Specification parameter 1. Speicherkapazität: Es wird empfohlen, die APP täglich zu verbinden und Daten zu synchronisieren. Der Ring kann je nach Art und Häufigkeit der Nutzung höchstens 30 Tage an Daten speichern. 2. Produktgewicht: ca. 6,8 g 3. Batteriekapazität: 18 mAh Polymer-Lithium-Batterie 4. Arbeitszeit: 3-5 Tage, abhängig von der Häufigkeit der Anwendung 5. Bluetooth-Version: BLE 5.1 6. Bluetooth-Reichweite: 3-5 Tage 7. Wasserdichtigkeit: IP68	1.Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „ECTRI“, um die APP herunterzuladen, oder scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die APP herunterzuladen. Bitte erlauben Sie der App, eine Bluetooth-Verbindungsanfrage und Standortberechtigung zu erhalten. Ladeaktivierung zu erhalten.  	2.Ladeaktivierung • Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, laden Sie es auf und aktivieren Sie es. • Wenn die Werkeinstellungen der App wiederhergestellt werden, laden Sie sie bitte auf und aktivieren Sie sie erneut. 1. Aufladen des Rings: Verwenden Sie das passende Ladekabel, um Ring und Ladegerät zu verbinden. 2. Nach dem Einschalten leuchtet die Ringanzeige immer rot. 3. Laden: Das rote Licht leuchtet; Ladevorgang abgeschlossen: Das grüne Licht leuchtet. 4. Ladezeit: 60 Minuten 5. Stromprüfung: Überprüfen Sie die Stromversorgung auf der Geräteverbindungseite in der App.  Ladekoffer Magnetisches Aufladen per Kabel Tipp: Nur die S-Version wird mit einem Ladegerät geladen.	3. App-Bedienungsanleitung Nachdem das Gerät aktiviert wurde, koppeln Sie es mit der APP "ECTRI", um die Bedienung und Verwendung zu vereinfachen. Die APP besteht aus vier Seiten: Startseite/Sport/Ausrüstungen. 1. Startseite zum Anzeigen von Gesundheitsdaten, Sportaufzeichnungen, Schlafdaten, Blutsauerstoff, Frauengesundheit usw. 2. Die Sportseite bietet eine Vielzahl von Sportmodi. Sie können Ihren bevorzugten Trainingsmodus auswählen und trainieren. 3. Die Ausrüstungsseite zum Überprüfen der Geräteverbindung, der Gesundheitseinstellungen, der Fernsteuerungsfunktionen, der Fernsteuerungsfunktionen usw. 4. Meine Seite zum Anzeigen persönlicher Informationen, Kontrollerwartung, Binden der Mobiltelefonnummer und anderer Funktionseinstellungen. 	Konventionelle Probleme 1.Es kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden Bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Berechtigung und die Standortberechtigung der APP aktiviert sind. Wenn der Ring keinen oder geringen Strom hat, kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden. Bitte laden Sie den Ring auf. 2. Ungenauere Daten Bitte tragen Sie den Ring richtig. Der Innenring-Erkennungssensor steht in engem Kontakt mit der Haut des Fingersbauchs. 3. Der Ring ist gebunden Der Ring hat eine eindeutige ID. Wenn Sie ein neues APP-Konto binden müssen, lösen Sie bitte die Bindung des Rings mit dem gebundenen APP-Konto. Wenn Sie das APP-Konto vergessen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Ausnahmevorschrift 1. Normaler Verschleiß, einschließlich Kratzer und Dellen. 2. Das Produkt enthält Verbrauchsmaterialien, wie z. B. Batterien. 3. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen. 4. Produktschäden, die durch höhere Gewalt wie Feuer, Überspannung usw. verursacht wurden. 5. Schäden, die durch unethische Manipulation oder Veränderung des Produkts verursacht wurden.

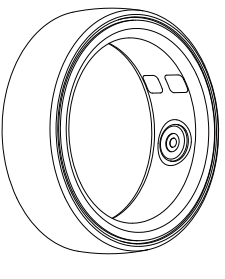
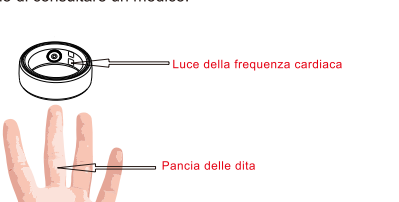
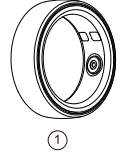
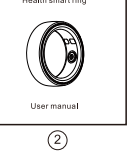
法语

Bague Intelligente	Présentation du produit	Instructions d'emballage	Paramètre de spécification	Mode d'emploi	Activation de la charge	Instructions d'utilisation de l'application	Problèmes conventionnels
 Manuel de l'Utilisateur	Veuillez noter : le service de bague n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter ou prévenir une maladie ou un problème de santé. Les informations et données contenues dans le service sont à titre indicatif uniquement et ne remplacent pas les services d'un professionnel de la santé ou d'un médecin. Si vous avez des questions sur votre état de santé, il vous est conseillé de consulter un professionnel de la santé.  Lumière de fréquence cardiaque Doigt Ventre Diagramme de port correct Lorsque vous le portez, dirigez le voyant de fréquence cardiaque vers le ventre de votre doigt.	1.Bague Intelligente 2.Manuel de l'Utilisateur 3.Chargeur magnétique  ①  ②  ③ Conseils : Seule la version S sera livrée avec un kit de chargement.	Paramètre de spécification 1.Capacité de stockage : Il est recommandé de connecter l'APP et de synchroniser les données tous les jours, et l'anneau peut stocker au maximum 30 jours de données, selon le type et la fréquence d'utilisation. 2.Poids du produit : environ 6,8 g 3.Capacité de la batterie : batterie au lithium polymère 18 mAh 4.Temps de travail : 3 à 5 jours, selon la fréquence d'utilisation 5.Version Bluetooth : BLE 5.1 6.Portée Bluetooth : 3 à 5 jours 7.Niveau d'étanchéité : IP68	1.Mode d'emploi Recherchez « ECTRI » dans l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application, ou scannez le code QR sur le côté droit pour télécharger l'application. Veuillez autoriser l'application à obtenir l'autorisation de connexion Bluetooth et l'autorisation de localisation.  	2.Activation de la charge • Lors de la première utilisation de l'appareil, chargez et activez l'appareil. • Si les paramètres d'usine sont restaurés sur l'application, veuillez la charger à nouveau. 1.Chargement de l'anneau : utilisez le câble de chargement correspondant pour connecter l'anneau et le chargeur. 2. Après la mise sous tension, le voyant annulaire est toujours rouge. 3. Chargement : le voyant rouge est allumé ; charge terminée : le voyant vert est allumé. 4. Temps de charge : 60 minutes 5. Vérification de l'alimentation : vérifiez l'alimentation sur la page de connexion de l'appareil sur l'application.  État de chargement Chargement par câble magnétique Conseils : Seule la version S sera livrée avec un kit de chargement.	3. Instructions d'utilisation de l'application Une fois l'appareil activé, associez-le à l'application « ECTRI » pour une utilisation et une utilisation faciles. L'APP se compose de quatre pages, qui sont : 1. Page d'accueil pour afficher les données de santé, les records sportifs, les données de sommeil, l'oxygène dans le sang, la santé des femmes, etc. 2. La page Sports propose une variété de modes sportifs. Vous pouvez choisir votre mode d'exercice préféré et faire de l'exercice. 3. Page de l'appareil pour vérifier la connexion de l'appareil, les paramètres de santé, les paramètres de l'équipement, la photographie télécommande, etc. 4. Page Mine pour afficher les informations personnelles, la gestion du compte, le numéro de téléphone mobile et d'autres paramètres de fonctions. 	Problèmes conventionnels 1.Impossible de se connecter via Bluetooth Veuillez vous assurer que l'autorisation Bluetooth et l'autorisation de positionnement de l'APP ont été activées. Lorsque l'anneau n'est pas alimenté ou est faible, la connexion Bluetooth ne peut pas être établie. Veuillez charger la bague. 2.Données inexacts Veuillez porter la bague correctement. Le capteur de détection de l'anneau intérieur est en contact direct avec la peau du ventre du doigt. 3.L'anneau a été lié La bague a un identifiant unique. Si vous devez lier un nouveau compte APP, veuillez dissocier l'anneau avec le compte APP. Si vous oubliez le compte APP, veuillez contacter le fabricant. Ordonnance d'exécution 1. Usage normal, y compris rayures et bosses. 2. Le produit contient des pièces de rechange consommables, telles que des piles. 3. Dommages causés par le non-respect des instructions. 4. Dommages au produit causés par un cas de force majeure, tel qu'un incendie, une inondation, etc. 5. Dommages causés par une altération ou une altération non autorisée du produit.

西

Anillo Inteligente	Introducción del producto	Instrucciones de embalaje	Paramètre de spécification	Guía del usuario	Activación de carga	Instrucciones de funcionamiento de la aplicación	Problemas convencionales
 Manual de usuario	Tenga en cuenta: El servicio de anillo no está destinado a diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad o condición médica. La información y los datos del servicio son solo de referencia y no reemplazan los servicios de un profesional de la salud o médico. Si tiene alguna pregunta sobre su condición médica, se recomienda consultar a un profesional médico.  Luz de frecuencia cardíaca Ventre dedo Diagrama de uso correcto Cuando lo use, apunte la luz de frecuencia cardíaca al vientre de su dedo.	1.Anillo inteligente 2.Manual de usuario 3.Cargador magnético  ①  ②  ③ Consejos: Solo la versión S vendrá con un estuche de carga.	Paramètre de spécification 1.Capacité de stockage : Il est recommandé de connecter l'APP et de synchroniser les données tous les jours, et l'anneau peut stocker au maximum 30 jours de données, selon le type et la fréquence d'utilisation. 2.Poids du produit : environ 6,8 g 3.Capacité de la batterie : batterie au lithium polymère 18 mAh 4. Temps de travail : 3 à 5 jours, selon la fréquence d'utilisation 5. Version Bluetooth : BLE 5.1 6. Portée Bluetooth : 3 à 5 jours 7. Niveau d'étanchéité : IP68	1. Guía del usuario Busque "ECTRI" en App Store o Google Play para descargar la APP o escanee el código QR en el lado derecho para descargar la APLICACIÓN. Permítale que la aplicación obtenga permiso de conexión Bluetooth y permiso de ubicación.  	2.Activación de carga • Cuando utilice el dispositivo por primera vez, cárguelo y actívalo. • Si se restauran los ajustes de fábrica en la aplicación, cárguelo y vuelva a activarlo. 1. Carga del anillo: utilice el cable de carga correspondiente para conectar el anillo y el cargador. 2. Después de encender la alimentación, la luz indicadora del anillo siempre está roja. 3. Cargando: la luz roja está encendida; carga completada: La luz verde está encendida. 4. Tiempo de carga: 60 minutos 5. Comprobación de energía: verifique la energía en la página de conexión del dispositivo en la aplicación.  Estuche de carga Carga por cable magnético Consejos: Solo la versión S vendrá con un estuche de carga.	3. Instrucciones de funcionamiento de la aplicación Después de activar el dispositivo, emparejelo con la APLICACIÓN "ECTRI" para una fácil operación y uso. La APP consta de cuatro páginas, las cuales son: Página de inicio/Deportes/Equipo/Mine. 1. Página de inicio para ver datos de salud, registros deportivos, datos de sueño, oxígeno en sangre, salud de la mujer, etc. 2. La página de deportes tiene una variedad de modos deportivos. Puede elegir su modo de ejercicio favorito y hacer algo de ejercicio. 3. Página del dispositivo para verificar la conexión del dispositivo, la configuración de salud, la configuración del equipo, la fotografía de control remoto, etc. 4. Mi página para ver información personal, administración de cuentas, vincular el número de teléfono móvil y otras configuraciones de funciones. 	Problemas convencionales 1.No se puede conectar por Bluetooth Asegúrese de que el permiso de Bluetooth y el permiso de posicionamiento de la aplicación estén autorizados. Cuando el anillo no tiene energía o tiene poca energía, no se puede establecer la conexión Bluetooth. Por favor, cargue el anillo. 2.Datos incorrectos Por favor use el anillo correctamente. El sensor de detección del anillo interior está en estrecho contacto con la piel del vientre del dedo. 3.El anillo ha sido ligado El anillo tiene una identificación única. Si necesita vincular una nueva cuenta de APP, desvincule el anillo con la cuenta de APP vinculada. Si olvida la cuenta de la aplicación, comuníquese con el fabricante. Ordenanza de ejecución 1. Usos normales de uso, incluidos rayones y abolladuras. 2. El producto contiene repuestos consumibles, como baterías. 3. Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones. 4. Daños al producto causados por fuerza mayor, como incendio, inundación, etc. 5. Daños causados por manipulación o alteración no autorizada del producto.

意

Anello Intelligente	Introduzione al prodotto	Istruzioni per l'imballaggio	Parametro di specifica	Guida utente	Attivazione della ricarica	Istruzioni per l'uso dell'app	Problemi convenzionali
 Anuale d'uso	Nota: Il servizio di chiamata non è destinato a diagnosticare, trattare o prevenire alcuna malattia o condizione medica. Le informazioni e i dati contenuti nel servizio sono solo di riferimento e non sostituiscono i servizi di un operatore sanitario o di un medico. Se hai domande sulla tua condizione medica, ti consigliamo di consultare un medico.  Luce della frequenza cardiaca Punta della dita Schema di indossamento corretto Quando lo indosi, punta la spia della frequenza cardiaca verso il ventre del dito.	1. Anello intelligente 2. Manuale d'uso 3. Caricatore magnetico  ①  ②  ③ Suggerimenti: solo la versione S verrà fornita con una custodia di ricarica.	Parametro di specifica 1. Capacità di archiviazione: si consiglia di collegare l'APP e sincronizzare i dati ogni giorno e l'anello può archiviare al massimo 30 giorni di dati, a seconda del tipo e della frequenza di utilizzo. 2. Peso del prodotto: circa 6,8 g 3. Capacità della batteria: batteria al litio polimerica da 18 mAh 4. Orario di lavoro: 3-5 giorni, a seconda della frequenza di utilizzo 5. Versione Bluetooth: BLE 5.1 6. Portata Bluetooth: 3-5 giorni 7. Livello di impermeabilità: IP68	1. Guida dell'utente Cerca "ECTRI" nell'App Store o in Google Play per scaricare l'APP o scansiona il codice QR sul lato destro per scaricare l'APP. Consenti all'app di ottenere l'autorizzazione per la connessione Bluetooth e l'autorizzazione alla posizione.  	2. Attivazione di carica • Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, caricare e attivare il dispositivo. • Se le impostazioni di fabbrica vengono ripristinate sull'app, caricarlo e riattivarlo. 1. Ricarica dell'anello: utilizzare il cavo di ricarica corrispondente per collegare l'anello e il caricabatterie. 2. Dopo l'accensione, la spia dell'anello è sempre rossa. 3. In carica: la luce rossa è accesa; l'indicazione completa: la luce verde è accesa. 4. Tempo di ricarica: 60 minuti 5. Controllo dell'alimentazione: controllare l'alimentazione nella pagina di connessione del dispositivo sull'app.  Custodia di ricarica Ricarica tramite cavo magnetico Suggerimenti: solo la versione S verrà fornita con una custodia di ricarica.	3. Istruzioni per l'uso dell'app Dopo aver attivato il dispositivo, abbinarlo all'APP "ECTRI" per un facile utilizzo e funzionamento. L'APP è composta da quattro pagine, che sono: Home page/Sport/Struttura/Mine. 1. Home page per visualizzare dati sanitari, record sportivi, dati sul sonno, ossigeno nel sangue, salute delle donne, ecc. 2. La pagina Sport dispone di diverse modalità sportive. Puoi scegliere la modalità di allenamento preferita e fare esercizio. 3. Pagina del dispositivo per controllare la connessione del dispositivo, le impostazioni sanitarie, l'impostazione dell'apparecchiatura, la fotografia del telecomando, ecc. 4. La mia pagina per visualizzare informazioni personali, gestione dell'account, associare il numero di cellulare e altre impostazioni delle funzioni. 	Problemi convenzionali 1. Impossibile connettersi tramite Bluetooth Assicurarsi che l'autorizzazione Bluetooth e l'autorizzazione di posizionamento dell'APP siano state attivate. Quando l'anello non è alimentato o ha poca alimentazione, non è possibile stabilire la connessione Bluetooth. Per favore carica l'anello. 2. Dati imprecisi Si prega di indossare l'anello correttamente. Il sensore di rilevamento dell'anello interno è a stretto contatto con la pelle del dito. 3. L'anello è stato legato L'anello ha un ID univoco. Se è necessario associare un nuovo account APP, svincola l'anello con l'account APP associato. Se dimentichi l'account APP, contatta il produttore. Ordinanza di esecuzione 1. Normale usura, inclusi graffi e ammaccature. 2. Il prodotto contiene parti di ricambio consumabili, come le batterie. 3. Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni. 4. Danni al prodotto causati da forza maggiore, come incendi, inondazioni, ecc. 5. Danni causati da manomissioni o alterazioni non autorizzate del prodotto.

FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.