

スマートウォッチタイプガイド

コポーネントの紹介

可変電圧輸出 / 温度センサー

LEDインジケータディスプレイ

センサー

ボタン / 液晶ディスプレイ

充電コネクタ

フレキシブル電源ケーブルを接続すると起動できます。

充電方法と活用法

初めて使用前に充電してアクティベートしてください。
充電前に端子の汚れを除去し、接触不良を防止します。

Bluetooth APP のインストール

方法1: 右側のQRコードをスキャンし、「[G]Band」
ダウンロードしてインストールします。
方法2: Android ユーザーは事前にGoogle Playストア
または「[G]Bandストア」で「[G]Band」を探索してダウ
ンロード / インストールします。iOSユーザーは
App Store で「[G]Band」を探索してダウンロード
/ インストールします。

注: APPのインストール中に、携帯電話の通知欄で警告表
示された場合は、「[許可]」をタップして確認してください。

デバイス要件
IOS 13.0以上
Android 8.0以上で、Bluetooth 5.3以上をサポート

17

通知とアラート	
シナリオ	アラート内容
起動	振動・緑色のランプ3回点滅
Bluetooth 接続成功	赤・緑のライトが交互に点滅した後（赤・緑の点滅は Bluetooth 接続完了を示す）
Bluetooth 接続成功	1回振動、インテリジェントライトが実行（デフォルトでは点滅しない）
メッセージアラート	5回振動・緑色のランプ3回点滅、応答までの切替時間（振動とランプが点滅する）
モーションアラート	1回振動・緑色のランプ3回点滅
機械テスト	アメリカから機械テストに起動するとランプが緑色の点滅（赤・緑が交互に点滅点滅）。テスト完了で点滅し続ける
充電	充電中に赤いライトが連続点滅、満充電時は緑のライトが連続点滅
シャットダウン	ボタンを押す、またはアプリ上で「デバイス」→「Bluetooth」を画面上でタップ

主要機能

歩数計 / 距離 / カロリー

心拍数と心拍変動と心拍の拍動、移動距離、消費カロリーを確認できます。

心拍数

アメリカ健康キーム画面から心拍数測定に切り、「【クック測定】」をタップするとリアルタイム心拍数測定が開始します。

通知とアラート

血圧値
 アプティ健康モニタ画面から血圧値を測定し、【タイプ固定】
 をタップすると【タイプA】値設定が記録します。

ECG（心電図）
 アプティ健康モニタ右下の十字アイコンをタップ、【心電図】
 を選択し、測定開始すると、心電図が記録されます。
 ※心電図が正常な心電図と判定された場合にのみ、測定
 終了画面と血圧値と測定した心電図を一緒にアップ
 ロードできます。測定し終わると【タイプA】画面でのみ
 閲覧可能です。

注：測定結果は参考用のみの、医療データとして使用
 できません。

睡眠モニタリング
 アプティ健康モニタ右下の十字アイコンをタップ、睡眠測定
 を選択し、測定開始すると、深い睡眠・浅い睡眠・醒
 醒時間・浅い睡眠時間・深い睡眠時間・浅い睡眠時間と
 睡眠の質を測定し、測定結果を【タイプA】画面で確認
 できます。

備考：睡眠時に呼吸が不安定になると呼吸データは記録されません。

体温値
 アプティ健康モニタ右下の十字アイコンをタップ、【体温値】
 を選択し、測定開始すると、ラップトップ温度感測器に温度
 を感知し、体温値を測定し、測定結果を【タイプA】画面
 上で確認できます。レポートは【タイプA】で確認
 できます。

注：測定結果は参考用のみの、医療データとして使用
 できません。

体温
 APPのヘルスホームページの体温測定セクションに移動し、(クイック測定)をクリックしてアルタメータ体温測定モードを起動します。
 ※注: 夜間測定(夜間体温測定)を行うことをお勧めします。
 ※体温: 1度は正確に測定されたらさらに測定を行います。1度目の測定は、健康状態のみのためです。再度の測定は正確な健康状態の測定と医師の診断に準じます。

スポーツモード
 APPに接続すると複数のスポーツモードを利用できます。
 G band APPのGPSと歩数計機能を自動的に開始します。
 ※GPS: デバイスのGPSと歩数計機能を自動的に開始します。
 ※スポーツモード: APPから一時停止した後に続行を操作できます。

接続パラメータ
 最新バージョンのBluetooth接続 入力力: 500mA-2A
 両側面ケーブルが必要Android 8.0またはiOS 13.0以上

注意事項

1. 充電電圧が5V以上、充電電流が1A以上、充電時間が2〜3時間かかる場合があります。
2. 水濡れがある状態での充電は禁止されています。
3. 本製品のケーブルを勝手に取り外さないでください。製品が破損し、保証が受けられない場合があります。

20

デバイスメンテナンス


プレストリートのメンテナンス時には、以下のヒントを記憶してください。

- 1. フォトリソを定期的に清掃し、特に内側の汚れを除去して層の腐食をします。
- 2. フォトリソの寿命を最大限に延ばすのに空気の流れを確保し、装置内に灰尘に由来する不純物を発生させないでください。
- 3. 皮膚アレルギーや不快感が発生した場合は、すぐに装置を中止します。

特記事項

- 1. 本装置は医療機器ではありません。測定結果は参考値であり、他の医療機器と相関を示すものではありません。自己診断や治療のために検査結果を頼りにせず、主治医の指示に従ってください。
- 2. 本装置は、現在の病情に基づいて作成されていますが、継続的に改善・変更されるものです。当社は、本書に記載されている製品の仕様や内容の更新、および修正・改良を行う権利を有しています。

Manual Rápido de la Pulsera Inteligente
Introducción de Componentes

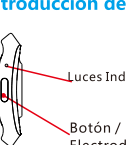

Conecte la pulsera al cargador magnético para encenderla.

Método de Carga y Activación

Cargue y active la pulsera antes del primer uso. Limpie los residuos de los contactos de carga antes de conectarla para evitar fallos de contacto.

Instalación de la APP de la Pulsera

Método 1: Escanee el código QR de la derecha para descargar e instalar "GBand".

Método 2: Para usuarios de Android, busque "GBand" en tiendas de aplicaciones principales en "Tienda Google Play". Para usuarios de iOS, busque "GBand" e instale "GBand" en la App Store.

Nota: Durante la instalación de la APP, cuando aparezcan las pantallas de gestión de permisos del teléfono, toque "Permitir" para conceder los permisos.

Requisitos del Dispositivo
iOS: Versión 13.0 o superior Android: Versión 8.0 o superior
Bluetooth: Versión 5.3 o superior

22

Notificaciones y Alertas	
Escenario	Alerta
Encendido	Vibración + luz verde parpadea 3 veces
Bluetooth Desconectado	Las luz verde verde permanece alternadamente de forma continua (el parpadeo rojo/verde indica desconexión de Bluetooth)
Bluetooth Conectado Correctamente	1 vibración, las luz verdes indicadoras dejan de encenderse (regreso al estado predeterminado)
Alerta de Llamada Entrante	5 vibraciones + luz verde parpadea 3 veces; la vibración y el indicador se detienen al contestar o colgar
Alerta de Mensaje	Una vibración + luz verde parpadea 3 veces
Prueba de Función	Al lanzar una prueba de funciones desde la App, los indicadores parpadearán sucesivamente (luz roja y verde alternan cíclicamente hasta finalizar la prueba)
Carga	La luz roja parpadea continuamente durante la carga; la luz verde permanece encendida continuamente cuando está completamente cargada
Apagado	Mantenga pulsado el botón para apagar; o abra la App y seleccione sucesivamente [Dispositivo] - [Otros]

Funciones Principales

Contador de Pasos/Distancia/Calorías
Al conectarse a la App puede consultar los pasos diarios recorridos, la distancia y las calorías consumidas.

Frecuencia Cardíaca
Acceda a la medición de frecuencia cardíaca en la página principal de salud de la App y pulse [Medición rápida] para iniciar la medición en tiempo real.

Saturación de Oxígeno
Acceda a la medición de oxígeno en sangre en la página principal de salud de la App y pulse [Medición rápida] para iniciar la medición en tiempo real.

ECG (Electrocardiograma)
En la página principal de salud de la App pulse el icono de cruz abajo a la derecha, seleccione [ECG] y pulse [Iniciar medición] para lanzar la prueba ECG.
Comience la medición cuando los indicadores de la disposición de los electrodos estén completamente adheridos firmemente al electrodo lateral y los dos electrodos trasera a la pierna durante la medición. El informe solo se puede consultar después de la medición.

Nota: Los resultados de la medición son solo para referencia y no pueden usarse como datos médicos.

Monitoreo de Sueño
Use el dispositivo para medir mientras duerme normalmente; analizará su calidad de sueño (sueño profundo, sueño ligero, duración total del sueño y otros datos importantes), toda la información se puede consultar en la App.

Nota: Solo se registrarán datos de sueño si lleva el reloj mientras duerme.

24

Composición Corporal

En la página principal de salud de la App pulse el icono de cruz abajo a la derecha, seleccione (Composición corporal) e inicie la medición. Cuando la App comience la prueba cuando los indicadores parpadene sucesivamente. Coloque firmemente el electrodo lateral y los dos electrodos traseros sobre la piel. El informe solo se visualiza en la App.

Nota: Los resultados de la medición son solo para referencia y no pueden usarse como datos médicos.

Temperatura Corporal

Acceda a la medición de temperatura en la página principal de salud de la App y pulse (Medir rápida) para activar la medición en tiempo real.

Nota: Se recomienda llevar el dispositivo durante 10 minutos antes de medir la temperatura. Las lecturas se ven afectadas por cambios de temperatura ambiental y solo sirven de ayuda sanitaria; el diagnóstico definitivo depende de equipos médicos profesionales y la valoración médica.

Modos Deportivos

Dispone de múltiples modos deportivos al conectarse a la App. Inicie el entrenamiento desde (Deporte del dispositivo) en la App. Gire la rueda de la pantalla automáticamente y puede pausar o finalizar el ejercicio desde la App.

Parámetros básicos

Modo de conexión: Conexión Bluetooth
Entrada: 5V 500mA - 2A
El teléfono debe ser compatible:
Android 8.0 o Android 13.0 o superior

Mantenimiento del Dispositivo

Al mantener su pulsera, recuerde los siguientes consejos:

1. Limpie la pulsera regularmente, especialmente la parte inferior, para evitar la acumulación de suciedad y el crecimiento de bacterias.
2. Ajuste la sujeción de la pulsera para garantizar la circulación del aire; no use una cantidad excesiva de producto de cuidado de la piel que pueda obstruir el sensor o el dispositivo.
3. Si ocurren alergias o molestias en la piel, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

Atención

1. Se prohíbe el uso de adaptadores con tensión de carga superior a 5V y corriente de carga superior a 2A, el tiempo de carga es de 2-3 horas.
2. No desmontar la carcasa del producto sin autorización, el producto se dañará y perderá el derecho a la garantía.
3. El participante prohibido realizar actividades acuáticas en aguas como el buceo, la natación y las piscinas costeras.

Notifications et Alertes	
Sénaire	Alerte
Allumage	Vibration + voyant vert clignote 3 fois.
Déconnexion Bluetooth	Les lumières rouges et vert clignotent alternativement en continu (le clignotement rouge/vert indique une déconnexion Bluetooth).
Connexion Bluetooth réussie	1 vibration, les lumières indiques s'éteignent (retour à l'état par défaut)
Alerte d'Appel Entrant	5 vibrations + voyant vert clignote 3 fois;
Alerte de Message	vibration et voyant s'arrêtent à la réponse ou au raccrochage
Test de Fonction	Une vibration + voyant vert clignote 3 fois
Chargement	Lors du lancement du test de fonctions, depuis l'application, les voyants clignotent séquentiellement (rouge et vert alternent séquentiellement jusqu'à la fin du test) La lumière rouge clignote en continu pendant le chargement ; la lumière verte reste allumée en continu lorsque la charge est complète
Eteignement	Appui long sur le bouton, ou ouvrir l'Applet et naviguez vers [Appareil] - [Autres]

Fréquence Cardiaque
Accédez à la mesure de fréquence cardiaque sur la page santé de l'appi, cliquez sur [Mesure rapide] pour lancer une détection en temps réel.

Saturation en Oxygène
Accédez à la mesure d'oxygène sanguin sur la page santé de l'appi, cliquez sur [Mesure rapide] pour lancer une détection en temps réel.

ECG (Électrocardiogramme)
Sur la page santé de l'appi, cliquez sur l'icône cœur en bas à droite, sélectionnez [ECG] et lancez la mesure. Débuter le test quand les voyants clignotent successivement. Appliquez fermement l'électrode latérale et les deux électrodes antérieures sur votre poeu. Le rapport de mesure n'est consultable que dans l'application.

Remarque : Les résultats de mesure sont uniquement indicatifs et ne remplacent pas les données médicales officielles.

Monture du Sommeil
Portez normalement le bracelet pendant votre sommeil ; il analyse votre qualité de sommeil (sommeil profond, sommeil léger, réveil nocturne, etc.) et autres données nocturnes, toutes les données se synchronisent avec l'appi.

Remarque : Les données de sommeil ne sont enregistrées que pour les porteurs du bracelet pendant votre sommeil.

Modes Sportifs
De nombreux modes sportifs sont accessibles après connexion à l'appi. Lancez l'entraînement via [Sport appareil] dans l'appi. Baissez automatiquement le bracelet, vous pouvez mettre en pause ou arrêter la séance depuis l'appi.

29

Composition Corpeille

Sur la page santé de l'appel cliquez sur l'icône croix en bas à droite, sélectionnez [Composition corpeille] et lancez la mesure. Commencez le test au clignotement séquentiel des électrodes. Appuyez fermement l'électrode latérale et les deux électrodes arrières sur la paroi latérale. Le test est accessible uniquement dans l'appel.

Remarque : Les résultats de mesure sont uniquement indicatifs et ne peuvent pas servir de données médicales officielles.

Température Corpeille

Accédez à la page de température sur la page santé de l'appel et cliquez sur [Mesure] pendant la lancer une détection en temps réel.

Remarque : Portez l'appareil pendant 10 minutes minimum avant la mesure. Les relevés sont influencés par les écarts de température ambiante et ne constituent qu'un appel sanitaire. Le diagnostic médical final est établi à l'aide d'appareils médicaux professionnels et d'un médecin.

Paramètres de base

Mode de connexion : Bluetooth
Tension : 5V / 2A
Exigences du Téléphone : Android 8.0 ou iOS 13.0 et versions ultérieures

Entretien du dispositif

Avant de l'entretien de votre montre connectée, rappelez-vous les conseils suivants :

1. Nettoyez la montre connectée régulièrement, en particulier sa face inférieure, pour éviter l'accumulation de saleté et la croissance de bactéries.

30

2. Ajustez l'ajustement de la montre connectée pour garantir la circulation de l'air; n'utilisez pas une quantité excessive de produits de soins de la peau sur le poignet pendant le port du dispositif.

3. En cas d'allergie ou de gêne cutanée, cessez immédiatement de porter le dispositif.

Attention à

1. Il est interdit d'utiliser un appareil avec une tension de charge supérieure à 35V ou un courant de charge supérieur à 2A, la durée de charge est de 2-3 heures.

2. Il est interdit de charger en présence d'eau.

3. Le boîtier de charge ne doit pas être retiré sans autorisation, le produit sera endommagé et ne sera pas éligible à la garantie.

4. Il est strictement interdit d'utiliser les activités nautiques dans les eaux telles que la plongée, la natation et la piscine.

Notes supplémentaires

1. ce produit n'est pas un dispositif médical; les résultats des mesures sont donnés à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinés à un usage ou une base médicale.

2. Les mesures de votre corps sont destinées à votre référence et ne vous fiez pas aux résultats des tests pour un auto-diagnostic ou un traitement.

3. La société s'assume le droit de modifier les spécifications et les fonctions des produits, ainsi que de modifier et d'améliorer tout produit décrit dans ce manuel.

31

Manuale Rapido del Bracciale Intelligente

Introduzione dei Componenti



The diagram illustrates the components of the smart wristband. On the left, a side view of the wristband shows the 'Pulsante / L'ucido laterale' (side button/lens) and 'Luci Inducibili LED' (LED lights). On the right, a cross-sectional view of the wristband shows internal components: 'Elettrodi Posteriori / Sensore di Temperatura' (posterior electrodes/temperature sensor), 'Sensor' (sensor), and 'Contatti di Carica' (charging contacts). A red arrow points from the side button/lens to the internal sensor area.

Contattare il bracciale al caricabatterie magnetico per accenderlo.

Metodo di Carica e Attivazione

Caricare e attivare il bracciale prima della prima utilizzo. Pulire ogni estranei dal contatto di ricarica prima della carica per evitare contatti difettosi.

Installazione dell'APP del Bracciale

Metodo 1: Scansionare il codice QR a destra per scaricare l'APP "Smart Bracelet" su Google Play Store.

Metodo 2: Per gli utenti Android, cercare e scaricare "iOS, ben" nei principali store di applicazioni su "Google Playstore". Per gli utenti iOS, cercare "scaricare e installare "G Band" nell'App Store".

Nota: Durante l'installazione dell'APP, quando appare le finestre di gestione dei permessi del telefono, premere "Consenti" per concedere i permessi.

Requisiti del Dispositivo

iOS: Versione 13.0 o superiore; Android: Versione 8.0 o superiore
Bluetooth: Versione 5.3 o superiore

32

Notifiche e Allarmi	
Scenario	Allarme
Accensione	Vibrazione + spia verde lampeggia 3 volte Le luci rosse e verde lampeggiano alternatamente continuamente (il colore lampeggia rosso/verde indica la disconnessione Bluetooth)
Disconnessione Bluetooth	1 vibrazione, le luci indicatrici si spengono (ritorno allo stato predefinito)
Connessione Bluetooth riuscita	5 vibrazioni + spia verde lampeggia 3 volte
Allarme per Chiamata in entrata	vibrazione + spia si interrompono alla risposta al chiamata
Allarme per Messaggio	Una singola vibrazione + spia verde lampeggia 3 volte
Test di Funzione	Avendo premuto il test funzioni dall'oppo, le spia lampeggiano sequenzialmente (rosso, le spia verde alternati ciclicamente fino al termine test)
Carica	La luce rossa lampeggia continuamente durante la carica; la carica verde rimane accesa continuamente quando la carica è completa
Segnamento	Pressione lunga sul pulsante, oppo apre app e selezionare [Dispositivo] - [Altro]

Fugimenti Principali

Correttore di Passi /Distanza/Calorie
 Connettersi all'APP per visualizzare il numero di passi del giorno corrente, la distanza percorsa e le calorie bruciate.

Frequenza Cardica

Accedere alla misurazione frequenza cardiaca nella pagina sull'app, cliccare [Misurazione rapida] per avviare rilevazione in tempo reale.

Saturazione di Ossigeno

Accedere alla misurazione ossigeno sanguigno nella pagina sull'app, cliccare [Misurazione rapida] per avviare rilevazione in tempo reale.

ECG

Nella pagina sulla app cliccare l'icona cuore in basso a destra, selezionare [ECG] e avviare misurazione. Iniziare la prova quando le spire lampeggiano sequenzialmente. Premere saldamente l'elettrodo laterale e i due elettrodi posteriori sulla pelle. Il report è consultabile solo all'interno dell'applicazione.

Nota: I risultati della misurazione sono solo a scopo informativo e non possono essere utilizzati come dati medici.

Composizione Corporea

Nella pagina sulla app cliccare l'icona cuore in basso a destra, selezionare [Composizione corporea] e avviare misurazione. Iniziare la prova al lampeggiamento sequenziale delle spire. Premere saldamente l'elettrodo laterale e i due elettrodi posteriori sulla pelle. Il report è visibile solo nell'app.

Nota: I risultati della misurazione sono solo a scopo informativo e non possono essere utilizzati come dati medici.



34

Sonno

Indagare regolarmente il dispositivo durante il sonno: analizzarlo ogni giorno (non solo profondo, sonno leggero, durata totale e altre fasi del notturni), tutti i dati si sincronizzano con l'app. **Nota:** i dati sul sonno vengono memorizzati solo se si indossa il braccialetto dormendo.

Temperatura Corporea

Accedere alla misurazione temperatura nella pagina salute dell'app e cliccare [Misurazione rapida] per avviare rilevazione in tempo reale.

Nota: Si consiglia di misurare il dispositivo per 10 minuti prima della misurazione. Le letture sono influenzate dalle variazioni di temperatura ambientale e servono solo da avviso sanitario. I risultati sono definitivi a cura di medico e apparecchiature mediche professionali.

Modalità Sportive

Dopo connessione all'app sono disponibili diverse modalità sportive. Avviare l'allenamento tramite [Sport] dispositivo nell'app. Il G-Band: connesso automaticamente, è possibile mettere in pausa o terminare l'Esercizio dall'app.

Parametri Base

Metodo di Connessione: Bluetooth
Ingresso: 5V 300mA
Requisiti del Sistema: Android 8.0 o iOS 13.0 e versioni successive

Mantenimento del Dispositivo

Durante la manutenzione del bracciale, ricordarsi i seguenti suggerimenti:

1. Pulire il bracciale regolarmente, in particolare la sua parte interna, per evitare l'accumulo di sporcizia e la crescita di batteri.
2. Regolare il tirante del bracciale per garantire la circolazione dell'aria; non utilizzare una quantità eccessiva di prodotti per il cuidado della pelle sul polso durante l'uso del dispositivo.
3. In caso di allergie cutanee o disordine, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.

Note Speciali


1. Questo prodotto non è un dispositivo medico, i risultati della misurazione sono solo per riferimento e non sono utilizzati come base per qualsiasi uso medico. Si prega di consultare le leggi del proprio paese per le norme auto-diagnostiche e trattamenti i risultati di questo test.

Questo manuale è basato sulle informazioni disponibili e, in linea con il principio di miglioramento continuo e sviluppo, la Società si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e alle funzioni del prodotto, nonché di apportare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente manuale.

36

手环快说明

部件介绍

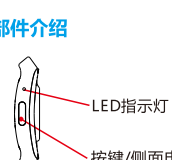

LED指示灯

背面电极/温度传感器

按键/侧面电极

充电触点

手环连接磁吸充电槽即可充电

充电方法及激活

首次使用手环前，需进行充电激活，充电前需清理触点异物，避免接触不良。

安装手环APP

方法一：扫描右侧二维码下载并安装“G Band”，为手环一、安卓手机用户请进入各大应用市场或应用商店搜索下载并安装“G Band”，苹果手机用户进入 App Store 搜索并安装“G Band”



方法二：安装APP时，手机各应用商店弹出提示后，点击“安装”按钮。

温馨提示：

- iOS 13.0 及以上；
- Android 8.0 及以上；
- 支持蓝牙 5.0 及以上。

37

通知与提醒	
场景	提醒
开机	震动、绿灯闪烁三次
未连接蓝牙	红、绿灯依次持续闪烁（红、绿灯闪烁表示蓝牙断开）
蓝牙连接成功	绿灯一闪、指示灯停止闪烁（指示灯恢复默认状态）
来电提醒	震动五次、绿灯闪烁三次，接听/拒接前和指示灯停止闪烁
消息提醒	震动一次、绿灯闪烁三次
功能提醒	App消息提醒时，指示灯依次闪烁 红、绿灯依次持续闪烁，直至消息读完
充电	绿灯闪烁红灯持续闪烁，电量充满时持续亮绿灯
关机	长按电源键关机进入APP页面点击-「设备」-「其他」

主要功能

步骤/距离/卡路里

长按App可查看当日行走步数、距离及消耗的卡路里。

心率

长按心率主页进入心率测试，点击【快速测速】即可发起心率实时检测。

血氧

长按血氧主页进入血氧测试，点击【快速测速】可发起血氧实时检测。

18

心电图

App 屏幕左上角点击右下角十字符号，选择【心电图】点击并左滑屏幕，即可启动心电图检测页面，当设备佩戴在您左胸前时开始测试。测试时，将设备侧面电极及背面的电极与皮肤良好接触。进行测试，测试结果将呈现在 App 中查看。

1. 测试结果仅供参考，不能作为医疗诊断依据

睡眠

睡眠期间正常穿戴设备，设备会自动分析您的睡眠质量。（当您佩戴设备入睡时，设备会自动开始睡眠测试，直至早上醒来 App 上：仅佩戴手表入睡，才会记录睡眠数据）

身体成分

App 屏幕左上角点击右下角十字符号，选择【身体成分】点击并左滑屏幕，即可启动身体成分检测页面，当您将设备佩戴在您左胸前时开始测试。测试时，请将设备侧面电极及背面的电极与皮肤良好接触。进行测试，测试结果将呈现在 App 中查看。

1. 测试结果仅供参考，不能作为医疗诊断依据

体温

体温是人体健康状况检测点，通过【快速测温】可实时检测体温变化。建议佩戴设备 10 分钟后，体温数据会更加准确。环境温度会影响体温测量，仅能参考使用，并非临床医疗设备及专业医疗诊断。

运动

App 支持多种运动模式，在 8 Gang App 内选择【设备运动】项启动，运动过程中实时记录，运动中运动数据 App 实时保存。结束。

30

基本参数

连接方式：蓝牙连接 输入：5V、500mA-2A
手机兼容：Android 8.0以上 IOS 13.0以上（以上版本）

使用说明

1. 请仔细阅读说明书，请认真阅读以下事项：
1.1 请正确洗手消毒，特别是手机内部时，以免病毒污染、滋生细菌。
1.2 选择手机安心消毒，能确保安全消毒，佩戴时手机不宜使用过长时间。
1.3 如出现皮肤过敏或不适情况，请停止消毒。

特别注明

1. 禁止使用电压高于5V，电流电压大于2A的充电器，充电时禁止3-4小时。
2. 禁止在不工作的情况下充电。
3. 手机可拆卸本产品外部的产品，产品拆卸开去不得损坏。
4. 如物品在通过高温过程后放置设备及配件，否则可能损坏设备故障。
5. 避免造成财产损失。
6. 使用设备时请确保安全，避免受到强烈冲击或震动，以免损坏设备及影响设备使用寿命。

特别注明

1. 本产品非医学设备，不能就此提供诊断，不作为任何医疗用途及诊断，请遵医嘱使用，不可因此延误病情、耽误诊断和治疗。
2. 本产品为预防性使用，不能代替检测，持续使用检测。
3. 公司产品研发和产品功效均能最大限度的便利，及对本产品研发的知识产权进行有效保护和收取收益。

常见问题

1. 为何手环充电时无反应？
使用一块新的手环在充电触点有脏污，充电触点需清洁干净完整，进而充满电正常使用。

2. 手环为什么没有消息推送？
关闭消息推送的基本要素：

- ①. 确保 iG Band 处于运行状态并与设备连接。
- ②. 确保 iG Band 已设置自动启动权限。
- ③. 确保 i 手机客户消息是开启了消息推送开关，手环消息提醒是通过读取手机通知栏信息来进行推送；若手机通知栏没有消息显示，手环将无法接收提醒。

④. 打开 iG Band - ① 设置 - 消息推送 中打开并需推送消息的开关。

⑤. 尝试重启手机，重新连接设备。