

leep


RING 1

EN: QUICK START GUIDE

FR: GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

DE: SCHNELLSTARTANLEITUNG

JA: クイックスタートガイド

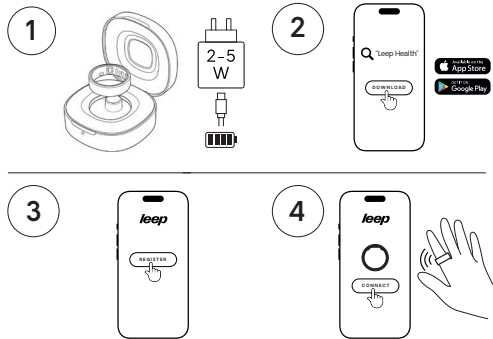

LEEP RING 1 PRODUCT INFORMATION

Thanks for choosing Leep Ring 1! Please read the user manual and safety instructions to get the most out of your new smart ring.

- OPERATING TEMPERATURE RANGE: -20 – 50°C / 4–122°F
- BATTERY TYPE: Rechargeable Lithium-Ion
- BATTERY LIFE: 10 days (battery life may vary due to usage)
- CHARGING TIME: 1.5 hours (ring)
- CHARGING TIME: 2.5 hours (case)
- CHARGING TEMPERATURE: min 0°C / 32°F - max 45°C / 113°F
- BATTERY CAPACITY: 16mAh, 0.06272Wh (ring)
- BATTERY CAPACITY: 500 mAh, 1.85Wh (case)
- INPUT: 5V/1A, OUTPUT: 5V/16mA
- BLUETOOTH VERSION: 5.0
- BLUETOOTH RANGE: ≤10 m
- RF INTERFACE FREQUENCY RANGE: 2402-2480 MHz

GENERAL INFORMATION

Product: Leep Smart Ring

Brand: Leep

Model number: Leep Ring 1

Manufacturer: Leep Health Ltd., 71-75 Shelton Street,
Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ

Website: www.leephealth.com

Email: support@leephealth.com

EN

LEEP RING 1 USAGE

Leep Ring 1 is designed for your everyday activities. Leep Ring 1 is water resistant (IP68) up to 50m / 164ft.

We recommend cleaning the ring regularly and keep it dry, to ensure good functionality of the ring and to reduce potential skin irritation. You can use a damp cloth to wipe the ring. Please ensure that the ring is fully dry before using it again.

Leep Ring 1 charging case is not water resistant. Do not use or store the charging case in humid environments like a bathroom for longer periods.

The Leep Ring 1 may get scratched in regular use and may in direct contact with softer materials (metal, jewelry or other objects) cause scratches itself if it gets in close contact.

The light-emitting diodes (LED) in the product are in the visible color range. They are safe for the person wearing the product and other people around.

LEEP APP

The Leep App is available in iOS App Store and Google Play. The Leep Ring is compatible with iPhones running iOS 14 or later and Android 6 or later.

SECURITY Encrypted Bluetooth communication is used between Leep Ring 1 and Leep App.

FACTORY RESET

Instructions can be found at leephealth.com/support. Always perform a factory reset before disposing the ring.

WARRANTY DISCLAIMER

leephealth.com/website-terms-of-use

SUPPORT AND FAQs

If you have questions about using your Leep Ring 1, our Leep App, or our online services, please do not hesitate to contact us.


You will find our most Frequently Asked Questions (FAQs) at leephealth.com/support.

For support you can contact us at support@leephealth.com or via the Leep App.

You can access Leep privacy policies at leephealth.com/privacy-policy.

EN


LEEP RING 1 CHARGING INSTRUCTIONS

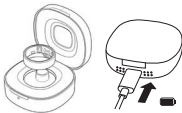

1. Connect the supplied USB Type-C Charging Cable or another certified USB Type-C power cable to the Charging Case.
2. Connect the USB Type-C Charging Cable to a 5V/1A external power source. Avoid charging the Charging Case with Fast Chargers as they may impact the battery life.
3. When power is connected and the charging case is fully charged, the green light on the front of the case stays on.
4. When the charging case has a low battery, the green light will flash rapidly. When the charging case is charging, the green light will flash slowly.
5. To charge the Leep Ring 1 place the ring in the Charging Case, ensuring the contacts on the engraved "L" side of the ring align with the charging contacts in the charging case.
6. When the ring is charging, the green light inside the ring will flash slowly and the light on the front of the charging case will stay on. You can charge the charging case with the lid open or closed.

Note: The charging case is not water resistant. For indoor use only.

HOW TO WEAR THE LEEP RING 1

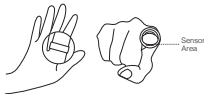

1. Choose a ring size that fits your finger to avoid wearing it too tightly or too loosely.
2. For the best performance and accuracy, it is recommended to wear the ring on the index finger of the non-dominant hand. It can also be worn on any other finger as long as the ring sits securely and comfortably.
3. When wearing the ring, ensure that the ring sensor (the side with the engraved "L") is facing the palm side of your finger for a more accurate measurement.

EN

LEEP RING 1 TROUBLESHOOTING

If the ring does not pair with your smartphone:

1. Make sure the ring is charged
2. Check your smartphone to ensure Bluetooth is turned on. This should be in your Bluetooth settings.
3. Restart the Leep App and try pairing again

If the ring is not measuring any data:

Please contact our support team at support@leephealth.com

If the ring battery is draining too quickly:

1. Calibrate your battery by charging it for at least 3 hours
2. Start using your ring again as you normally would
3. If the problem persists, please contact our support team at support@leephealth.com

If you are experiencing an issue not mentioned here please contact our support team at support@leephealth.com and report the issue in detail.

EN



GENERAL SAFETY

Do not disassemble, modify, or expose the Leep Ring 1 to liquids, extreme heat, or open flames. Do not puncture, burn, or incinerate. Avoid handling batteries, working on machinery that contains batteries, or situations where there is a risk of electric shock.

MEDICAL DEVICE WARNINGS

Leep Ring 1 is not a medical device. It's not intended to mitigate, prevent, treat, cure or diagnose any disease or condition. If you have any medical condition, you should always consult a licensed Physician. If you make any changes to your behavior based on data received from your Leep Ring 1 you agree that you do so at your own risk.

The Leep Ring 1 surface materials are safe for skin contact according to the ISO 10993 standard. If you experience irritation on your skin due to the Leep Ring 1, remove the ring. Please contact a physician if the skin irritation persists after not using Leep Ring 1.

Please be careful so that the Leep Ring 1 does not get caught on fixed structures or heavy objects.

If you experience any emergency or discomfort, or if you cannot remove your Leep Ring 1 yourself, we advise you to seek immediate medical attention

This product contains magnetic components. If you have an implantable medical device, consult your physician before use. Keep a safe distance between the ring, charging case, and your medical implant.

CHILD SAFETY WARNINGS

This product contains small parts and magnets that may present a choking hazard. Not suitable for children under 3 years of age. Keep the ring and charging case out of reach of young children. This product is not intended for individuals under the age of 18.

BATTERY WARNING:

This product contains rechargeable Lithium-ion batteries. Do not open the device or attempt to replace the batteries. Mishandling may result in fire or explosion. Dispose of the product at certified electronic recycling facilities. Do not dispose of with household waste.

Do not expose Leep Ring 1 or the charging case to heat, such as in a vehicle or directly in the sun. Do not charge the Leep Ring 1 in such environments.

Avoid handling batteries, working on devices with machinery that contain batteries, or situations where there is a risk of electric shock.

WARRANTY DISCLAIMER

THE SERVICES ARE PROVIDED TO YOU "AS IS WITH ALL FAULTS" AND "AS AVAILABLE" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND LEEP AND ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, REPRESENTATIVES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS HEREBY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE SERVICES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED AND EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY, AND NON-INFRINGEMENT. LEEP DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SERVICES, THE AVAILABILITY OF CONTENT, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE SERVICES WILL BE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS, THAT THE OPERATION OF THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS IN THE SERVICES WILL BE CORRECTED, OR THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SERVICES WILL FUNCTION WITH OTHER MOBILE APPS OR HARDWARE, OR WITHIN A SYSTEM. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY LEEP OR A LEEP AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON APPLICABLE STATUTORY RIGHTS OF A CONSUMER, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY.

NOT WITHSTANDING THE FOREGOING, LEEP WARRANTS TO THE ORIGINAL END USER PURCHASER THAT THE PRODUCT IS FREE FROM DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP FOR ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE

If your local law in effect at the time of purchase requires a warranty period longer than one (1) year, this warranty shall be extended to the extent required by such law. Within the warranty period, Leep shall repair or replace at no charge to you any components of the Product that fail the limited warranty provided. You shall be responsible for any related transportation charges. Replacement products may be new or refurbished at our discretion. This limited warranty does not apply to (i) normal wear and tear, including scratches and dents; (ii) consumable parts included in the Product, such as batteries, unless product damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (iii) damage resulting from your failure to use the Product in accordance with the instructions accompanying the Leep Product or available at the website; (iv) damage resulting from an accident, flood, fire, misuse, or abuse; (v) damage resulting from service performed, or damage resulting from tampering or alterations to the Product, by anyone not authorized by Leep; or (vi) use of the Product with any other application or software than the Leep Mobile App.

Leep retains the exclusive right to repair or replace the Product, or offer a full refund, at its sole discretion. Such remedy shall be your sole and exclusive remedy for any breach of this limited warranty. Warranty repairs and replacements have a new warranty which is the longer of ninety (90) days or the balance of the original one (1) year warranty.

LIMITATION OF LIABILITY

IN NO EVENT WILL LEEP, ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, REPRESENTATIVES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS, BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND, UNDER ANY LEGAL THEORY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH YOUR USE, OR INABILITY TO USE, THE SERVICES OR ANY CONTENT ASSOCIATED WITH THE SERVICES, OR SUCH OTHER SITES OR ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE SERVICES, INCLUDING ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OR ANTICIPATED SAVINGS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, LOSS OF DATA, AND WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT OR OTHERWISE, EVEN IF FORESEEABLE. THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS WILL APPLY REGARDLESS OF WHETHER OR NOT LEEP HAS BEEN WARNED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE FOREGOING DOES NOT AFFECT ANY LIABILITY WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED UNDER APPLICABLE LAW. TO THE EXTENT LIABILITY CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED AS SET FORTH ABOVE, IN NO EVENT SHALL LEEP BE LIABLE FOR ANY CLAIM, WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR UNDER ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, IN EXCESS OF \$100.

TERMS OF USE

Your use of the Leep Products and Services is subject to our Terms of Use, available at leephealth.com/website-terms-of-use/, and Privacy Policy, available at leephealth.com/privacy-policy/. The Warranty Disclaimer and the Limitation of Liability set forth above are from our Terms of Use and are subject to change if we change our Terms of Use.

INTELLECTUAL PROPERTY

Leep is a trademark of Leep Health Ltd. Leep Content, Leep Products, Leep Features and Services, and underlying technology are protected by copyright, trademark, and other laws of the United Kingdom and foreign countries. All rights reserved. Manufactured for Leep Health Ltd. 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ.

LEEP RING 1 INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Merci d'avoir choisi Leep Ring 1 ! Veuillez lire le manuel d'utilisation et les instructions de sécurité pour tirer le meilleur parti de votre nouvelle bague connectée.

- **PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :** -20 -- 50°C / 4--122°F
- **TYPE DE BATTERIE :** Lithium-Ion rechargeable
- **AUTONOMIE DE LA BATTERIE :** 10 jours (l'autonomie de la batterie peut varier selon l'utilisation)
- **TEMPS DE CHARGE :** 1,5 heure (bague)
- **TEMPS DE CHARGE :** 2,5 heures (étui)
- **TEMPÉRATURE DE CHARGE :** min 0°C / 32°F - max 45°C / 113°F
- **CAPACITÉ DE LA BATTERIE :** 16mAh, 0.06272Wh (bague)
- **CAPACITÉ DE LA BATTERIE :** 500 mAh, 1,85Wh (étui)
- **ENTRÉE :** 5V/1A, **SORTIE :** 5V/16mA
- **VERSION BLUETOOTH :** 5.0
- **PORTÉE BLUETOOTH :** ≤10 m
- **PLAGE DE FRÉQUENCE DE L'INTERFACE RF :** 2402-2480 MHz
-

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Produit : Bague de bien-être
 Marque : Leep
 Numéro de modèle : Leep Ring 1
 Fabricant : Leep Health Ltd., 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ

Site web : www.leephealth.com
 E-mail: support@leephealth.com

LEEP RING 1 UTILISATION

Leep Ring 1 est conçu pour vos activités quotidiennes. Leep Ring 1 est résistant à l'eau (IP68) jusqu'à 50m / 164ft.

Nous recommandons de nettoyer la bague régulièrement et de la garder sèche, pour assurer un bon fonctionnement de la bague et réduire les irritations cutanées potentielles. Vous pouvez utiliser un chiffon humide pour essuyer la bague. Veuillez vous assurer que la bague est complètement sèche avant de l'utiliser à nouveau.

L'étui de charge Leep Ring 1 n'est pas résistant à l'eau. N'utilisez pas et ne rangez pas l'étui de charge dans des environnements humides comme une salle de bain pendant de longues périodes.

Le Leep Ring 1 peut être rayé lors d'une utilisation normale et peut, en contact direct avec des matériaux plus tendres (métal, bijoux ou autres objets), provoquer lui-même des rayures en cas de contact étroit.

Les diodes électroluminescentes (LED) du produit sont dans la gamme de couleurs visibles. Elles sont sans danger pour la personne portant le produit et les autres personnes à proximité.

APPLICATION LEEP

L'application Leep est disponible sur l'App Store et Google Play. La bague Leep est compatible avec les iPhones fonctionnant sous iOS 14 ou version ultérieure et les appareils Android fonctionnant sous Android 6 ou version ultérieure. SÉCURITÉ Communication Bluetooth cryptée utilisée entre Leep Ring 1 et l'application Leep.

RÉINITIALISATION D'USINE :

Les instructions se trouvent sur leephealth.com/support. Effectuez toujours une réinitialisation d'usine avant de jeter la bague.

EXCLUSION DE GARANTIE :

leephealth.com/website-terms-of-use


ASSISTANCE ET FAQ :

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre Leep Ring 1, notre application Leep ou nos services en ligne, n'hésitez pas à nous contacter.

Vous trouverez nos questions fréquemment posées (FAQ) sur leephealth.com/support.

Pour obtenir de l'aide, vous pouvez nous contacter sur leephealth.com/support ou via l'application Leep.

Vous pouvez accéder aux politiques de confidentialité de Leep sur leephealth.com/privacy-policy.

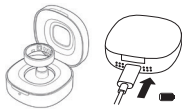

1. Connectez le câble de charge USB Type-C fourni ou un autre câble d'alimentation USB Type-C certifié au boîtier de charge.
2. Connectez le câble de charge USB Type-C à une source d'alimentation externe 5V/1A. Évitez de charger le boîtier de charge avec des chargeurs rapides car ils peuvent affecter la durée de vie de la batterie.
3. Lorsque l'alimentation est connectée et que le boîtier de charge est complètement chargé, le voyant vert à l'avant du boîtier reste allumé.
4. Lorsque le boîtier de charge a une batterie faible, le voyant vert clignote rapidement. Lorsque le boîtier de charge est en cours de charge, le voyant vert clignote lentement.
5. Pour charger la bague Leep 1, placez la bague dans le boîtier de charge en vous assurant que les contacts du côté gravé « L » de la bague s'alignent avec les contacts de charge du boîtier de charge.
6. Lorsque la bague est en cours de charge, le voyant vert à l'intérieur de la bague clignote lentement et le voyant à l'avant du boîtier de charge reste allumé. Vous pouvez charger le boîtier de charge avec le couvercle ouvert ou fermé.

Remarque : Le boîtier de charge n'est pas résistant à l'eau. Usage intérieur uniquement.



1. Choisissez une taille de bague qui s'adapte à votre doigt pour éviter de la porter trop serrée ou trop lâche.
2. Pour des performances et une précision optimales, il est recommandé de porter la bague sur l'index de la main non dominante. Elle peut également être portée sur n'importe quel autre doigt tant que la bague est bien fixée et confortable.
3. Lorsque vous portez la bague, assurez-vous que le capteur de la bague (le côté avec le « L » gravé) est orienté vers la paume de votre doigt pour une mesure plus précise.

Si la bague ne s'apparie pas avec votre smartphone :

1. Assurez-vous que la bague est chargée.
2. Vérifiez votre smartphone pour vous assurer que le Bluetooth est activé. Cela devrait se trouver dans vos paramètres Bluetooth.
3. Redémarrez l'application Leep et essayez de vous appairer à nouveau.

Si la bague ne mesure aucune donnée :

Veuillez contacter notre équipe d'assistance à support@leephealth.com

Si la batterie de la bague se décharge trop rapidement :

1. Calibrez votre batterie en la chargeant pendant au moins 3 heures.
2. Recommencez à utiliser votre bague comme vous le feriez normalement.
3. Si le problème persiste, veuillez contacter notre équipe d'assistance à support@leephealth.com

Si vous rencontrez un problème non mentionné ici, veuillez contacter notre équipe d'assistance à support@leephealth.com et signaler le problème en détail.



SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'exposez pas le Leep Ring 1 à des liquides, à une chaleur extrême ou à des flammes nues. Ne percez pas, ne brûlez pas et n'incinerez pas. Évitez de manipuler des batteries, de travailler sur des machines contenant des batteries ou des situations où il existe un risque de choc électrique.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Leep Ring 1 n'est pas un dispositif médical. Il n'est pas destiné à atténuer, prévenir, traiter, guérir ou diagnostiquer une maladie ou un état. Si vous avez un problème médical, vous devez toujours consulter un médecin agréé. Si vous apportez des modifications à votre comportement sur la base des données reçues de votre Leep Ring 1, vous acceptez de le faire à vos propres risques.

Les matériaux de surface du Leep Ring 1 sont sans danger pour le contact avec la peau selon la norme ISO 10993. Si vous ressentez une irritation de la peau due au Leep Ring 1, retirez la bague. Veuillez contacter un médecin si l'irritation cutanée persiste après avoir cessé d'utiliser Leep Ring 1.

Veuillez faire attention à ce que le Leep Ring 1 ne se coince pas sur des structures fixes ou des objets lourds.

Si vous rencontrez une urgence ou un inconfort, ou si vous ne pouvez pas retirer votre Leep Ring 1 vous-même, nous vous conseillons de consulter immédiatement un médecin.

Ce produit contient des composants magnétiques. Si vous avez un dispositif médical implantable, consultez votre médecin avant utilisation. Maintenez une distance de sécurité entre la bague, l'étui de charge et votre implant médical.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

Ce produit contient de petites pièces et des aimants qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Gardez la bague et l'étui de charge hors de portée des jeunes enfants. Ce produit n'est pas destiné aux personnes de moins de 18 ans.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE

Ce produit contient des batteries lithium-ion rechargeables. N'ouvrez pas l'appareil et ne tentez pas de remplacer les batteries. Une mauvaise manipulation peut entraîner un incendie ou une explosion. Éliminez le produit dans des installations de recyclage électronique certifiées. Ne jetez pas avec les déchets ménagers.

N'exposez pas Leep Ring 1 ou l'étui de charge à la chaleur, comme dans un véhicule ou directement au soleil. Ne chargez pas le Leep Ring 1 dans de tels environnements.

Évitez de manipuler des batteries, de travailler sur des appareils avec des machines contenant des batteries ou des situations où il existe un risque de choc électrique.

EXCLUSION DE GARANTIE

LES SERVICES VOUS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT AVEC TOUS LES DÉFAUTS » ET « TELS QUE DISPONIBLES » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, ET LEEP ET SES FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, REPRÉSENTANTS, AGENTS, PARTENAIRES ET CONCÉDANTS DE LICENCE DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS CONCERNANT LES SERVICES, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES, ET DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE TITRE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ SATISFAISANTE ET DE NON-CONTREFAÇON. LEEP NE GARANTIT PAS CONTRE L'INTERFÉRENCE AVEC VOTRE JOUISSANCE DES SERVICES, LA DISPONIBILITÉ DU CONTENU, QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LES SERVICES RÉPONDENT À VOS EXIGENCES, QUE LES SERVICES SERONT EXEMPTS DE VIRUS OU D'AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES, QUE LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES SERA ININTERROMPU OU SANS ERREUR, QUE LES DÉFAUTS DANS LES SERVICES SERONT CORRIGÉS, OU QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LES SERVICES FONCTIONNERONT AVEC D'AUTRES APPLICATIONS MOBILES OU MATÉRIELS, OU AU SEIN D'UN SYSTÈME. AUCUNE INFORMATION OU CONSEIL ORAL OU ÉCRIT FOURNI PAR LEEP OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE LEEP NE CRÉERA DE GARANTIE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LES LIMITATIONS DES DROITS STATUTAIRES APPLICABLES D'UN CONSOMMATEUR, DE SORTE QUE L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER.

NONOBTANT CE QUI PRÉCÈDE, LEEP GARANTIT À L'ACHETEUR UTILISATEUR FINAL ORIGINAL QUE LE PRODUIT EST EXEMPT DE DÉFAUTS DE MATÉRIAU ET DE FABRICATION PENDANT UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT.

Si votre législation locale en vigueur au moment de l'achat exige une période de garantie supérieure à un (1) an, cette garantie sera prolongée dans la mesure requise par cette législation. Pendant la période de garantie, Leep réparera ou remplacera gratuitement tout composant du Produit qui ne respecte pas la garantie limitée fournie. Vous serez responsable de tous les frais de transport associés. Les produits de remplacement peuvent être neufs ou remis à neuf à notre discrétion. Cette garantie limitée ne s'applique pas à (i) l'usure normale, y compris les rayures et les bosses ; (ii) les pièces consommables incluses dans le Produit, telles que les batteries, sauf si des dommages au produit sont survenus en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication ; (iii) les dommages résultant de votre non-respect des instructions accompagnant le Produit Leep ou disponibles sur le site Web ; (iv) les dommages résultant d'un accident, d'une inondation, d'un incendie, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus ; (v) les dommages résultant d'une réparation effectuée, ou les dommages résultant de manipulations ou de modifications du Produit, par toute personne non autorisée par Leep ; ou (vi) l'utilisation du Produit avec toute autre application ou logiciel que l'application mobile Leep.

Leep conserve le droit exclusif de réparer ou de remplacer le Produit, ou d'offrir un remboursement complet, à sa seule discrétion. Ce recours constituera votre seul et unique recours en cas de violation de cette garantie limitée. Les réparations et remplacements sous garantie bénéficient d'une nouvelle garantie correspondant à la plus longue des deux périodes suivantes : quatre-vingt-dix (90) jours ou le solde de la garantie originale d'un (1) an.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :

EN AUCUN CAS LEEP, SES FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, REPRÉSENTANTS, AGENTS, PARTENAIRES ET CONCEDEANTS DE LICENCE NE SERONT RESPONSABLES DE DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EN VERTU DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, DÉCOULANT DE OU EN RAPPORT AVEC VOTRE UTILISATION, OU VOTRE INCAPACITÉ À UTILISER, LES SERVICES OU TOUT CONTENU ASSOCIÉ AUX SERVICES, OU CES AUTRES SITES OU TOUTS SERVICES OU ARTICLES OBTENUS PAR LE BIAIS DES SERVICES, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU PUNITIF, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES BLESSURES CORPORELLES, LA DOULEUR ET LA SOUFFRANCE, LA DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE, LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D'ENTREPRISE OU D'ÉCONOMIES ANTICIPÉES, LA PERTE D'OPPORTUNITÉ COMMERCIALE, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, LA PERTE D'UTILISATION, LA PERTE D'ACHALANDAGE, LA PERTE DE DONNÉES, ET QU'ILS SOIENT CAUSÉS PAR UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTREMENT, MÊME S'ILS ÉTAIENT PRÉVISIBLES. CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS S'APPLIQUERONT INDÉPENDamment DU FAIT QUE LEEP AIT ÉTÉ OU NON AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CE QUI PRÉCÈDE N'AFFECTE AUCUNE RESPONSABILITÉ QUI NE PEUT ÊTRE EXCLUE OU LIMITÉE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE. DANS LA MESURE OÙ LA RESPONSABILITÉ NE PEUT ÊTRE EXCLUE OU LIMITÉE COMME ÉNONCÉ CI-DESSUS, EN AUCUN CAS LEEP NE SERA RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION, QUELLE SOIT CONTRACTUELLE, DÉLICTELLE OU EN VERTU DE TOUTE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, DÉPASSANT 100 \$.

CONDITIONS D'UTILISATION

Votre utilisation des produits et services LEEP est soumise à nos conditions d'utilisation, disponibles sur leephealth.com/web-site-terms-of-use/, et à la politique de confidentialité, disponible sur leephealth.com/privacy-policy/. L'exclusion de garantie et la limitation de responsabilité énoncées ci-dessus proviennent de nos conditions d'utilisation et sont sujettes à modification si nous modifions nos conditions d'utilisation.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LEEP est une marque commerciale de LEEP Health Ltd. Le contenu LEEP, les produits LEEP, les fonctionnalités et services LEEP et la technologie sous-jacente sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les marques commerciales et autres lois du Royaume-Uni et des pays étrangers. Tous droits réservés. Fabriqué pour LEEP Health Ltd, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres, Royaume-Uni, WC2H 9JQ.

LEEP RING 1 PRODUKTINFORMATIONEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Leep Ring 1 entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch und die Sicherheitshinweise, um das Beste aus Ihrem neuen Smart Ring herauszuholen.

- **BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:** -20 -- 50°C / 4--122°F
- **BATTERIETYP:** Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- **BATTERIELAUFZEIT:** 10 Tage (die Batterielaufzeit kann je nach Nutzung variieren)
- **LADEZEIT:** 1,5 Stunden (Ring)
- **LADEZEIT:** 2,5 Stunden (Etui)
- **LADETEMPERATUR:** min 0°C / 32°F - max 45°C / 113°F
- **BATTERIEKAPAZITÄT:** 16mAh, 0.06272Wh (Ring)
- **BATTERIEKAPAZITÄT:** 500 mAh, 1,85Wh (Etui)
- **EINGANG:** 5V/1A, **AUSGANG:** 5V/16mA
- **BLUETOOTH-VERSION:** 5.0
- **BLUETOOTH-REICHWEITE:** ≤10 m
- **HF-SCHNITTSTELLENFREQUENZBEREICH:** 2402-2480 MHz
-

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produkt: Wellness-Ring

Marke: Leep

Modellnummer: Leep Ring 1

Hersteller: Leep Health Ltd., 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Vereinigtes Königreich, WC2H 9JQ

Website : www.leephealth.com

E-Mail: support@leephealth.com

DE

LEEP RING 1 VERWENDUNG

Leep Ring 1 ist für Ihre täglichen Aktivitäten konzipiert. Leep Ring 1 ist wasserbeständig (IP68) bis zu 50m / 164ft.

Wir empfehlen, den Ring regelmäßig zu reinigen und trocken zu halten, um eine gute Funktionalität des Rings zu gewährleisten und potenzielle Hautreizungen zu reduzieren. Sie können den Ring mit einem feuchten Tuch abwischen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Ring vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Das Leep Ring 1 Ladeetui ist nicht wasserbeständig. Verwenden oder lagern Sie das Ladeetui nicht für längere Zeit in feuchten Umgebungen wie einem Badezimmer.

Der Leep Ring 1 kann bei normalem Gebrauch zerkratzt werden und kann bei direktem Kontakt mit weichen Materialien (Metall, Schmuck oder anderen Gegenständen) selbst Kratzer verursachen, wenn er in engen Kontakt kommt.

Die Leuchtdioden (LED) im Produkt befinden sich im sichtbaren Farbbereich. Sie sind sicher für die Person, die das Produkt trägt, und andere Personen in der Umgebung.

LEEP APP

Die Leep App ist im App Store und bei Google Play verfügbar. Der Leep Ring ist kompatibel mit iPhones mit iOS 14 oder höher und Android-Geräten mit Android 6 oder höher.

SICHERHEIT

Verschlüsselte Bluetooth-Kommunikation zwischen Leep Ring 1 und Leep App.

WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN:

Anweisungen finden Sie unter leephealth.com/support. Führen Sie immer ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durch, bevor Sie den Ring entsorgen.

GARANTIEAUSSCHLUSS:

leephealth.com/website-terms-of-use

SUPPORT UND HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:


Wenn Sie Fragen zur Verwendung Ihres Leep Ring 1, unserer Leep App oder unserer Online-Dienste haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Unsere häufig gestellten Fragen (FAQs) finden Sie unter leephealth.com/support.

Für Unterstützung können Sie uns auf leephealth.com/support oder über die Leep App kontaktieren.

Sie können auf die Datenschutzrichtlinien von Leep unter leephealth.com/privacy-policy zugreifen.

DE

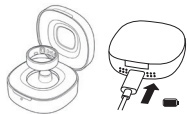

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Ladekabel oder ein anderes zertifiziertes USB-Typ-C-Stromkabel mit dem Ladeetui.
2. Verbinden Sie das USB-Typ-C-Ladekabel mit einer externen 5V/1A-Stromquelle. Vermeiden Sie das Laden des Ladeetuis mit Schnellladegeräten, da diese die Batterielebensdauer beeinträchtigen können.
3. Wenn die Stromversorgung angeschlossen ist und das Ladeetui vollständig geladen ist, leuchtet die grüne Anzeige an der Vorderseite des Etuis dauerhaft.
4. Wenn das Ladeetui einen niedrigen Batteriestand hat, blinkt die grüne Anzeige schnell. Wenn das Ladeetui geladen wird, blinkt die grüne Anzeige langsam.
5. Um den Leep Ring 1 zu laden, legen Sie den Ring in das Ladeetui und stellen Sie sicher, dass die Kontakte auf der gravierten „L“-Seite des Rings mit den Ladekontakten im Ladeetui übereinstimmen.
6. Wenn der Ring geladen wird, blinkt die grüne Anzeige im Inneren des Rings langsam und die Anzeige an der Vorderseite des Ladeetuis leuchtet dauerhaft. Sie können das Ladeetui bei geöffnetem oder geschlossenem Deckel laden.

Hinweis: Das Ladeetui ist nicht wasserdicht. Nur für den Innenbereich.



1. Wählen Sie eine Ringgröße, die zu Ihrem Finger passt, um zu vermeiden, dass Sie ihn zu fest oder zu locker tragen.
2. Für beste Leistung und Genauigkeit wird empfohlen, den Ring am Zeigefinger der nicht-dominanten Hand zu tragen. Er kann auch an jedem anderen Finger getragen werden, solange der Ring sicher und bequem sitzt.
3. Stellen Sie beim Tragen des Rings sicher, dass der Ringsensor (die Seite mit dem gravierten „L“) zur Handflächen-Seite Ihres Fingers zeigt, um eine genauere Messung zu erhalten.

Wenn sich der Ring nicht mit Ihrem Smartphone koppelt:

1. Stellen Sie sicher, dass der Ring geladen ist.
2. Überprüfen Sie Ihr Smartphone, um sicherzustellen, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Dies sollte in Ihren Bluetooth-Einstellungen sein.
3. Starten Sie die Leep App neu und versuchen Sie erneut zu koppeln.

Wenn der Ring keine Daten misst:

Bitte kontaktieren Sie unser Support-Team unter support@leephealth.com

Wenn sich die Ringbatterie zu schnell entlädt:

1. Kalibrieren Sie Ihre Batterie, indem Sie sie mindestens 3 Stunden lang aufladen.
2. Beginnen Sie, Ihren Ring wieder wie gewohnt zu verwenden.
3. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter support@leephealth.com.

Wenn Sie ein hier nicht erwähntes Problem haben, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter support@leephealth.com und melden Sie das Problem ausführlich.



ALLGEMEINE SICHERHEIT

Zerlegen, modifizieren oder setzen Sie den Leep Ring 1 nicht Flüssigkeiten, extremer Hitze oder offenen Flammen aus. Nicht durchstechen, verbrennen oder verbrennen. Vermeiden Sie den Umgang mit Batterien, die Arbeit an Maschinen, die Batterien enthalten, oder Situationen, in denen die Gefahr eines Stromschlags besteht.

WARNHINWEISE FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE

Leep Ring 1 ist kein medizinisches Gerät. Es ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder Zustände zu lindern, zu verhindern, zu behandeln, zu heilen oder zu diagnostizieren. Wenn Sie an einer Krankheit leiden, sollten Sie immer einen zugelassenen Arzt konsultieren. Wenn Sie Änderungen an Ihrem Verhalten aufgrund von Daten Ihres Leep Ring 1 vornehmen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie dies auf eigenes Risiko tun.

Die Oberflächenmaterialien des Leep Ring 1 sind gemäß der ISO 10993-Norm für den Hautkontakt sicher. Wenn Sie aufgrund des Leep Ring 1 eine Hautreizung verspüren, entfernen Sie den Ring. Bitte kontaktieren Sie einen Arzt, wenn die Hautreizung nach dem Nichtgebrauch von Leep Ring 1 anhält.

Bitte seien Sie vorsichtig, damit der Leep Ring 1 nicht an festen Strukturen oder schweren Gegenständen hängen bleibt.

Wenn Sie einen Notfall oder Unbehagen verspüren oder wenn Sie Ihren Leep Ring 1 nicht selbst entfernen können, empfehlen wir Ihnen, sofort medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Dieses Produkt enthält magnetische Komponenten. Wenn Sie ein implantierbares medizinisches Gerät haben, konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen Ring, Ladeetui und Ihrem medizinischen Implantat ein.

KINDERSICHERHEITSWARNUNGEN

Dieses Produkt enthält Kleinteile und Magnete, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Halten Sie Ring und Ladeetui außerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt.

BATTERIEWARNUNG

Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, die Batterien auszutauschen. Unsachgemäße Handhabung kann zu Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie das Produkt bei zertifizierten Elektronik-Recycling-Einrichtungen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Setzen Sie Leep Ring 1 oder das Ladeetui nicht Hitze aus, beispielsweise in einem Fahrzeug oder direkt in der Sonne. Laden Sie den Leep Ring 1 nicht in solchen Umgebungen.

Vermeiden Sie den Umgang mit Batterien, die Arbeit an Geräten mit Maschinen, die Batterien enthalten, oder Situationen, in denen die Gefahr eines Stromschlags besteht.

GARANTIEAUSSCHLUSS:

DIE DIENSTE WERDEN IHNEN "WIE BESEHEN MIT ALLEN FEHLERN" UND "WIE VERFÜGBAR" OHNE JEGLICHE GARANTIE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, UND LEEP UND SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, DIREKTOREN, MITARBEITER, VERTRETER, AGENTEN, PARTNER UND LIZENZGEBER LEHNEN HIERMIT ALLE GARANTIEEN UND BEDINGUNGEN IN BEZUG AUF DIE DIENSTE AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN DER EIGENTUMSRECHTE, MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT UND NICHTVERLETZUNG AB. LEEP GARANTIERT NICHT GEGEN BEEINTRÄCHTIGUNG IHRES GENUSSES DER DIENSTE, DIE VERFÜGBARKEIT VON INHALTEN, DASS DIE IN DEN DIENSTEN ENTHALTENEN FUNKTIONEN IHRE ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN, DASS DIE DIENSTE FREI VON VIREN ODER ANDEREN SCHÄDLICHEN KOMPONENTEN SIND, DASS DER BETRIEB DER DIENSTE UNUNTERBROCHEN ODER FEHLERFREI IST, DASS MÄNGEL IN DEN DIENSTEN BEHOBBEN WERDEN, ODER DASS DIE IN DEN DIENSTEN ENTHALTENEN FUNKTIONEN MIT ANDEREN MOBILEN APPS ODER HARDWARE ODER INNERHALB EINES SYSTEMS FUNKTIONIEREN. KEINE MÜNDLICHEN ODER SCHRIFTLICHEN INFORMATIONEN ODER RATSCHLÄGE VON LEEP ODER EINEM VON LEEP AUTORISIERTEN VERTRETER SCHAFFEN EINE GARANTIE. EINIGE RECHTSORDNUNGEN ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIEEN ODER BESCHRÄNKUNGEN DER ANWENDBAREN GESETZLICHEN RECHTE EINES VERBRAUCHERS NICHT, SODASS DER OBIGE AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT GILT.

UNGEACHTET DES VORSTEHENDEN GARANTIERT LEEP DEM URSPRÜNGLICHEN ENDKÄUFER, DASS DAS PRODUKT FÜR EIN (1) JAHR AB KAUFDATUM FREI VON MATERIAL- UND VERARBEITUNGSFEHLERN IST.

Wenn Ihr zum Zeitpunkt des Kaufs geltendes lokales Recht eine Garantiezeit von mehr als einem (1) Jahr vorschreibt, wird diese Garantie in dem durch dieses Recht erforderlichen Umfang verlängert. Innerhalb der Garantiezeit repariert oder ersetzt Leep kostenlos alle Komponenten des Produkts, die die beschränkte Garantie nicht erfüllen. Sie sind für alle damit verbundenen Transportkosten verantwortlich. Ersatzprodukte können nach unserem Ermessen neu oder generalüberholt sein. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für (i) normale Abnutzung, einschließlich Kratzer und Dellen; (ii) im Produkt enthaltene Verbrauchsteile wie Batterien, es sei denn, die Produktschäden sind auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen; (iii) Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Sie das Produkt nicht gemäß den dem Leep-Produkt beiliegenden oder auf der Website verfügbaren Anweisungen verwenden; (iv) Schäden durch Unfall, Überschwemmung, Feuer, Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung; (v) Schäden durch Reparaturen oder durch Manipulationen oder Änderungen am Produkt durch Personen, die nicht von Leep autorisiert sind; oder (vi) die Verwendung des Produkts mit anderen Anwendungen oder Software als der Leep Mobile App.

Leep behält sich das ausschließliche Recht vor, das Produkt nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen oder eine vollständige Rückerstattung anzubieten. Dieses Rechtsmittel ist Ihr einziger und ausschließlicher Rechtsbehelf bei Verletzung dieser beschränkten Garantie. Garantiereparaturen und -austausche haben eine neue Garantie, die neunzig (90) Tage oder der verbleibende Zeitraum der ursprünglichen einjährigen Garantie beträgt, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:

IN KEINEM FALL HAFTEN LEEP, SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, DIREKTOREN, MITARBEITER, VERTRETER, AGENTEN, PARTNER UND LIZENZGEBER FÜR SCHÄDEN JEDLICHER ART NACH IRGEND EINER RECHTSTHEORIE, DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IHRER NUTZUNG ODER UNFÄHIGKEIT ZUR NUTZUNG DER DIENSTE ODER EINES MIT DEN DIENSTEN VERBUNDENEN INHALTS ODER SOLCHER ANDEREN WEBSITES ODER DIENSTE ODER ARTIKEL ERGEBEN, DIE ÜBER DIE DIENSTE ERWORBEN WURDEN, EINSCHLIESSLICH DIREKTER, INDIREKTER, BESONDERER, ZUFÄLLIGER, FOLGE- ODER STRAFSCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF PERSONENSCHÄDEN, SCHMERZEN UND LEIDEN, EMOTIONALE BELASTUNG, UMSATZVERLUST, GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST ODER ENTGANGENE EINSPARUNGEN, VERLUST VON GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, NUTZUNGSVERLUST, VERLUST DES GOODWILLS, DATENVERLUST, UND UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE DURCH UNERLAUBTE HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT WURDEN, SELBST WENN SIE VORHERSEHBAR WÄREN. DIESE AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN GELTEN UNABHÄNGIG DAVON, OB LEEP VOR DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN GEWARNT WURDE ODER NICHT. DAS VORSTEHENDE BERÜHRT NICHT EINE HAFTUNG, DIE NACH GELTENDEM RECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN ODER BESCHRÄNKT WERDEN KANN. SOWEIT DIE HAFTUNG NICHT WIE OBEN DARGELEGT AUSGESCHLOSSEN ODER BESCHRÄNKT WERDEN KANN, HAFTET LEEP IN KEINEM FALL FÜR ANSPRÜCHE, OB AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER NACH EINER ANDEREN HAFTUNGSTHEORIE, DIE 100 \$ ÜBERSTEIGEN.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Ihre Nutzung der Leep-Produkte und -Dienste unterliegt unseren Nutzungsbedingungen, verfügbar unter leephealth.com/website-terms-of-use/, und der Datenschutzrichtlinie, verfügbar unter leephealth.com/privacy-policy/. Der oben aufgeführte Garantierausschluss und die Haftungsbeschränkung stammen aus unseren Nutzungsbedingungen und können sich ändern, wenn wir unsere Nutzungsbedingungen ändern.

GEISTIGES EIGENTUM

Leep ist eine Marke von Leep Health Ltd. Leep-Inhalte, Leep-Produkte, Leep-Funktionen und -Dienste sowie die zugrunde liegende Technologie sind durch Urheber-, Marken- und andere Gesetze des Vereinigten Königreichs und anderer Länder geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt für Leep Health Ltd, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, Vereinigtes Königreich, WC2H 9JQ.

LEEP RING 1 製品情報

Leap Ring 1をお選びいただきありがとうございます!新しいスマートリングを最大限に活用するために、ユーザーマニュアルと安全上の注意事項をお読みください。

- 動作温度範囲:-20 -- 50°C / 4--122°F
- バッテリータイプ:充電式リチウムイオン
- バッテリー寿命:10日間(バッテリー寿命は使用状況により異なる場合があります)
- 充電時間:1.5時間(リング)
- 充電時間:2.5時間(ケース)
- 充電温度:最低 0°C / 32°F - 最高 45°C / 113°F
- バッテリー容量:16mAh, 0.06272Wh (リング)
- バッテリー容量:500 mAh, 1.85Wh(ケース)
- 入力:5V/1A、出力:5V/16mA
- Bluetoothバージョン:5.0
- Bluetooth範囲:≤10 m
- RF インターフェース周波数範囲:2402-2480 MHz

一般情報

製品:ウェルネスリング
ブランド:Leap
型番:Leap Ring 1
製造元:Leap Health Ltd., 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ

ウェブサイト:www.leephealth.com
メール:support@leephealth.com

JA

LEEP RING 1 使用方法

Leap Ring 1は日常的な活動のために設計されています。Leap Ring 1は50m / 164ftまで防水性能(IP68)があります。

リングの良好な機能性を確保し、潜在的な皮膚刺激を軽減するために、リングを定期的に清掃し、乾燥した状態に保つことをお勧めします。湿った布でリングを拭くことができます。再度使用する前に、リングが完全に乾燥していることを確認してください。

Leap Ring 1充電ケースは防水ではありません。浴室などの湿気の多い環境で長時間充電ケースを使用したり保管したりしないでください。

Leap Ring 1は通常の使用で傷がつく可能性があり、より柔らかい素材(金属、宝飾品、その他の物体)と直接接触すると、密接に接触した場合に傷を引き起こす可能性があります。

本製品の発光ダイオード(LED)は可視色範囲内にあります。製品を装着している人および周囲の他の人にとって安全です。

LEEP アプリ
LeapアプリはApp StoreおよびGoogle Playで入手できます
LeapリングはiOS 14以降を搭載したiPhone、およびAndroid 6以降を搭載したAndroidデバイスと互換性があります。
セキュリティ
Leap Ring 1とLeapアプリ間で暗号化されたBluetooth通信が使用されています。

工場出荷時設定へのリセット:
手順はleephealth.com/supportで確認できます。リングを廃棄する前に、必ず工場出荷時設定へのリセットを実行してください。

保証の免責事項:
leephealth.com/website-terms-of-use


サポートとよくある質問:
Leap Ring 1、Leapアプリ、またはオンラインサービスの使用について質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)はleephealth.com/supportでご覧いただけます。

サポートについては、leephealth.com/support またはLeapアプリからお問い合わせください。

Leapのプライバシーポリシーはleephealth.com/privacy-policyでアクセスできます

JA

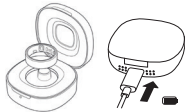

1. 付属のUSB Type-C充電ケーブルまたは他の認定USB Type-C電源ケーブルを充電ケースに接続します。
2. USB Type-C充電ケーブルを5V/1Aの外部電源に接続します。急速充電器での充電ケースの充電は、バッテリー寿命に影響を与える可能性があるため避けてください。
3. 電源が接続され、充電ケースが完全に充電されると、ケース前面の緑色のライトが点灯し続けます。
4. 充電ケースのバッテリー残量が少ない場合、緑色のライトが速く点滅します。充電ケースが充電中の場合、緑色のライトがゆっくりと点滅します。
5. LEEPリング1を充電するには、リングの刻印された「L」側の接点が充電ケース内の充電接点と一致するようにして、リングを充電ケースに置きます。
6. リングが充電中の場合、リング内部の緑色のライトがゆっくりと点滅し、充電ケース前面のライトが点灯し続けます。充電ケースは蓋を開けた状態でも閉じた状態でも充電できます。

注意：充電ケースは防水ではありません。屋内使用のみ。



1. きつすぎたりゆるすぎたりしないように、指に合うリングサイズを選択してください
2. 最高のパフォーマンスと精度を得るために、利き手ではない手の人差し指にリングを装着することをお勧めします。リングがしっかりと快適に装着される限り、他の指に装着することもできます。
3. リングを装着する際は、より正確な測定のために、リングセンサー(刻印された「L」がある側)が指の手のひら側を向いていることを確認してください。

リングがスマートフォンとペアリングしない場合:

1. リングが充電されていることを確認してください
2. スマートフォンを確認して、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。これはBluetooth設定にあります
3. LEEPアプリを再起動し、再度ペアリングを試してください

リングがデータを測定していない場合:

support@leephealth.comのサポートチームにお問い合わせください

リングのバッテリーが早く消耗する場合:

1. 少なくとも3時間充電してバッテリーを校正してください
2. 通常通りリングの使用を再開してください
3. 問題が解決しない場合は、support@leephealth.comのサポートチームにお問い合わせください

ここに記載されていない問題が発生している場合は、support@leephealth.comのサポートチームに連絡して、問題を詳細に報告してください。



一般的な安全性

Leap Ring 1を分解、改造したり、液体、極度の熱、または直火にさらしたりしないでください。穴を開けたり、燃やしたり、焼くしたりしないでください。バッテリーの取り扱い、バッテリーを含む機械での作業、または感電の危険がある状況は避けてください。

医療機器に関する警告

Leap Ring 1は医療機器ではありません。病気や状態を軽減、予防、治療、治癒、または診断することを目的としたものではありません。医学的状態がある場合は、常に認可された医師に相談する必要があります。Leap Ring 1から受信したデータに基づいて行動を変更する場合、自己責任で行うことに同意するものとします。

Leap Ring 1の表面材料は、ISO 10993規格に従って皮膚接触に安全です。Leap Ring 1による皮膚の炎症を感じた場合は、リングを外してください。Leap Ring 1を使用しなくなった後も皮膚の炎症が続く場合は、医師に連絡してください。

Leap Ring 1が固定された構造物や重い物体に引っかからないように注意してください。

緊急事態や不快感を感じた場合、またはLeap Ring 1を自分で外すことができない場合は、直ちに医療機関を受診することをお勧めします。

この製品には磁気部品が含まれています。埋め込み型医療機器をお持ちの場合は、使用前に医師に相談してください。リング、充電ケース、および医療用インプラントの間に安全な距離を保ってください。

子供の安全に関する警告

この製品には、窒息の危険がある小さな部品と磁石が含まれています。3歳未満の子供には適していません。リングと充電ケースを幼児の手の届かないところに保管してください。この製品は18歳未満の個人を対象としていません。

バッテリーに関する警告

本製品には充電式リチウムイオン電池が含まれています。デバイスを開けたり、電池を交換しようとしたりしないでください。誤った取り扱いは火災や爆発を引き起こす可能性があります。認定された電子機器リサイクル施設で製品を廃棄してください。家庭ごみとして廃棄しないでください。

Leap Ring 1や充電ケースを、車内や直射日光の当たる場所などの熱にさらさないでください。このような環境でLeap Ring 1を充電しないでください。

バッテリーの取り扱い、バッテリーを含む機械を使用したデバイスでの作業、または感電の危険がある状況は避けてください。

保証の免責事項:

本サービスは「現状有姿ですべての欠陥を含む」および「提供可能な状態」で、いかなる種類の保証もなく提供されます。LEEPおよびその子会社、関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、エージェント、パートナー、およびライセンサーは、明示的または黙示的を問わず、本サービスに関するすべての保証および条件を明示的に否認し、権原、商品性、特定目的への適合性、満足のいく品質、および非侵害の黙示的保証を明示的に否認します。LEEPは、本サービスの享受に対する干渉、コンテンツの可用性、本サービスに含まれる機能がお客様の要件を満たすこと、本サービスにウイルスやその他の有害なコンポーネントがないこと、本サービスの動作が中断されないかエラーがないこと、本サービスの欠陥が修正されること、または本サービスに含まれる機能が他のモバイルアプリやハードウェアと、またはシステム内で機能することを保証しません。LEEPまたはLEEP認定代理人による口頭または書面による情報またはアドバイスは、保証を生じさせません。一部の管轄区域では、黙示的保証の除外または消費者の適用される法定権利の制限が認められていないため、上記の除外が適用されない場合があります。

前述の規定にかかわらず、LEEPは、製品が購入日から1年間、材料および製造上の欠陥がないことを、最初の最終購入者に対して保証します。

購入時に有効な現地法で1年を超える保証期間が義務付けられている場合、本保証はその法律で要求される範囲まで延長されるものとします。保証期間内に、Leapは、提供された限定保証に適合しない製品の部品を無償で修理または交換するものとします。関連する輸送費用はお客様の負担となります。交換製品は、当社の裁量により新品または再生品となる場合があります。この限定保証は、以下には適用されません：(i) 傷やへこみを含む通常の摩耗；(ii) 電池などの製品に含まれる消耗部品（ただし、材料または製造上の欠陥により製品に損傷が生じた場合を除く）；(iii) Leap製品に付属する、またはウェブサイトですぐ入手可能な指示に従って製品を使用しなかったことによる損傷；(iv) 事故、洪水、火災、誤用、または乱用による損傷；(v) Leapによって承認されていない者による修理、改ざん、または製品の変更による損傷；または(vi) Leapモバイルアプリ以外のアプリケーションまたはソフトウェアでの製品の使用。

Leapは、独自の裁量により、製品を修理もしくは交換する、または全額返金する排他的権利を保持します。このような救済措置は、本限定保証の違反に対するお客様の唯一かつ排他的な救済措置となります。保証修理および交換には、90日間または元の1年保証の残存期間のいずれか長い方の新しい保証が適用されます。

責任の制限:

LEEPおよびその子会社、関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、エージェント、パートナー、およびライセンサーは、いかなる法理論に基づいても、本サービスの使用または使用不能、または本サービスに関連するコンテンツ、またはそのような他のサイト、または本サービスを通じて取得したサービスまたはアイテムから生じる、またはそれらに関連する、直接的、間接的、特別、偶発的、結果的、または懲罰的損害を含む、あらゆる種類の損害について責任を負いません。これには、人身傷害、痛みと苦しみ、精神的苦痛、収益の損失、利益の損失、事業の損失または予想される節約、事業機会の損失、事業の中断、使用の損失、営業権の損失、データの損失が含まれますが、これらに限定されず、不法行為(過失を含む)、契約違反、またはその他によって引き起こされたかどうかにかかわらず、予見可能な場合でも責任を負いません。これらの除外または制限は、LEEPがそのような損害の可能性について警告されているかどうかにかかわらず適用されます。上記は、適用法の下で除外または制限できない責任には影響しません。上記のように責任を除外または制限できない範囲において、LEEPは、契約、不法行為、またはその他の責任理論に基づくかどうかにかかわらず、100ドルを超えるいかなる請求についても責任を負いません。

利用規約

Leap製品およびサービスの使用は、leaphealth.com/web-site-terms-of-use/で入手可能な利用規約、およびleaphealth.com/privacy-policy/で入手可能なプライバシーポリシーに従うものとします。上記の保証の免責事項および責任の制限は、当社の利用規約に基づくものであり、利用規約を変更した場合は変更される可能性があります。

知的財産

LeapはLeap Health Ltd.の商標です。Leapのコンテンツ、Leap製品、Leapの機能とサービス、および基礎となる技術は、英国および外国の著作権、商標、およびその他の法律によって保護されています。すべての権利を留保します。製造元:Leap Health Ltd. 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ。

LEEP RING 1 REGULATORY



EN: Conformity information

Leap Health Ltd. hereby declares that this radio equipment product is in compliance with Directive 2014/53/ EU Radio Equipment Regulations 2017 and all other applicable EU regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: leaphealth.com/support/compliance

FR: Informations de conformité

Leap Health Ltd. déclare par la présente que ce produit d'équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE sur les équipements radio et aux autres règlements UE applicables. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : leaphealth.com/support/compliance

DE: Konformitätsinformation

Leap Health Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Funkgerätprodukt der Richtlinie 2014/53/EU der Funkgerätespezifikationen 2017 und allen anderen geltenden EU-Vorschriften entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: leaphealth.com/support/compliance



EN: Disposal and recycling

This product is compliant with Directive 2012/19/EU. Please dispose of used electrical and electronic equipment (WEEE) according to national laws and regulations with electrical waste. It should not be mixed with general household waste.




CET APPAREIL
SE RECYCLE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR: Élimination et recyclage

LEEP RING 1 REGULATORY

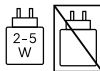

EN: Min 2 watts charging

The power delivered by the charger must be between min 2 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR: Charge minimale de 2 watts

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 2 watts requis par l'équipement radio et un maximum de 5 watts pour atteindre la vitesse de charge maximale.

DE: Min. 2 Watt Ladeleistung

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2 Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

JP: 最低2ワット充電

充電器が供給する電力は、無線機器に必要な最低2ワットと、最大充電速度を達成するための最大5ワットの間でなければなりません。



EN: FCC compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

LEEP RING 1 REGULATORY

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Leep for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EN: RF exposure statement

This equipment complies with the FCC and ISCED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FR: Déclaration d'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'ISCED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

EN: ISCED Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
 - (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 - 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES (B) /NMB (B)
IC: 34736-LR1
HMN: Leep Ring 1
FCC ID : 2BSX5-LR1



[R] XXX-XXXXXX

PACKAGING RECYCLING		Paper / Carta	Raccogli la differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.
		Card / Carta	





leephealth.com/support/manuals