


V8

Smart Health Band

User Manual

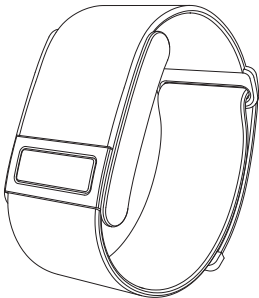

What's Included in the Box




① Device



② Charging base



③ Wristband

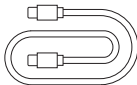

④ Type-C charging cable



⑤ User manual

Introduction

This is a smart health bracelet which can monitor multiple body vital signs under many different activity modes.



Blood
Glucose



Sleep
Tracking



Sleep Apnea
Monitoring



24/7 Heart
Rate



SpO2



Blood
Pressure



HRV



Stress



ECG



Skin Temperature
Trend



Activity
Tracking



Female
Wellness



Note: The watch is not a medical device. The test results and suggestions are for reference only.

Instructions for Use


1. Initial Use & Wearing

Initial Charging: For first-time use, please fully charge the device to activate it. If you perform a factory reset via the mobile App, you will also need to charge the device to turn it back on.

Proper Wearing: Insert the main unit into the strap buckle and then wear it on your wrist. It is recommended to position the strap approximately 2.5cm above your wrist bone. Ensure it is snug but comfortable, allowing the sensors to maintain full contact with your skin without causing pressure. A simple test: If you can easily slide your little finger between the strap and your wrist, the fit is too loose.

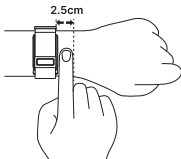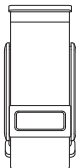

2. ECG Measurements: When the bracelet is awake, the App initiates ECG measurement, which lasts 30 seconds. After the measurement is completed, the App can view the real-time ECG waveform, generate an ECG report, and the user can also download the ECG waveform.

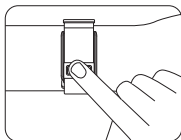

Cover the electrode area with your finger.

3. Charging & Battery Life

Charging the Device: Connect the charging base to a Type-C cable, then place the device on the charging base to begin charging. During charging, the green light flashes slowly. When fully charged, the green light remains steadily lit.


Battery Indicator: The indicator light on the main unit displays the remaining battery level through color codes:


Red light: Battery level is between 0%~20%.

Green light: Battery level is between 20%~100%.

Battery below 5%: The red light will flash three times, after which the device will automatically power off.


Battery Life: Under full charge, the device supports approximately 15+ days of normal use or about 30 days on standby. Actual battery life depends on enabled features, usage frequency, and environmental conditions.

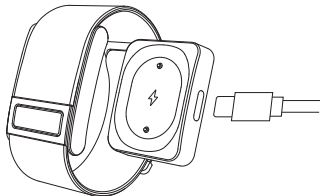

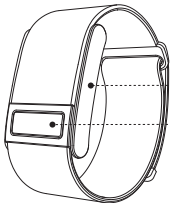

Device

ECG Electrodes

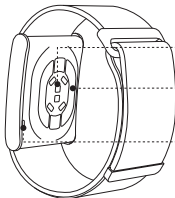

HR & SpO2 Sensor

ECG & Body
Temperature Sensor

LED Indicator

Download the APP to Start Your Health Journey

- Scan the QR code below or search JCVitalPro on Google Play or iOS App Store to download our JCVitalPro App.
- Make sure the Bluetooth of your mobile device is on.
- Choose device identified in App and connect to your smart band.



 **JCVitalPro**

Note: Please ensure that your Android version is 5.0 or later, iOS version is 10.0 or later.

Specifications

Product Name: Smart health band

Model: V8

Warranty: 12 months

BT Version: BLE 5.4

BT Range: 10 meters

Size: 40.3*29.6*11.8 mm

Battery: 180mAh

Data Memory: 30 days

Waterproof: IP68

Activity Time: Max 99h59min

Calories Burned: Max 9999.9kcal

Running & Walking Distance:

Max 999.99km

Troubleshooting

If the device doesn't pair with your smartphone

1. Make sure your device is turned on.
2. Check your smartphone to ensure Bluetooth is on.
3. Check the app to make sure Bluetooth permissions are turned on.
This should be in your Bluetooth settings.
4. Restart the app and go to the app home screen.
5. The device battery should display on your app device screen.

If the device isn't measuring any data

Please contact our support team.

If the device battery is draining too quickly

1. Calibrate your battery by charging it for at least three hours.
2. Start using your device again as you normally would.
3. Contact our support team if the problem persists.

If the device causes an allergic reaction

Please stop using the device right away. In the rare event of an anaphylactic reaction, seek medical attention immediately.

If the issue isn't mentioned in these tips

Please contact our support team and report the issue in detail.

Safety Notices

Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, injury, or damage to the device or other property. Read all the safety information below before using the device.

Not a Medical Device

It's not a medical device and should not be used as a substitute for professional medical judgment. It is not designed or intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of any condition or disease. Please consult your healthcare professional prior to making any decisions related to your health.

Handling

Handle this device with care as it contains sensitive electronic components and can be damaged if dropped, burned, punctured, or crushed. Don't use a damaged Move Wearable as it may cause injury. Avoid heavy exposure to dust or sand. Children should not be allowed to play with the device without supervision.

Battery

Do not attempt to replace the device battery yourself, you may damage the battery, which could cause overheating and injury. The lithium-ion battery in the device should be serviced only by manufacturer or an authorized service provider. Batteries must be recycled or disposed of separately from household waste. Do not incinerate the battery. Do not dispose of the device in domestic waste. If you have any questions, please contact us.

Operating Temperature

This device is designed to work in ambient temperatures between 32°F and 113°F (0°C and 45°C) and be stored in temperatures between -4°F and 158°F (-20°C and 70°C). It can be damaged and battery life shortened if stored or operated outside of these temperature ranges. Avoid exposing this device to dramatic changes in temperature or humidity.

Prolonged Heat Exposure

Do not expose the device to extreme temperatures or extreme temperature fluctuations. Protect

the device from direct sunlight. While this device is charging or the power plug is plugged into a power source, do not sleep on it or place it under a blanket, pillow, or your body. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body.

FCC Requirement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

包装清单




① 主机



② 充电座



③ 腕带

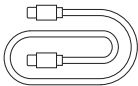

④ Type-C 充电线



⑤ 用户手册

产品介绍

本产品是一款智能健康手环，可全天候监测人体的多种健康体征。



血糖



睡眠追踪



睡眠呼吸暂停



心率



血氧



血压



心率变异性



压力



心电测量



体温趋势



活动追踪



女性健康



温馨提示：本产品不是医疗设备，不用于诊断或监测任何疾病或医疗状况。

使用说明

1. 首次使用与佩戴

首次充电：首次使用时，请将设备完全充电以激活。若在手机 App 中执行了恢复出厂设置，也需通过充电来重新开启设备电源。


正确佩戴：将主机装入表带卡扣，然后佩戴于手腕。建议将表带固定在腕骨上方约2.5厘米处，保持松紧适宜，确保传感器与皮肤充分接触且无压迫感。简易判断：若小指能轻松伸入表带与手腕间的空隙，则说明过松。

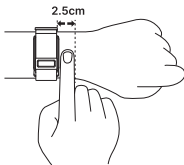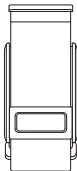

2. ECG 心电测量

当手环处于唤醒状态时，可通过App发起ECG心电测量，测量持续30秒。

测量完成后，可在App上查看实时心电波形、生成心电报告，用户还可下载心电波形。

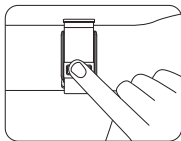

测量时用手指覆盖
电极区域。

3. 充电与续航

设备充电：将充电座连接Type-C充电线，再将设备放置于充电座上即可充电。充电时绿灯慢闪，充满后绿灯常亮。


电量指示灯说明：主机指示灯通过颜色显示电量：


红灯：电量为 0% - 20%。

绿灯：电量为 20% - 100%。

电量低于5%时，红灯闪烁三次后设备将自动关机。


续航时间：满电状态下，正常使用约15天以上，待机约30天。实际续航时间取决于使用功能、频率及环境。

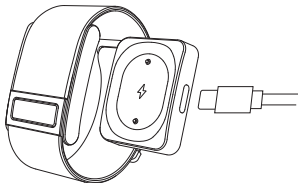

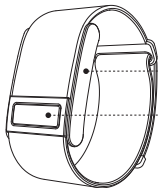

主机

心电图电极

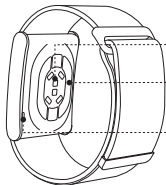

心率 & 血氧传感器

心电图 & 体温传感器

LED 指示灯

下载APP, 开启健康之旅

- 扫描下方二维码，或在 Google Play 或 iOS App Store 搜索 JCVitalPro，下载我们的应用程序。
- 确保您手机的蓝牙功能已开启。
- 在 App 中选择识别的设备，即可连接您的智能手环。



 JCVitalPro

温馨提示：请确保您的手机系统为Android 5.0 及以上，iOS 10.0 及以上。

规格参数

产品名称: 智能健康手环

产品型号: V8

保修期: 12 个月

蓝牙版本: BLE 5.4

蓝牙连接范围: 10 米

产品尺寸: 40.3*29.6*11.8 (mm)

电池容量: 180mAh

数据储存时长: 30 天

防水等级: IP68

最大运动时长: 99小时59 分钟

最大卡路里消耗: 9999.9千卡

最大运动距离: 999.99千米

故障排除

如果手环无法与手机配对

1. 确保设备为开机状态。
2. 检查手机蓝牙是否开启。
3. 检查应用程序中的蓝牙设置，确保蓝牙权限已打开。
4. 重新启动应用程序。
5. 应用程序界面应显示电池标志。

如果设备停止运行

请为您的手环充电30分钟。

如果电池耗电过快

1. 请至少充电3小时来校准电池。
2. 请像往常一样再次开始使用您的手环设备。
3. 如果问题未得到解决，请联系我们的售后团队。

如果可穿戴设备或手环引起过敏反应

请立即停止使用该设备。在极少数情况下出现过敏性休克反应时，请立即就医。

如遇其他问题

请联系我们的售后团队并报告详细问题。

安全须知

使用设备前，请阅读以下所有安全信息。不遵守这些安全说明可能会导致火灾、电击、受伤或设备或其他财产损失。

非医疗器械

本表并非医疗器械，不应作为专业医疗判断的替代品。它并非设计用于或旨在用于诊断疾病或其他病症，或用于治愈、缓解、治疗或预防任何病症或疾病。在做出与您的健康相关的任何决定之前，请咨询您的医疗保健专业人员。

回收

请小心回收处理这款手环，因为它包含敏感的电子元件，如果掉落、燃烧、刺破或挤压可能会损坏。请勿使用损坏的移动穿戴设备，因为它可能会造成伤害。避免大量暴露在灰尘或沙子中。

电池

请勿尝试自行更换手环电池，否则可能会损坏电池，从而导致过热和受伤。设备中的锂离子电池只能由制造商或授权服务提供商。电池必须与生活垃圾分开回收或处理。请勿焚烧电池。请勿将设备丢弃在生活垃圾中。如果您有任何疑问，请与我们联系。

运行温度

这款手环的设计工作环境温度为14°F至113°F（-10°C至45°C），储存温度为-4°F至131°F（-20°C至55°C）。如果在这些温度范围之外存放或操作，它可能会损坏并缩短电池寿命。避免将设备暴露在温度或湿度急剧变化的环境中。

避免长时间过热

请勿将设备暴露在极端温度或极端温度波动中。保护设备免受阳光直射。当手环正在充电或电源插头插入电源时，请勿在手环上睡觉或将其放在毯子、枕头或身体下。如果您有身体不适，请特别注意影响您检测身体热量的能力的状况。如果穿戴设备变得不舒服，请将其取下。

防水防尘

经测试，该设备可在特定环境下防水防尘。

本产品符合IP68（GB/T4208）防护等级要求，并支持在泳池游泳、浅水游泳和其他浅水水上活动中佩戴。

防水功能并非永久有效，防水性能可能会因日常佩戴而下降。本产品不适用于潜水、跳水、洗热水澡、泡温泉、洗桑拿以及其他在高速水流下进行的涉水或深水活动。

儿童健康

本设备及其附件可能含有小部件，请将设备及其附件放在儿童接触不到的地方。

请将设备及其附件放在儿童接触不到的地方。儿童可能会无意中损坏本设备。儿童可能会不慎损坏本设备及其附件或吞食小部件，从而导致窒息或其他危险。本设备不是玩具，儿童应在成人监护下使用本设备。

附件要求

使用未经批准或不兼容的电源、充电器或电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。

请勿在充电器表面长时间放置金属异物。否则可能导致设备故障或发热。请在 14°F 至 113°F (-10°C 至 45°C) 的温度范围内使用充电器为设备充电。如果外部环境温度过高，充电器将停止工作，请停止充电。为确保设备能够正常充电，请避免在车内充电。

维护和保养

如果长时间不使用设备，请在充满电后关闭设备并将其放置在阴凉、干燥的地方，并至少每 3 个月充电一次。

清洁和维护前，请停止使用设备，并断开与其他设备的所有连接或电缆。

保持设备及其附件干燥。请勿使用外部加热设备，如微波炉或吹风机来干燥。

请勿使设备及其附件受到强烈冲击或振动，否则可能会损坏设备及其附件并导致设备出现故障。

请勿将设备靠近热源或明火，如电热器、微波炉、烤箱、热水器、火炉、蜡烛或其他可能产生高温的地方。不要将设备放在阳光直射的地方。

请勿在磁场附近使用本设备，磁场可能会导致设备电路故障。

请勿在雷雨天气使用设备，否则可能会导致设备故障或电击危险。

请勿使用腐蚀性化学品、清洁剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。

请勿将磁条卡（如银行卡、电话卡等）与设备长时间接触，否则可能会导致设备损坏、磁条卡发生故障。请勿擅自拆卸或改装设备及其配件，否则设备及其配件将不在保修范围内。

日常佩戴时，您可以稍微放松表带或腕带，以确保与设备接触的皮肤部分干燥透气。如果您在长时间连续佩戴时感到不适，请取下设备，让手腕休息一段时间，或换一只手佩戴。如果仍然感到不适，建议您停止佩戴并咨询医生。

环境保护

请勿将本设备及其附件作为普通家居垃圾处理。请遵守当地有关处理本设备及其附件的法规，并支持回收活动。

环保使用说明

环保使用期限标识表示本产品环保使用期限为10年，即在10年内本产品含有的微量有毒有害物质或元素在正常使用的情况下，不会发生外泄或突变，不会对环境造成严重污染，不会对人身、财产造成严重损害。

本产品符合中国RoHS环保要求。

本产品各部件含有的微量有毒有害物质或元素名称及含量：

环保使用说明

环保使用期限标识表示本产品环保使用期限为10年，即在10年内本产品含有的微量有毒有害物质或元素在正常使用情况下，不会发生外泄或突变，不会对环境造成严重污染，不会对人身、财产造成严重损害。本产品符合中国RoHS环保要求。

本产品各部件含有的微量有毒有害物质或元素名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外 壳	○	○	○	○	○	○
内 壳	○	○	○	○	○	○
电 路 板	○	○	○	○	○	○
电 池	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011《电子电气产品限用物质的限量要求》规定的限量要求。



售后服务政策

本产品严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行三包服务。在三包有效期内，您可按照规定享受退货、换货或者修理的权利。退货、换货或者维修应当凭有效发票和三包凭证办理，请您妥善保管购机凭证。

保修说明：

1. 本产品在正常使用时，如果出现因制造，材料，设计等原因引起的产品质量问题，可享受三包服务。
2. 不在“三包”服务承诺范围内的情形（但不仅限于下列情形）：
 - 超出三包有效期的商品。
 - 无有效三包凭证及有效发货票的。
 - 擅自涂改三包凭证。
 - 非正常工作环境下使用，不正确的安装、使用、维护、保管所引起的损坏等。
 - 未经授权的拆卸、维修、滥用、改动。

- 因不可抗力（如水灾、火灾、地震、雷击等）造成的损坏。
- 产品标贴，产品序列号被撕毁、涂改。
- 产品正常使用下因自然耗损及磨损（包括但不限于屏幕、按键、电池、包装或外壳等）。

产品保修卡

产品名称：智能健康手环

产品型号：V8

购机日期：

购买渠道：

姓 名：

联系电话：

地 址：

问题简述：

合格证

CERTIFICATE

已检验

免责声明

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。说明书内的产品、配件、用户界面等插图均为说明参考示意图，与产品实物可能略有差异，请以实物为准。本产品非医疗器械，所提供的健康数据及建议仅供参考，不作为诊断和治疗的依据。产品说明书由广东友宏医疗科技有限公司出版，可能随时对说明书中的印刷错误、不准确信息进行必要更改，或对程序/设备进行改进，针对此类调整或变更，不做另行通知，但变更内容将更新到说明书的最新版本中。

生产企业：广东友宏医疗科技有限公司

生产地址：广东省深圳市宝安区广田路54号罗田华丰科技园6栋

联系电话：0755-3318 0892