



Dépannage

La balance ne s'allume pas.

. Si la balance ne s'allume pas ou si la pile est faible, remplacez-la et assurez-vous qu'elle est correctement installée.

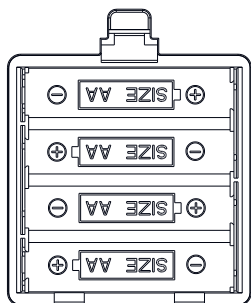

▲ Base de la balance

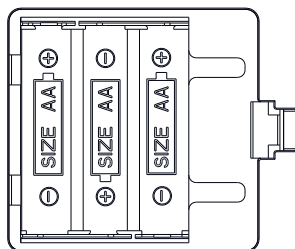

▲ Télécommande

Lorsque je monte sur la balance, elle ne répond pas.

. Vous devrez peut-être redémarrer la balance. Retirez les piles et réinsérez-les pour la redémarrer.

La balance ne se connecte pas à l'application Vitafit.

- . Assurez-vous que le système d'exploitation de votre téléphone fonctionne sous iOS 9.0 ou Android 4.3 ou version ultérieure.
- . Fermez et relancez l'application Vitafit. Assurez-vous d'utiliser la dernière version.
- . Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone. Pour les utilisateurs d'Android, assurez-vous également que la localisation est activée.
- . Assurez-vous que la balance n'est connectée à aucun autre téléphone ou application.
- . La balance doit être connectée à votre téléphone uniquement via l'application Vitafit. Ne connectez pas la balance aux paramètres Bluetooth de votre téléphone.

Les lectures de la balance semblent instables ou inexactes.

- . Assurez-vous que la balance est posée sur une surface dure et plane.
- . Assurez-vous que la balance est calibrée avant utilisation. Pour calibrer la balance, procédez comme suit : 1 : Montez sur la balance avec un seul pied pour l'activer, puis descendez ; 2 : L'écran affichera « CAL », puis « 0,0 » ou « 0,00 » pour indiquer que le calibrage est terminé.

Contenu du Colis

Numéro de série	Article	Quantité
1	Pèse-personne Intelligent	1
2	Télécommande	1
3	Pile AA 1,5 V	7
4	Manuel D'utilisation	1

Informations De Garantie

Vitafit garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en matière de matériaux et d'artisanat et fournit à tous les produits une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.51vitafit.com, www.vitafit.com

Email: service@51vitafit.com

Función del Indicador Principal

Indicador	Ubicación	Descripción
	Base de la Báscula	Cuando los iconos de la base de la báscula parpadean alternativamente, indica que la base de la báscula y el control remoto se están conectando.
	Base de la Báscula y Control remoto	Cuando la base de la báscula y el control remoto parpadean en verde, indica que la báscula está lista para pesar. Parpadea para pesar; si no parpadea, no pesa.
	Base de la Báscula	Cuando la base de la báscula parpadea constantemente, indica que el pesaje está en curso. Siempre encendida indica que el pesaje ha finalizado.
	Base de la Báscula y Control remoto	Cuando el icono rojo parpadea en la base de la báscula, indica que la batería de la base de la báscula tiene poca carga. Cuando el icono rojo parpadea en el control remoto, indica que la batería del control remoto tiene poca carga. Reemplácelo a tiempo para evitar fugas por descarga excesiva.

Instrucciones Breves de Funcionamiento

Nota: Todas las operaciones se controlan mediante el botón del control remoto.

Función	Botón	Descripción
Encendido		1. Presione el botón  para encender la base de la báscula y el control remoto.
Conexión	NA	1. Después de encender la báscula, cuando los iconos  y  parpadeen alternativamente en la pantalla del control remoto, significa que la base y el control remoto se están conectando. Si se muestra "0.0" y el icono  parpadea, significa que la conexión es exitosa y está lista para pesar. (CONSEJOS: Cuando el icono  verde parpadea, está lista para pesar; cuando el icono  verde está apagado, no está lista para pesar).
Pesaje	NA	1. Súbase a la báscula para pesar y permanezca quieto hasta que el peso se estabilice y el resultado se muestre en la pantalla.
MANTENER A CERO		1. Pulse el botón  para mantener el peso; el icono HOLD aparecerá en la pantalla. 2. Con la función de retención, la función de pesaje se desactiva; mientras tanto, el icono  del control remoto permanece apagado. Si no se realiza ninguna operación, el valor de retención permanecerá en la pantalla hasta que la báscula se apague automáticamente. 3. Pulse el botón  de nuevo para borrar el peso; luego, puede volver a subirse a la báscula para pesar.
Conversión de Unidades		1. Pulse el botón  para convertir unidades entre kg, lb y st. 2. Nota: Si la báscula está conectada a la aplicación, convierta las unidades a través de la aplicación; la función del botón de unidades del control remoto no es válida.
Sonido		1. Pulse el botón  para activar o desactivar la función de sonido. Observación: El icono  se ilumina en la pantalla cuando la función de sonido está activada; si está desactivada, también se apaga.
Apagado		1. Pulse el botón  durante unos 3 segundos para apagar la báscula. 2. Cuando la pantalla se apaga, significa que el apagado se ha completado.
Apagado Automático	NA	1. Cuando no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 60 segundos, la báscula se apagará automáticamente.

Precauciones de seguridad

1. Esta báscula no está destinada para uso comercial.
2. Esta báscula no debe utilizarse para diagnosticar o tratar ninguna condición médica. Consulte a su médico de cabecera antes de realizar cambios en su dieta, planes de ejercicio o actividades físicas.
3. Si está embarazada, tiene un marcapasos u otro dispositivo interno, no debe confiar demasiado en los datos proporcionados por este producto. Tenga en cuenta que todos los datos deben utilizarse como referencia y no sustituyen el consejo médico de un profesional autorizado de la salud.
4. Revise la báscula antes de utilizarla. No utilice la báscula si está dañada de alguna manera.
5. La plataforma es resbaladiza cuando está mojada. Asegúrese de que la plataforma y sus pies estén secos antes de subirse para realizar la medición.

Uso y cuidado

1. Para pesarse con seguridad y precisión, manténgase de pie con los pies separados a la altura de los hombros mientras está en la báscula.
2. NO golpee ni deje caer la báscula.
3. NO se ponga en el borde de la báscula ni salte sobre ella.
4. NO se ponga de pie sobre la plataforma de la báscula durante un período prolongado de tiempo o cuando no esté en funcionamiento.
5. NO almacene ni opere cerca de fuentes de calor o en ambientes húmedos.
6. Manipule la báscula con cuidado, ya que es un instrumento de precisión.
7. Limpie la báscula con un paño limpio y seco. Evite que entre agua o cualquier otro líquido en el interior de la báscula.
8. NO utilice productos químicos o abrasivos para limpiar la báscula.
9. Mantenga la báscula en un entorno fresco y seco.
10. Mantenga siempre la báscula en posición horizontal, no la guarde en posición vertical.
11. Si la báscula no enciende, compruebe si las pilas están instaladas correctamente. Sustituya las pilas si es necesario.
12. Si aparece un error en la pantalla o si la báscula no se apaga automáticamente, retire las pilas durante más de 30 segundos y vuelva a instalarlas.
13. NO sobrecargue la báscula (capacidad máxima de peso: 300kg/660lb/47st).
14. NO mezcle pilas nuevas y usadas o diferentes marcas de pilas para alimentar la báscula.

Presentación del Producto

Gracias por elegir la báscula inteligente Vitafit. Esta báscula es su asistente personal de salud, capaz de controlar y registrar su peso a través de la app Vitafit. Esperamos sinceramente que disfrute de nuestra báscula Vitafit.

Nota: Todas las operaciones se controlan mediante el botón del control remoto.




Especificaciones

Capacidad de peso:	Máx. 300 kg/660 lb/47 st
Unidad de peso:	kg/lb/st
Graduación:	0,05 kg/0,1 lb/0,1 st
Dimensiones de la base de la báscula:	381 x 330 x 38 mm
Dimensiones del control remoto:	180 x 105 x 45,3 mm
Pilas:	4 pilas AA para la base de la báscula, 3 pilas AA para el control remoto (preinstaladas)


Operación

Pesaje sin la aplicación Vitafit

1. Retire la pestaña aislante del compartimento de la batería.
2. Coloque la base de la báscula sobre una superficie dura y plana. Las alfombras o los suelos irregulares pueden afectar negativamente la precisión. Para el control remoto, puede colocarlo sobre una mesa o sostenerlo en la mano.
3. Presione el botón de encendido/apagado del control remoto para encender la báscula. Cuando aparezca "0.0" en la pantalla y el icono "●" parpadee, indica que la conexión entre la base de la báscula y el control remoto se ha establecido correctamente. Ahora está lista para pesar.

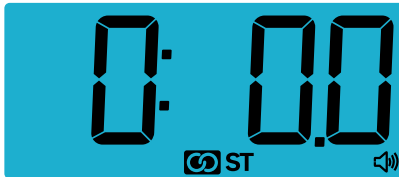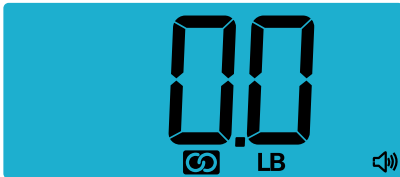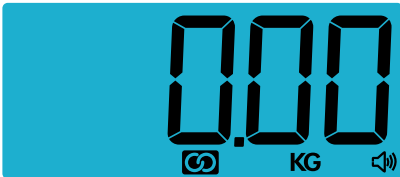

4.Súbase a la báscula para comenzar a pesar. Cuando el icono " ✓ " parpadee en la base de la báscula, indica que el proceso de pesaje está en marcha. Permanezca quieto para obtener un resultado estable.

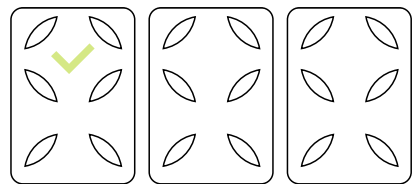

5.Una vez que el resultado del pesaje se estabilice, la pantalla LCD mostrará el peso y el zumbador emitirá un sonido BI cuando se active. En ese momento, puede presionar el botón HOLD para mantener el resultado actual. Si necesita pesar nuevamente, presione el botón HOLD nuevamente para borrar el resultado y luego súbase a la báscula para tomar la medida.



Pesaje con la App Vitafit


La báscula Bluetooth Vitafit puede conectarse con su teléfono móvil o Ipad a través de Bluetooth. Los datos de peso corporal e IMC se mostrarán en la aplicación llamada "Vitafit", que es fácil de descargar desde IOS App Store o Google Play.

Descargar la aplicación y registrar el ID

Escanee el código QR o Descargue " Vitafit" a través de IOS App Store o Google Play.




Registre su propio ID,A continuación, añada los datos personales y confirme el OK.

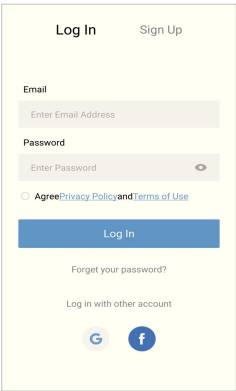

Cómo emparejar la báscula Vitafit con su smartphone

Encienda el Bluetooth® en su smartphone.
NOTA: Para los usuarios de Android, Ubicación y Bluetooth® deben estar activados para Android 6.0 y posteriores.
O BIEN, LA APLICACIÓN NO OBTIENE RESULTADOS DE ACUERDO CON LAS REGULACIONES DE ANDROID.

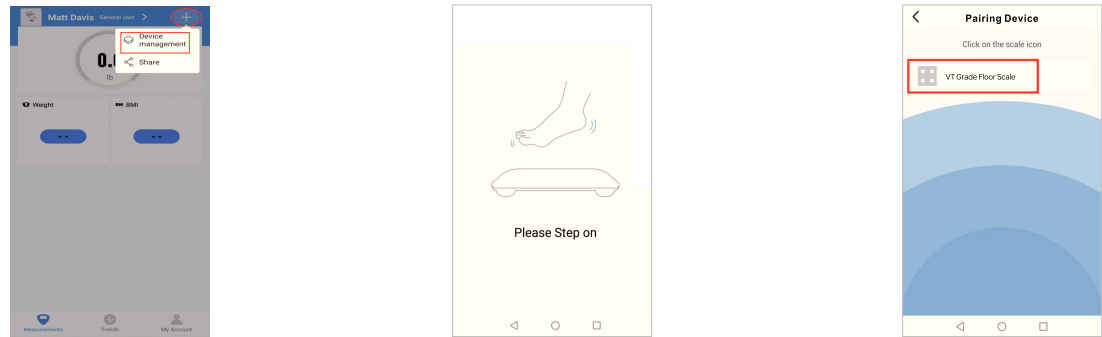

- 1.Retire la tira aislante del compartimento de la batería.
- 2.Coloque la báscula sobre una superficie plana y firme. Encienda el control remoto.
- 3.Abra la aplicación Vitafit y pulse "+" en la esquina superior derecha de la página "Administración de dispositivos" para emparejarla.


4. Cuando la aplicación muestre "Por favor, pise", pise la base de la báscula con un pie para activarla. El nombre del dispositivo aparecerá en la aplicación.
5. Añada el dispositivo "VitaFit Body Weight" para conectarlo. Una vez emparejado, el icono de Bluetooth se iluminará en la pantalla del control remoto. Ahora está listo para medir.
6. Cuando la pantalla del control remoto muestre "0.0", vuelva a subirse a la báscula para comenzar a medir. Permanezca quieto hasta que el resultado del pesaje sea estable. Cuando el resultado sea estable, el peso se mostrará en el control remoto. Mientras tanto, tanto el resultado del peso como el del BMI también se mostrarán en la aplicación.

Conexión con otras aplicaciones de fitness

Google Fit


Pasos de autorización en la aplicación VitaFit

1. En la página Mi cuenta, haga clic en "Health Connect".
2. Instale Heath Connect si el sistema del dispositivo es inferior a Android 14 y luego comience a autorizar. Si el sistema es Android 14 y superior, omita el paso de instalación, simplemente haga clic directamente en "Autorizar inmediatamente".
3. haga clic en el botón Permitir todo y la autorización será exitosa.

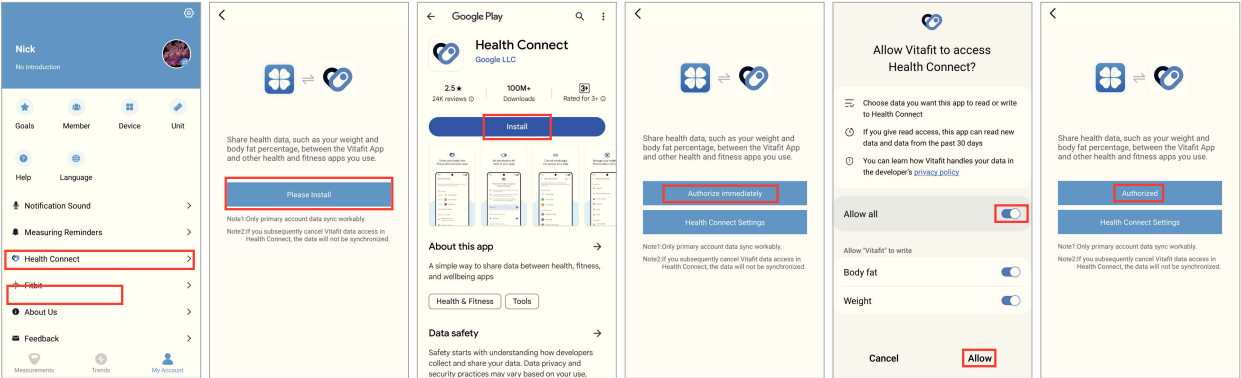


Conectar pasos en Google Fit

1. Abra Google Fit y haga clic en "Comenzar".
2. Haga clic en "Configurar".
3. Haga clic en "Listo" para finalizar la conexión.
4. Después de conectarse correctamente, sus datos de medición se sincronizarán automáticamente con Google Fit.

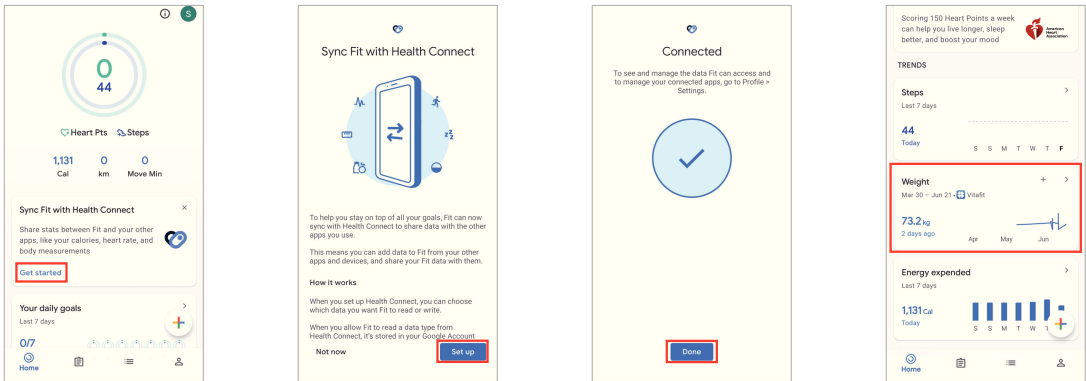


Samsung Health

1. En primer lugar, realice los mismos pasos de autorización en la aplicación VitaFit que se mencionan anteriormente en Google Fit.
2. Después de que la aplicación VitaFit se conecte con Health Connect, inicie Configuración en Samsung Health siguiendo los siguientes pasos.
 - 2.1. Abra Samsung Health, haga clic en "Configuración"
 - 2.2. Haga clic en "Conexión de salud"
 - 2.3. Haga clic en "Permisos de la aplicación".

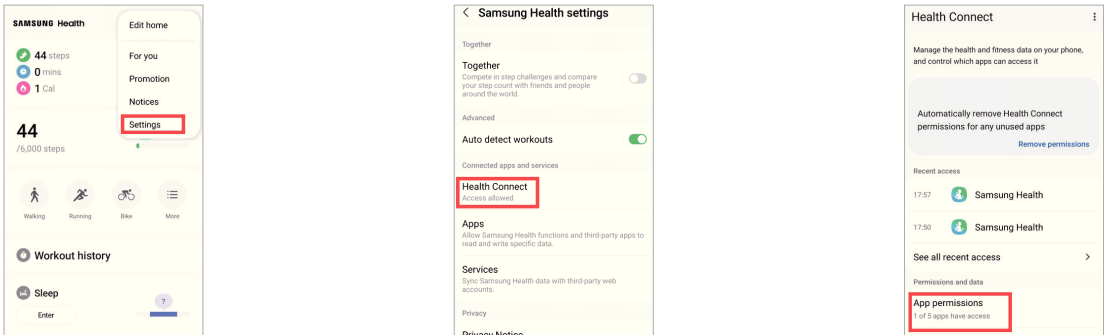


- 2.4. Haga clic en "VitaFit" para permitir el acceso.
- 2.5. Haga clic en el botón "Permitir todo" para finalizar la conexión.
- 2.6. Después de conectarse correctamente, sus datos de medición se sincronizarán automáticamente con Samsung Health.

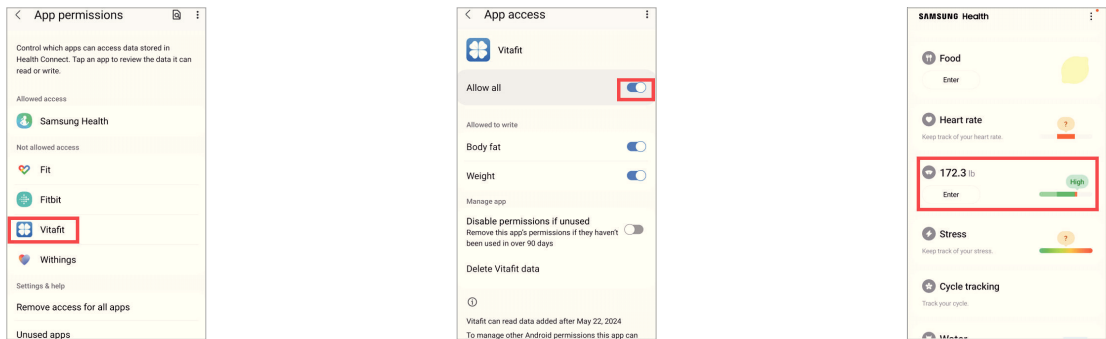


Apple Health

1. En la página de Mi cuenta, seleccione Apple Health en el menú.
 2. Haga clic en Autorizar y la aplicación autorizará inmediatamente.
 3. Abra la aplicación Health en su iPhone y vaya a Fuentes. Asegúrese de encender su Bluetooth®.
 4. Seleccione VitaFit de la lista.
 5. Active todas las categorías para que la aplicación VitaFit funcione.
- Nota: en el sistema iOS, no se puede sincronizar con Google Fit.

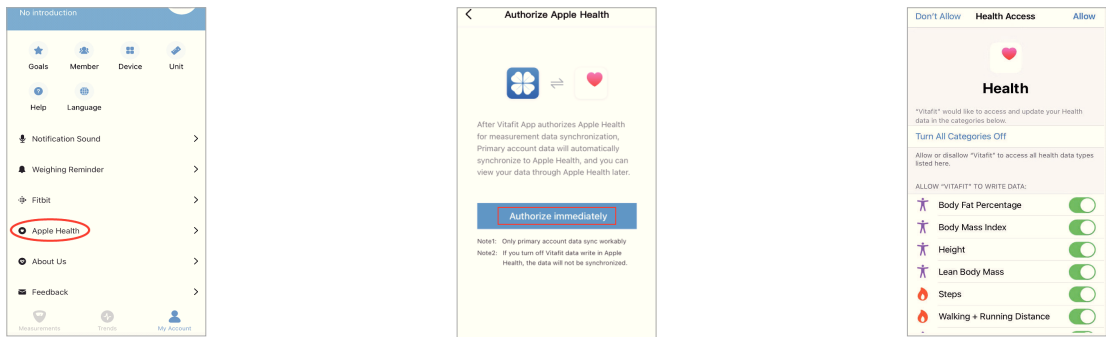


Fitbit

1. En la página de Mi cuenta, seleccione Fitbit en el menú.
2. Encienda Fitbit y luego inicie sesión en su cuenta de Fitbit.

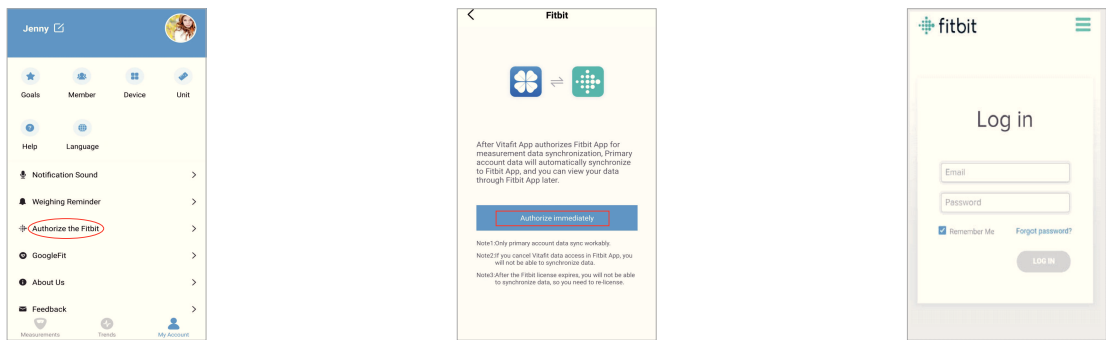


3. Seleccione Permitir para acceder a la aplicación de Fitbit.
4. Después de conectarse con éxito, sus datos se sincronizarán con la aplicación de Fitbit. Podrá ver su progreso tanto en la aplicación como en línea.

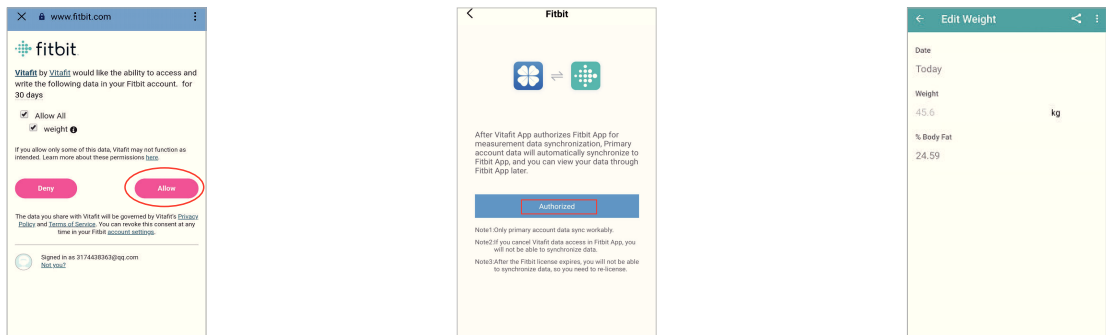


Solución de problemas

La báscula no enciende.

. Si la báscula no enciende o la batería está baja, es necesario cambiar las baterías y asegurarse de que estén instaladas correctamente.

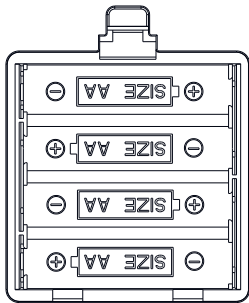

▲ Base de báscula

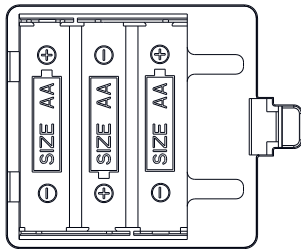

▲ Control remoto

Cuando me subo a la báscula, no responde.

. Es posible que tenga que reiniciar la báscula. Retire las pilas y vuelva a colocarlas para reiniciarla.

La báscula no se conecta a la app de Vitafit.

- . Asegúrate de que el sistema operativo de tu teléfono sea iOS 9.0 o superior o Android 4.3 o superior.
- . Cierra y vuelve a abrir la app de Vitafit. Asegúrate de estar usando la última versión.
- . Asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado. Si usas Android, asegúrate de que la ubicación también esté activada.
- . Asegúrate de que la báscula no esté conectada a ningún otro teléfono ni app.
- . La báscula solo debe conectarse a tu teléfono a través de la app de Vitafit. No la conectes a la configuración de Bluetooth de tu teléfono.

Las lecturas de la báscula parecen inestables o inexactas.

- . Asegúrese de que la báscula esté sobre una superficie dura y plana.
- . Asegúrese de que la báscula esté calibrada antes de usarla. Para calibrarla, siga estos pasos: 1: Súbase a la báscula con un pie para activarla y luego bájese. 2: La pantalla mostrará "CAL" y luego "0.0" o "0.00" para indicar que la calibración ha finalizado.

Contenido del Paquete

Número de serie	Artículo	Cantidad
1	Báscula Inteligente	1
2	Control Remoto	1
3	Batería AA de 1,5 V	7
4	Manual del Usuario	1

Información sobre la garantía

Vitafit garantiza que todos los productos son de la más alta calidad en materiales y mano de obra, y proporciona todos los productos con 3 años de garantía a partir de la fecha de compra.

Para más información, visite www.51vitafit.com, www.vitafit.com
Correo electrónico: service@51vitafit.com

Funzione Indicatore Principale

Indicatore	Posizione	Descrizione
	Base della Bilancia	Quando entrambe le icone della base della bilancia lampeggiano alternativamente, indica che la base della bilancia e il telecomando si stanno connettendo.
	Funzione Indicatore Principale	Quando la base della bilancia e il telecomando lampeggiano in verde, la bilancia è pronta per la pesatura. In generale, lampeggia per la pesatura, non lampeggia per la pesatura.
	Base della Bilancia	Quando la base della bilancia continua a lampeggiare, indica che la pesatura è in corso. Sempre acceso indica che la pesatura è completata.
	Funzione Indicatore Principale	Quando l'icona rossa lampeggia sulla base della bilancia, indica che la batteria della base della bilancia è scarica; Quando l'icona rossa lampeggia sul telecomando, indica che la batteria del telecomando è scarica; Sostituirla tempestivamente per evitare il rischio di perdite causate da una scarica eccessiva.

Brevi procedure operative

Nota: tutte le operazioni sono controllate tramite il pulsante del telecomando.

Funzione	Pulsante	Descrizione
Accendi		1. Premere il pulsante  per accendere la base della bilancia e il telecomando.
Connessione	NA	1. Dopo l'accensione, quando l'icona  e  lampeggiano alternativamente sullo schermo del telecomando, significa che la base della bilancia e il telecomando si stanno connettendo; quando viene visualizzato "0.0" e l'icona  lampeggia, significa che la connessione è avvenuta correttamente e che la bilancia è pronta per la pesatura.(SUGGERIMENTI: Quando l'icona  verde lampeggia, la bilancia è pronta per la pesatura; Quando l'icona  verde è spenta, la bilancia non è pronta per la pesatura.)
Pesatura	NA	1. Salire sulla base della bilancia per pesare, rimanere fermi finché il peso non si stabilizza e il risultato non viene visualizzato sullo schermo.
MANTENIMENTO ZERO		1. Premere il pulsante  per bloccare il peso; l'icona HOLD apparirà sullo schermo. 2. Con la funzione di blocco, la funzione di pesatura è disattivata, mentre l'icona  sul telecomando è spenta.Se non si esegue alcuna operazione, il valore bloccato rimarrà sullo schermo fino allo spegnimento automatico della bilancia. 3. Premere nuovamente il pulsante  per cancellare il peso, quindi è possibile salire sulla bilancia per pesare nuovamente.
Conversione unità di Misura		1. Premere il pulsante  per convertire l'unità di misura tra kg, lb e st. 2. Nota: quando la bilancia è connessa all'app, convertire l'unità di misura tramite l'app; la funzione del pulsante unità del telecomando non è valida.
Suono		1. Premere il pulsante  per attivare o disattivare la funzione audio. Nota: l'icona  è accesa sullo schermo quando la funzione audio è attiva; quando la funzione audio è disattivata, anche questa icona è spenta.
Spegnimento		1. Premere il pulsante  per circa 3 secondi per spegnere la bilancia. 2. Quando lo schermo si spegne, significa che lo spegnimento è completato.
Spegnimento Automatico	NA	1. Se non viene effettuata alcuna operazione per circa 60 secondi, la bilancia si spegnerà automaticamente.

Misure di sicurezza

1. Questa bilancia non è destinata all'uso commerciale.
2. Questa bilancia non deve essere atta al diagnosticare o trattare alcuna condizione medica. Consultare il proprio medico di base prima di apportare modifiche dieta, piani di esercizio e attività fisiche.
3. Se sei in gravidanza o hai un pacemaker o un altro dispositivo medico interno, non dovresti fare particolare affidamento sui dati forniti da questo prodotto. Si prega di notare che tutti i dati devono rilevati da questa bilancia devono essere utilizzati come riferimento e non sostituiscono la consulenza medica di un operatore sanitario autorizzato.
4. Controllare la bilancia prima dell'uso. Non utilizzare la bilancia se danneggiata.
5. La piattaforma è scivolosa quando è bagnata. Assicurarsi che la piattaforma e i piedi siano asciutti prima di salirci sopra per la misurazione.

Uso e cura

1. Per pesarsi in modo sicuro e preciso, tenere i piedi alla larghezza delle spalle mentre si è sulla bilancia.
2. NON colpire o far cadere la bilancia.
3. NON stare in piedi sul bordo della bilancia, non saltarci sopra.
4. NON sostare sulla piattaforma della bilancia per un periodo di tempo prolungato o quando il prodotto non è in funzione.
5. NON conservare o utilizzare la bilancia vicino a fonti di calore o in ambienti umidi.
6. Maneggiare la bilancia con cura, poiché è uno strumento di precisione.
7. Pulire la bilancia con un panno pulito e asciutto. Evitare di far entrare acqua o altri liquidi all'interno della bilancia.
8. NON utilizzare detergenti chimici o abrasivi per pulire la bilancia.
9. Conservare la bilancia in un ambiente fresco e asciutto.
10. Tenere sempre la bilancia in posizione orizzontale, non riporla mai in verticale.
11. Se la bilancia non si accende, controllare se le batterie sono state posizionate nel loro alloggio correttamente. Se necessario, sostituire le batterie.
12. Se viene visualizzato un errore sul display o se la bilancia non si spegne automaticamente, rimuovere le batterie per oltre 30 secondi, quindi reinstallarle.
13. NON sovraccaricare la bilancia (capacità di peso massima: 300kg/660lb/47st).
14. NON usare batterie nuove e usate contemporaneamente o batterie di marche diverse per alimentare la bilancia.

Introduzione al Prodotto

Grazie per aver scelto la bilancia pesa-persona Vitafit Smart. Questa bilancia è il tuo assistente personale per la salute, in grado di monitorare e registrare il tuo peso tramite l'app Vitafit. Ci auguriamo sinceramente che la nostra bilancia Vitafit ti piaccia.

Nota: tutte le operazioni sono controllate tramite il pulsante del telecomando.



Specifiche

Portata massima:	300 kg/660 lb/47 st
Unità di misura:	kg/lb/st
Graduazione:	0,05 kg/0,1 lb/0,1 st
Dimensioni della base della bilancia:	381 x 330 x 38 mm
Dimensioni del telecomando:	180 x 105 x 45,3 mm
Batterie:	4 batterie AA per la base della bilancia, 3 batterie AA per il telecomando (preinstallate)


Funzionamento

Pesatura senza l'app Vitafit

1. Rimuovere la linguetta isolante dal vano batteria.
2. Posizionare la base della bilancia su un pavimento duro e piano. Moquette o pavimenti irregolari possono influire negativamente sulla precisione. Per quanto riguarda il telecomando, è possibile posizionarlo sul tavolo o tenerlo in mano.
3. Premere il pulsante di accensione/spegnimento del telecomando per accendere la bilancia. Quando sullo schermo viene visualizzato "0.0" e l'icona " ● " lampeggia, significa che la connessione tra la base della bilancia e il telecomando è avvenuta correttamente. Ora la bilancia è pronta per la pesatura.

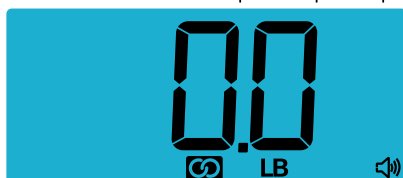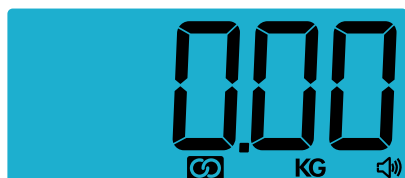

4. Salire sulla bilancia per iniziare la pesatura. Quando l'icona " ✓ " continua a lampeggiare sulla base della bilancia, significa che la pesatura è in corso. Rimanere fermi finché il risultato non si stabilizza.

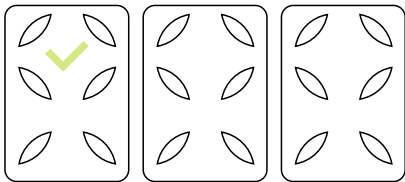

5. Una volta che il risultato si è stabilizzato, il display LCD visualizzerà il peso e il cicalino emetterà un suono "BI" quando il segnale acustico è attivato. A questo punto, è possibile premere il pulsante HOLD per mantenere il risultato corrente. Se è necessario pesare di nuovo, premere nuovamente il pulsante HOLD per cancellare il risultato, quindi salire sulla bilancia per effettuare la misurazione.




Pesare con l'ausilio dell'app Vitafit


La bilancia Bluetooth Vitafit permette la connessione al telefono cellulare o Ipad tramite Bluetooth. I dati di peso corporeo e BMI verranno visualizzati nell'app denominata "Vitafit", facile da scaricare da IOS App Store o Google Play.

Scarica l'app e registra l'ID

Scansiona il codice QR per scaricarla, o scarica l'app "Vitafit" tramite App Store (iOS) o Google Play Store (Android)


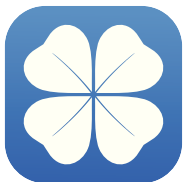


Registra il tuo ID, aggiungi quindi i tuoi dati personali e conferma premendo OK.

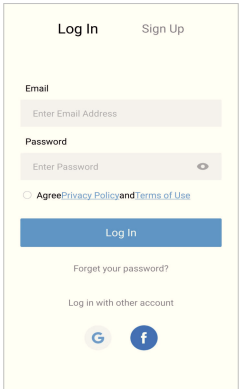

Associazione della bilancia Vitafit al tuo smartphone

Attiva il Bluetooth® sul tuo smartphone.
NOTA: per gli utenti Android, posizione e Bluetooth® devono essere attive su Android 6.0 e oltre.
OPPURE L'APP NON OTTIENE RISULTATI SECONDO LE NORMATIVE ANDROID.

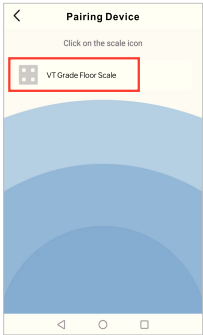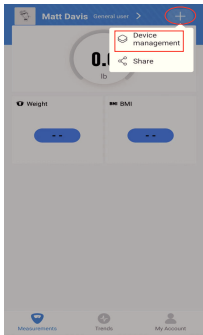

1. Rimuovere la striscia isolante dal vano batterie.
2. Posizionare la bilancia su una superficie piana e dura. Accendere il telecomando.
3. Aprire l'app Vitafit e toccare "+" nell'angolo in alto a destra della pagina "Gestione dispositivi" per associarla.
4. Quando sull'app viene visualizzato il messaggio "Please Step on", salire sulla base della bilancia con un piede per attivarla. Il nome del dispositivo verrà visualizzato sull'app.


5. Aggiungere il dispositivo denominato "VitaFit Body Weight" per la connessione. Una volta completata l'associazione, l'icona Bluetooth diventerà fissa sul display remoto. Ora è pronto per la misurazione.
6. Quando sul display remoto viene visualizzato "0.0", salire nuovamente sulla bilancia per iniziare la misurazione, rimanere fermi fino a ottenere un risultato stabile. Quando il risultato della pesata è stabile, il peso verrà visualizzato sul telecomando; contemporaneamente, sia il risultato del peso che quello del peso corporeo verranno visualizzati anche sull'app.

Connessione con altre app di fitness

Google Fit


Passaggi di autorizzazione sull'app VitaFit

1. Nella pagina Il mio account, fai clic su "Health Connect".
2. Installa Health Connect se il sistema del dispositivo è inferiore ad Android 14, quindi avvia l'autorizzazione. Se il sistema è Android 14 e versioni successive, salta il passaggio di installazione, fai semplicemente clic direttamente su "Autorizza immediatamente".
3. fare clic sul pulsante Consenti tutti, quindi l'autorizzazione avrà esito positivo.

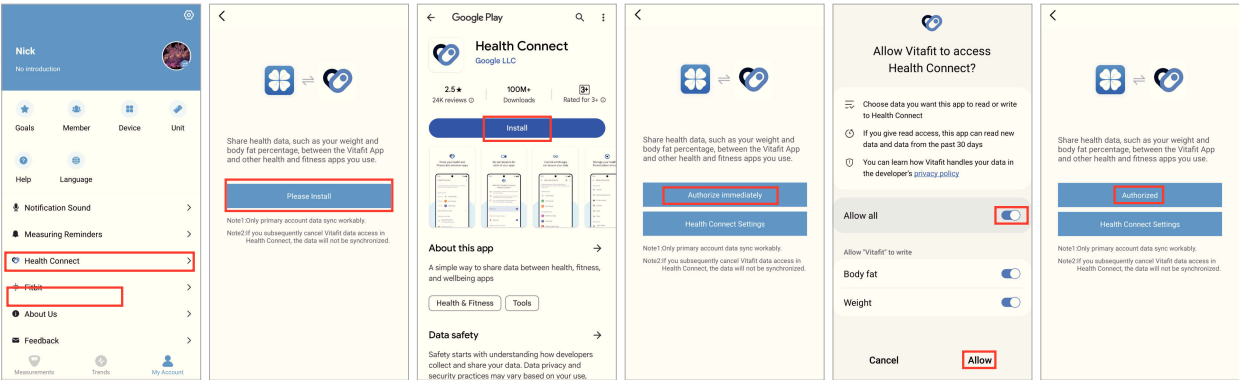


Collega i passaggi su Google Fit

1. Apri Google Fit e fai clic su "Inizia".
2. Fai clic su "Configura".
3. Fare clic su "Fine" per terminare la connessione.
4. Dopo aver effettuato la connessione con successo, i dati di misurazione si sincronizzeranno automaticamente con Google Fit.

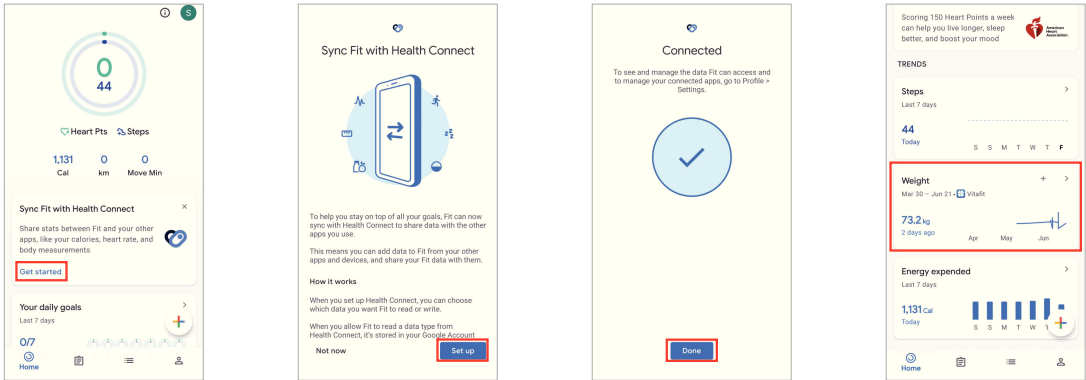


Samsung Health

1. Innanzitutto, esegui gli stessi passaggi di autorizzazione sull'app VitaFit indicati sopra per Google Fit.
2. Dopo che l'app VitaFit si è connessa a Health Connect, avviare Impostazioni su Samsung Health come segue.
 - 2.1. Apri Samsung Health, fai clic su "Impostazioni"
 - 2.2. Fare clic su "Connettività Salute"
 - 2.3. Fai clic su "Autorizzazioni app"

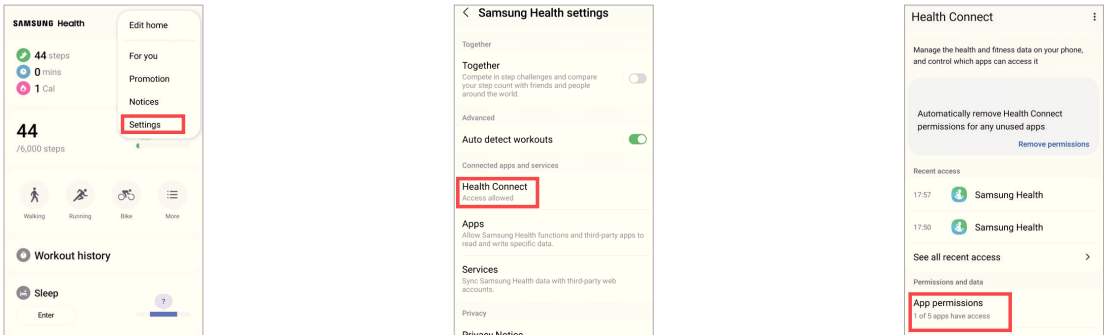


- 2.4. Fare clic su "VitaFit" per consentire l'accesso
- 2.5. Fare clic sul pulsante "Consenti tutti" per completare la connessione
- 2.6. Dopo aver effettuato correttamente la connessione, i dati di misurazione verranno sincronizzati automaticamente con Samsung Health

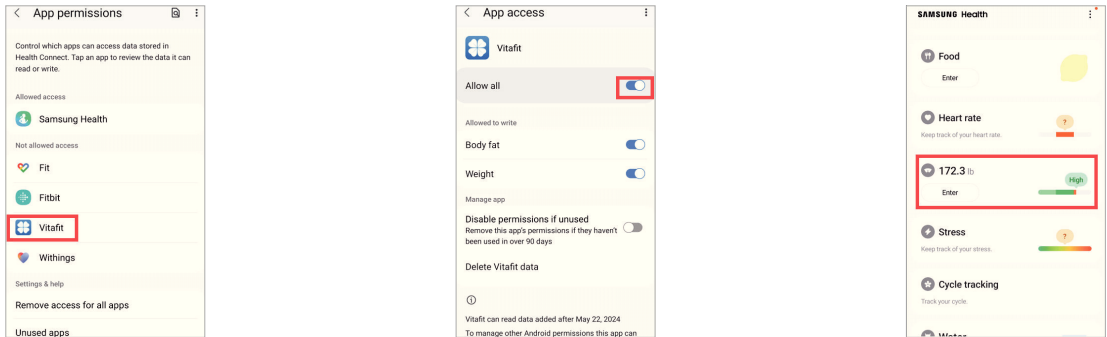


Apple Health

- 1. Nella pagina account, seleziona Apple Health dal menu.
 - 2. Premi Autorizza e l'App verrà, appunto, autorizzata.
 - 3. Apri l'app Salute sul tuo iPhone, apri quindi le Sorgenti. Assicurati di attivare il Bluetooth®.
 - 4. Seleziona VitaFit dall'elenco.
 - 5. Attiva tutte le categorie per consentire il funzionamento ottimale dell'app VitaFit.
- Nota: nel sistema IOS, non è stato possibile eseguire la sincronizzazione con Google Fit.

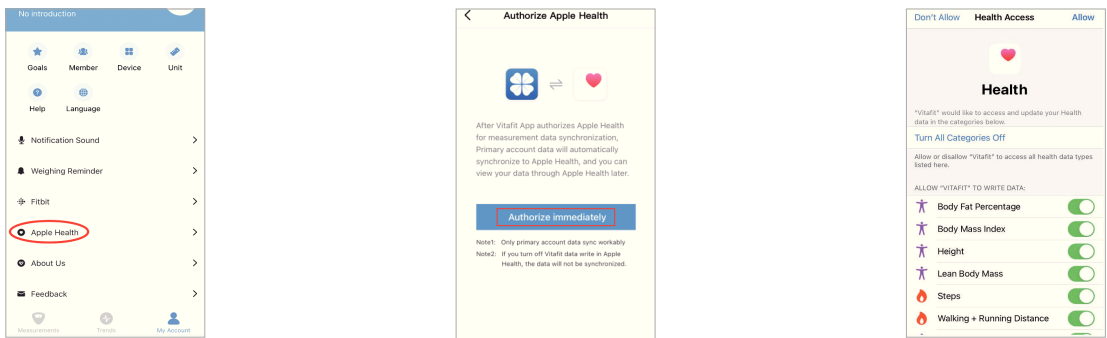


Fitbit

- 1. Nella pagina account, seleziona Fitbit dal menu.
- 2. Accendi Fitbit, quindi accedi al tuo account Fitbit.

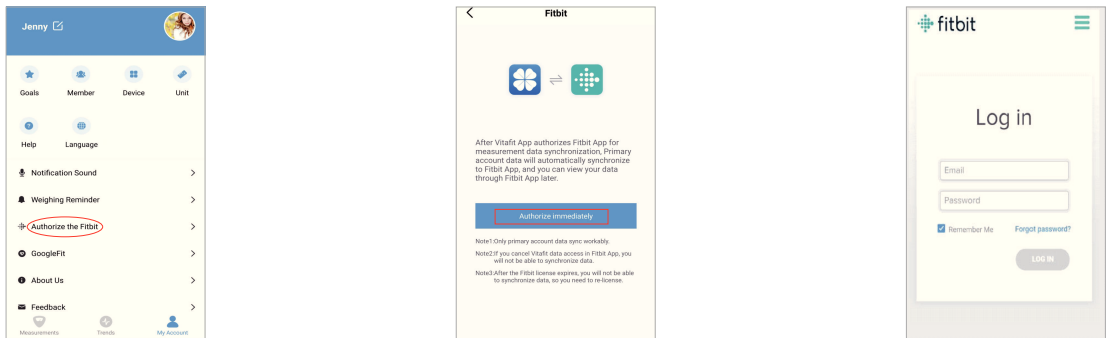


- 3. Tocca Consenti per accedere all'app Fitbit.
- 4. Dopo aver effettuato correttamente la connessione, i dati verranno sincronizzati con l'app Fitbit, e sarai in grado di visualizzare i tuoi progressi sia sull'app che online.

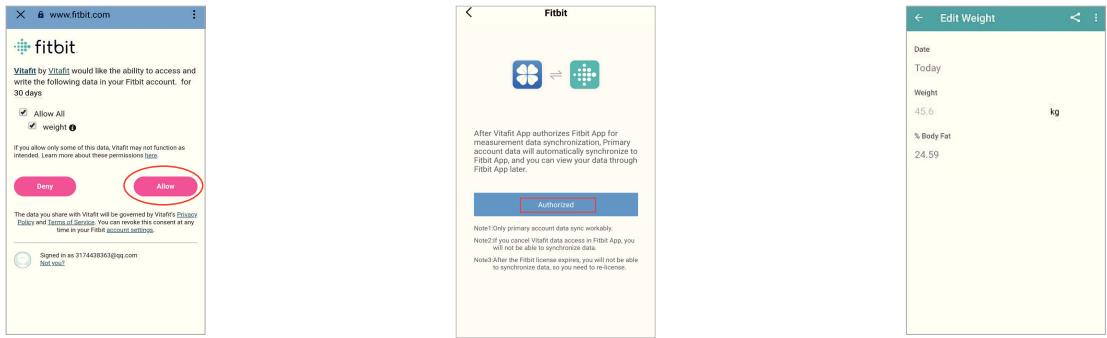


Risoluzione dei problemi

La bilancia non si accende.

. Se la bilancia non si accende o la batteria è scarica, è necessario sostituire le batterie e assicurarsi che la batteria sia installata correttamente.

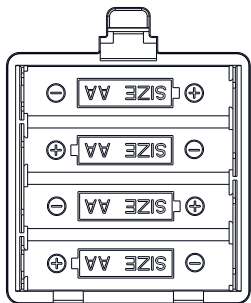

▲ Base in scala

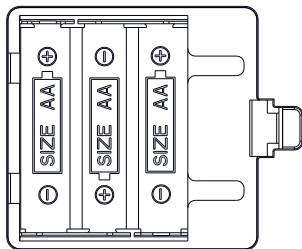

▲ Telecomando

Quando salgo sulla bilancia, non risponde.

. Potrebbe essere necessario riavviare la bilancia. Rimuovi le batterie e reinseriscile per riavviare la bilancia.

La bilancia non si connette all'app VitaFit.

- . Assicurati che il sistema operativo del tuo telefono sia in esecuzione su IOS9.0+ o Android 4.3+.
- . Chiudi e riavvia l'app VitaFit. Assicurati di utilizzare la versione più recente.
- . Assicurati che il Bluetooth del tuo telefono sia attivato. Per gli utenti Android, assicurati che anche la tua posizione sia attivata.
- . Assicurati che la bilancia non sia attualmente connessa a nessun altro telefono o app.
- . La bilancia dovrebbe essere connessa al tuo telefono solo tramite l'app VitaFit. Non connettere la bilancia alle impostazioni Bluetooth del tuo telefono.

Le letture della bilancia sembrano instabili o imprecise.

- . Assicurarsi che la bilancia sia su una superficie dura e piana.
- . Assicurarsi che la bilancia sia calibrata prima dell'uso, per calibrare la bilancia, 1: Salire sulla bilancia con un piede per attivarla e poi scendere; 2: Il display mostrerà "CAL" e poi "0.0" o "0.00" per indicare che la calibrazione è completa.

Contenuto della Confezione

Numero di serie	Articolo	Quantità
1	Bilancia pesapersona Intelligente	1
2	Telecomando	1
3	Batteria AA da 1,5 V	7
4	Manuale Utente	1

Informazioni di garanzia

VitaFit garantisce che tutti i prodotti siano della massima qualità nei materiali e nella produzione, fornendo a tutti i prodotti una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto.

Per maggiori informazioni per favore visita www.51vitaFit.com, www.vitaFit.com.
Mail: service@51vitaFit.com

EU Declaration of Conformity
for
RED Directive 2014/53/EU

We,
Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd.

hereby, declare that the essential requirements set out in the RED Directive 2014/53/EU
have been fully fulfilled on our product with indication below:

Product Name: Medical Grade Floor Scale
Brand Name: Vitafit, Homebuds
Model No.: VT739 VT7395 VT7397 VT7399
The following standards have been applied for the investigation of compliance:
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
IEC 60335-1:2020
EN 60335-1:2012/A15:2021

And apply notified body assessment:
Notified Body number 3042
Compliance Testing, LLC
1724 S. Nevada Way Mesa, AZ 85204, Mesa
United States

Software Version:	Scale Base: V3, Remote Controller: V8
Hardware Version:	Scale Base: V8, Remote Controller: V6
System Components	
Component 1	/
Optional Components	
Optional 1	/

Furthermore, the ISO requirement for the in-process quality control procedure as well as the manufacturing process has been reached. The technical document as well as the test reports will be kept for a period at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection.
Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

Manufacturer Contact

Company: Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd.
Address: 2-3/F, Bldg 5, 1st Industrial Zone, Changzhen Community, Yutang town, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China

Name &Title: Xinqiang Xu / General Manager
Tel No.: +86-755-2717-5093
Fax No.: +86-755-2717-5261
E-mail: ricky@iascent.com.cn

Date: 9/26/2025

Caution:

Use the Product in the environment with the temperature Between -10°C and 50°C; Otherwise, it may damage your product. Products can only be used below 2000m altitude

For the following equipment:
Product Name: Medical Grade Floor Scale
Brand Name: /
Model No.: VT739 VT7395 VT7397 VT7399
Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd.
E-mail: ricky@iascent.com.cn

hereby declares that this [Name: Medical Grade Floor Scale, Model: VT739 VT7395 VT7397 VT7399] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCOPPECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS

This product is intended for sale and application in a business environment.
RED Article 10 2
-This product can be used across EU member states
RED Article 10 10
-The product is class 1 product, No restrictions

The RF distance between body and product is 5M
Bluetooth Version:Bluetooth V5.0(BLE Mode)
Frequency Range:2402MHz-2480MHz
Max.RF Output Power:6.76dBm (EIRP)